




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 11117 Fotel do masażu inSPORTline Marvyn

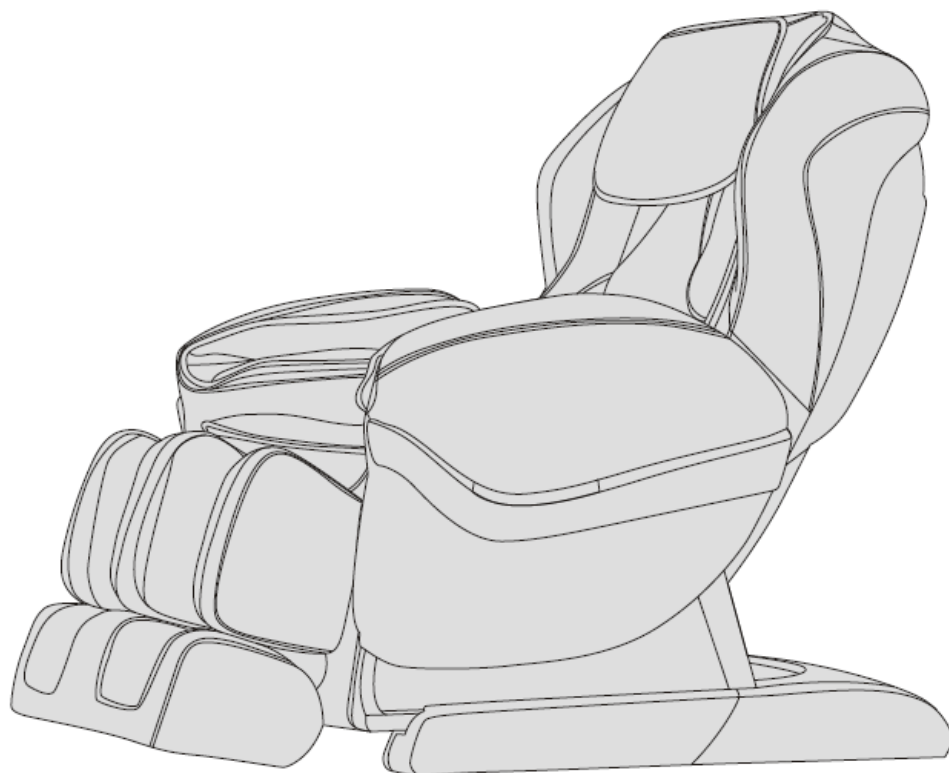

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA	3
OPIS CZĘŚCI	5
FUNKCJE	5
STEROWANIE.....	6
INSTALACJA	10
SPECYFIKACJA PRODUKTU	12
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	13

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby prawidłowo obsługiwać urządzenie. Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

UWAGA: Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i specyfikacji bez wcześniejszego ostrzeżenia. Kolor produktu zależy od modelu.

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Trzymaj dzieci z daleka od ruchomych części.
- Używaj odpowiedniego i właściwie uziemionego źródła zasilania.
- Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, przed każdym czyszczeniem lub konserwacją należy podłączyć przewód z gniazdka po każdym użyciu.
- Używaj go tylko zgodnie z instrukcją.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów.
- Używaj go tylko w pomieszczeniach.
- Przeczytaj podręcznik przed pierwszym użyciem.
- Niewłaściwe użycie jest surowo zabronione.
- Zalecana długość masażu: 20 minut.
- Nigdy nie używaj go, jeśli skóra jest uszkodzona lub zużyta.
- Nigdy nie używaj go, jeśli osłony lub inne elementy są uszkodzone lub zużyte.
- Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od brudu. Nigdy nie używaj go, jeśli wentylacja jest zablokowana.
- Nigdy nie kłaść żadnych przedmiotów na fotelu.
- Nie śpij na fotelu.
- Nie używaj go pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Użyj go godzinę po posiłku.
- Nie należy przekraczać intensywności masażu, aby uniknąć obrażeń.
- Umieść go na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Zachowaj odstęp bezpieczeństwa wynoszący co najmniej 0,6 m wokół tego urządzenia.
- **Maksymalna waga użytkownika:** 100 kg

ŚRODOWISKO WYKORZYSTANIA

- Unikaj wysokich temperatur i wilgotności (nie używaj go w łazience itp.).
- Nie używaj go, gdy temperatura otoczenia gwałtownie się zmieniła.
- Nie używaj go w zakurzonej lub brudnej przestrzeni.
- Zapewnij odpowiednią wentylację i wolną przestrzeń wokół fotela.

FOTEL NIE JEST ODPOWIEDNI DLA

- Osoby z osteoporozą
- Osoby z powikłaniami serca lub osoby z implantami elektronicznymi, takie jak rozrusznik serca itp.
- Osoby z gorączką lub podwyższoną temperaturą ciała
- Kobiety w ciąży lub kobiety w okresie
- Osoby z objawami pourazowymi.
- Osoby z problemami skórnymi
- Użytkownicy poniżej 14 roku życia i osoby z zaburzeniami psychicznymi

- Ludzie, którym lekarz zalecił, aby odpoczywali lub ludzie, którzy nie czują się dobrze
- Osoby z mokrą lub wilgotną skórą (po kąpielach, ćwiczeniach itp.)
- Powierzchnia fotela jest podgrzewana. Osoby o większej wrażliwości skóry muszą zwracać szczególną uwagę.

BEZPIECZEŃSTWO

- Sprawdź właściwe napięcie przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nigdy nie używaj rdzenia lub kabla mokrymi rękami.
- Chroń fotel przed wodą, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
- Chronić przewody i nie modyfikować obwodu elektrycznego.
- Nigdy nie używaj wilgotnej szmatki do czyszczenia części elektrycznych (włącznika, gniazdka itp.)
- Jeśli zasilanie zostanie przerwane, należy zwrócić uwagę, aby uniknąć porażenia prądem, gdy zacznie się ponownie.
- Jeśli fotel nie działa prawidłowo, przestań używać i skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli nie czujesz się dobrze, przestań używać i skonsultuj się z lekarzem.



KONSERWACJA

- Konserwacja musi być wykonywana wyłącznie przez specjalistę lub profesjonalną obsługę. Nie należy go demontować i nie modyfikować.
- Po każdym użyciu wyjmij go z gniazdka.
- Nie używaj go, jeśli przewód, gniazdko lub gniazdko jest uszkodzony.
- Przed długim przechowywaniem zwinąć przewód i schować fotel w suche i czyste miejsce.
- Unikaj skrajnych temperatur, ognia i źródeł ciepła. Chroń go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Czyść urządzenie tylko suchą szmatką. Nigdy nie używaj rozpuszczalników, benzyny ani alkoholu.
- Ze względu na specjalną konstrukcję części mechaniczne nie wymagają dodatkowej konserwacji.
- Chroń go przed ostrymi przedmiotami.
- Nie przesuwaj go na nierównej powierzchni. Przed transportem podnieś go i przetransportuj.
- Nie używaj go zbyt długo w sposób ciągły. Zrób przerwy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Jest to normalne, podczas użytkowania słychać dźwięk silnika.
- Jeśli fotel nie działa, sprawdź połączenie przewodu zasilającego i wyłącznika sieciowego.
- Masaż zostanie automatycznie zatrzymany po osiągnięciu ustawionego czasu. Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli jest używane przez długi czas w sposób ciągły i przegrzewa się. W takim przypadku pozwól mu ostygnąć przez co najmniej 30 minut. przed ponownym uruchomieniem.

OPIS CZĘŚCI

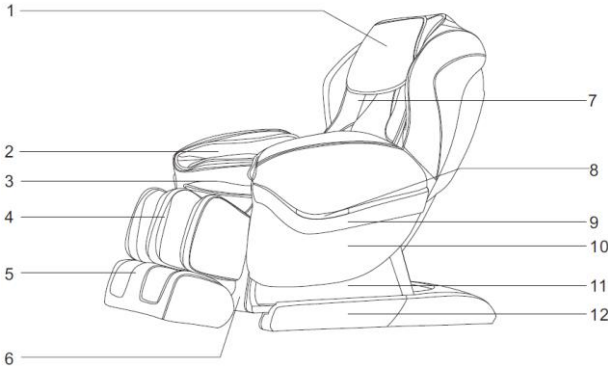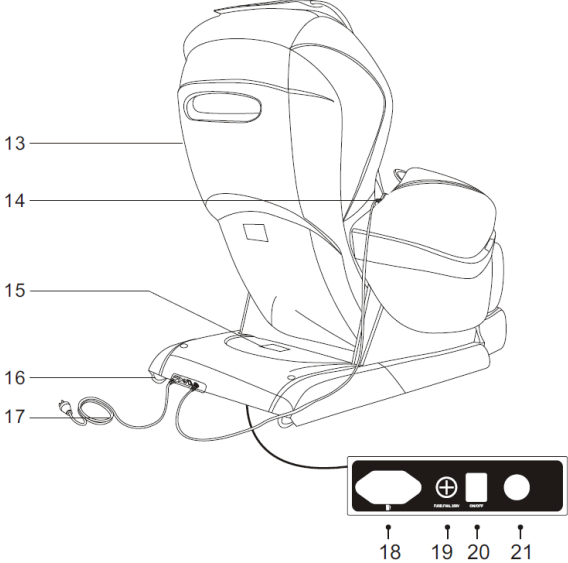	
1. Poduszka 2. Zespół poduszki powietrznej 3. Poduszka siedziska 4. Rama nóg 5. Rama stóp 6. Przednia osłona 7. Poduszka oparcia 8. Wskaźnik kolorowy LED 9. Ozdabianie taśmy 10. Podłokietnik 11. Przesuwana płyta boczna 12. Podstawa	13. Rolka 14. Kontroler ręczny 15. Pokrywa podwozia 16. Ruchome koło 17. Przewód zasilający 18. Gniazdo sieciowe 19. Skrzynka bezpieczników 20. Wyłącznik zasilania 21. Gniazdo sterownika


FUNKCJE

- Fotel posiada zestaw pionowo poruszających się rąk do masażu z 4 pokrętłami masującymi.
- Rodzaje masaży: shiatsu, ugniatanie, gwintowanie, pukanie, równoczesne ugniatanie i gwintowanie.
- 5 automatycznych trybów masażu: komfort, relaks, dekompresje, szyja i ramiona, plecy i talia.
- Trzy funkcje pamięci masującej: M1, M2, M3.
- Masaż manualny dla górnej części ciała z 5 opcjami: częściowym, stałym, ogólnym, szyi i ramię, pleców i talii. Każdy tryb ma regulowaną prędkość na 3 poziomach. Podczas stałego masażu dłonie masażu można przesuwac w górę i w dół. Podczas stukania, shiatsu lub pukania odległość pomiędzy dwiema kulkami do ugniatania jest regulowana na 3 poziomach: szeroki, średni, wąski.
- Masaż pneumatyczny: 3 regulowane tryby: masaż całego ciała, ramiona (8 poduszek powietrznych), stopy (20 poduszek powietrznych) - regulowana intensywność na 3 poziomach.

- Funkcja grzania grzbietu - włókna węglowe.
- Wskaźnik LED na podeście.
- Możliwość przedłużenia podpórki łydki zgodnie z wysokością użytkownika.
- Technologia "przesuwanie się do przodu i wysuwanie" - oparcie dla oparcia w celu zaoszczędzenia miejsca
- Maksymalnie gładki oparcie i rozkładanie siedzenia do linii poziomej].
- Łydki i oparcia można rozkładać razem i automatycznie powracać do pozycji początkowej.

STEROWANIE

KONTROLER (RYSUNEK TYLKO DLA ILUSTRACJI):

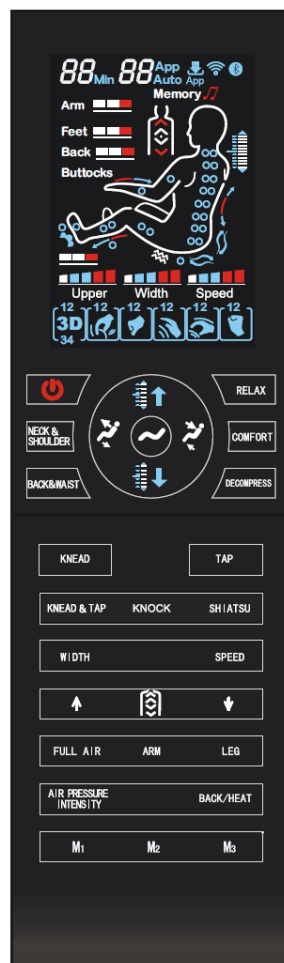


1. WŁĄCZANIE ZASILANIA

 Podłączanie przewodu zasilającego	 Lokalizacja głównego przełącznika (ON / OFF)
--	--

2. WŁĄCZENIE MASAŻU

- Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć masaż.
- Poczekaj, aż wykrycie ramion i punktów masażu zostanie zakończone.
- Dostosuj położenie dłoni masażu za pomocą przycisków UP i DOWN. Pozycja ramienia jest regulowana w 10 klasach. Masaż rozpocznie się automatycznie w ciągu 10 sekund od regulacji pozycji.

Przycisk	Opis	Wyświetlacz
	Przenieś kule do masażu w górę	
	Przenieś kule do masażu w dół	

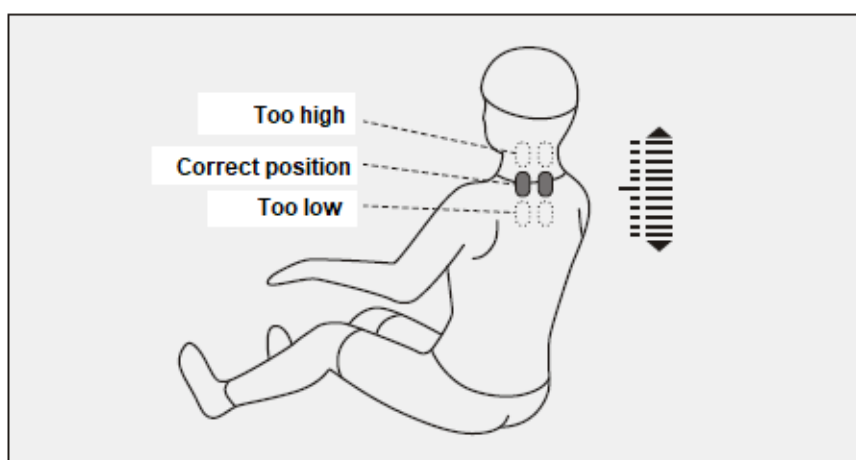

- Aby rozpocząć masaż, możesz również użyć jednego z przycisków pamięci M1, M2 lub M3 - możesz uruchomić tryb masażu, który został zapisany w pamięci z ostatniego masowania.



Funkcja	Przycisk
Przyciski pamięci do wyboru masażu	
	
	





- Opis automatycznego masażu:

Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Masaż automatyczny		Głęboki masaż punktów akupresury (relaks przy bolesnej okolicy).	Auto F1
		Zrelaksuj się w mięśniach i kościach	Auto F2
		Optymalizacja krążenia krwi	Auto F3
		Masaż szyi i ramion	Auto F4

		Masaż pleców i talii	Auto F5
--	---	----------------------	---------

- Górne ciało

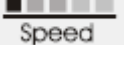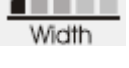Funkcja	Przycisk	Regulacja kul do masażu	Wyświetlacz
Rodzaj masażu		Prędkość, szerokość	
		Prędkość	
		Prędkość, szerokość	
		Prędkość	
		Prędkość, szerokość	
Prędkość		3 poziomy	
Szerokość		3 poziomy	

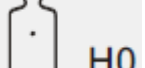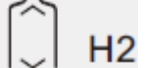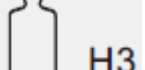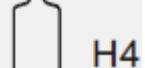Funkcja	Przycisk	Opis		Wyświetlacz
Regulacja oparcia		Stała pozycja masażu		
		Masaż miejscowy (mała powierzchnia)		
		Globalny masaż		
		Masaż szyi i ramion		
		Masaż pleców i talii		
		Regulacja obszarów punktu akupresury / docelowego masażu	Głowica masująca w górę	
			Głowica masująca w dół	

- Masaż powietrzem

Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
---------	----------	------	-------------

Pełne powietrze		Do ramion, nóg i podnóżka	Arm  Feet 
Ramię		Masaż ramion	Arm 
Noga		Noga i stopy	Feet 
Intensywność		3 regulowane poziomy	Arm  Feet 

- Inne dostępne funkcje


Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Ogrzewanie		Ogrzewanie grzbietu (długofalowe promieniowanie podczerwone). Fotel będzie w pełni ogrzewane w ciągu 3 minut. po aktywacji funkcji.	
Przycisk podnoszenia		Naciśnij go, a oparcie wznosi się powoli, a reszta łydek opada. Puść go, aby zatrzymać. Po dojściu do góry zostanie uruchomiony alarm dźwiękowy.	
Przycisk opuszczania		Naciśnij go i oparcie powoli opada, a podpórka łydek idzie w górę. Puść go, aby zatrzymać. Po dotarciu do dna zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy.	
Tryb automatycznego opuszczania		Automatyczne przełączanie pomiędzy trybami (3 tryby we wszystkich).	

3. Wyłączanie / wyłączenie masaż

- Naciśnij przycisk zasilania, aby zatrzymać masaż (oparcie pleców i łydek wraca do pozycji wyjściowej) lub ustawiony czas upłynął (w takim przypadku reszta nie wraca automatycznie). Po masażu aktualne ustawienie można zapisać w pamięci komputera.
- **Pamięć w trybie masażu:** Po zatrzymaniu masażu wyświetli się słowo "Pamięć". Oznacza to, że użytkownik może nacisnąć klawisze M1, M2 lub M3 przed wyłączeniem, aby zapisać aktualne ustawienie.
- Dłonie i oparcia masażu wracają do pozycji początkowej, jeśli przycisk Power zostanie ponownie naciśnięty lub w ciągu 10 sekund od zakończenia masażu.

Funkcja	Przycisk	Wyświetlacz
Ustawienia pamięci		SA 1 Memory
		SA 2 Memory
		SA 3 Memory


- Wyłącz fotel po zakończeniu masażu.

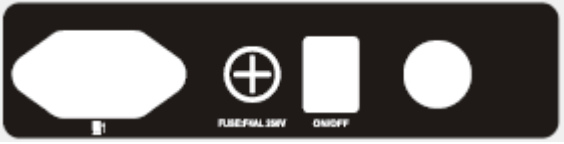	
Zmień lokalizację (ON / OFF)	Wtyczka kabla zasilającego

INSTALACJA


UWAGA:

- Jeśli fotel jest ustawiony do leżenia w pozycji leżącej z podpórkami łydek w pozycji poziomej, nie naciskaj na łydki za pomocą całego ciężaru ciała.

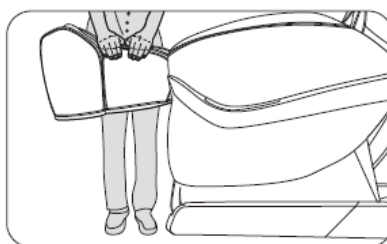


4. Instalacja drążka łączącego podpórki łydek

- Otwórz opakowanie (rys. 1), włączyc za pomocą kontrolera i ustawić w pozycji zgodnej z rys. 2.

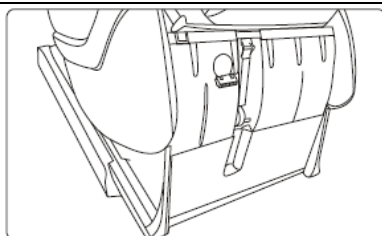


Rys. 1

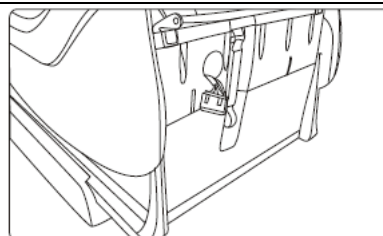


Rys. 2

- Zdejmij drążek łączący z wewnątrz siedziska, wyrównaj w otworze i włóż sworzeń (Rys. 3).
- Rys. 4: Pomyślna instalacja.

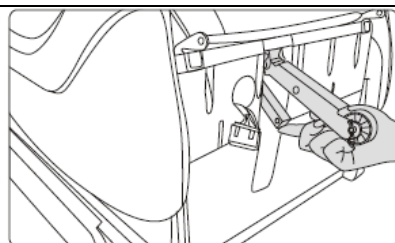

Rys. 3

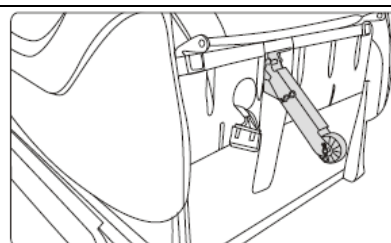

Rys. 4


- Po instalacji słupka łączącego, przywróć oparcie (rys. 5) i zainstaluj podparcie łydek.




Rys. 5

5. 5. Instalacja podpórek łydek

- Wstaw obracające się wały w osi podpórek łydek. Instalacja wałka musi umożliwiać włożenie kołków (rys. 1 i 2).

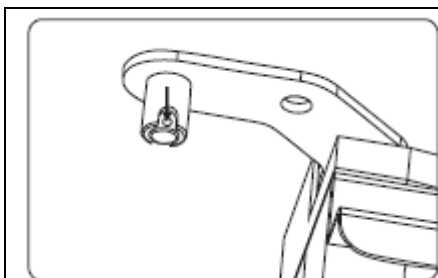


Rys. 1

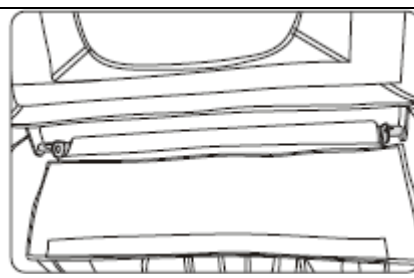


Rys. 2

- Włóż kołki. (Rys. 3 i 4)

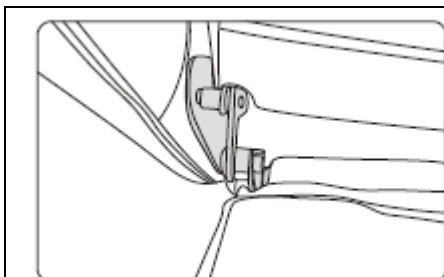


Rys. 3

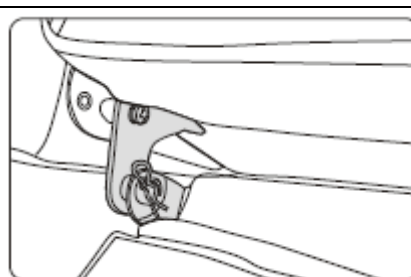


Rys. 4

6. Poduszki pod głowę i oparcia

Poduszka i oparcia są częściami wymiennymi. Zmniejszają intensywność rąk do masażu. Ich stosowanie jest zalecane, nie jest obowiązkowe. Zgodnie z potrzebami użytkownika. Użyj zamka błyskawicznego (1), aby założyć tylne klocki. Użyj rzepy (2), aby przymocować poduszkę

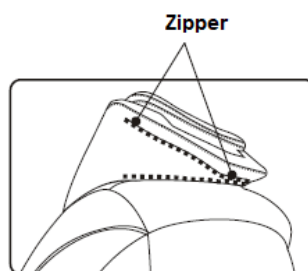


(1)

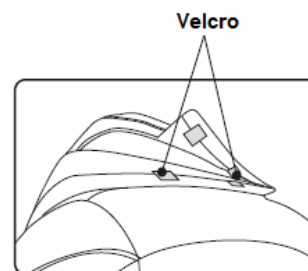

(2)

7. Ochrona podłogi


Umieść dywanik lub matę ochronną pod fotelem. Szczególnie polecany, jeśli jest umieszczony na drewnianej powierzchni.

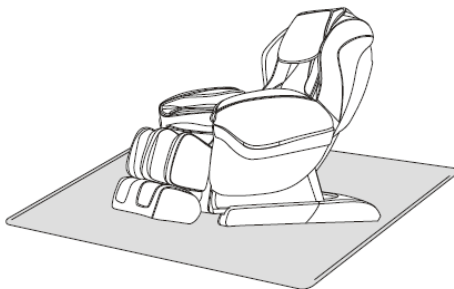

OSTRZEŻENIE: Nie należy przesuwać fotela z kołami na drewnianej podłodze, nierównej powierzchni lub w ciasnej przestrzeni. Do podnoszenia zaleca się co najmniej dwie osoby. Złap podstawę i oparcie (nie podpórki boczne).

8. Przenoszenie

Uważaj aby nie zniszczyć kabli i przewodów. Pochyl urządzenie w tył na koła transportowe i przenieść go bezpiecznie w wymagane miejsce.

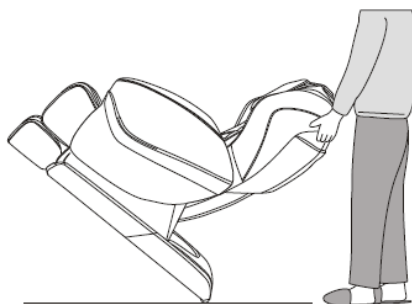

Uwaga: Przed przesunięciem należy go wyłączyć, odłączyć przewód zasilający i przewód sterujący.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model: A90

Nazwa: Fotel do masażu

Napięcie znamionowe:

- 110-120V-60Hz
- 220-240V-50Hz/60Hz

Znamionowa moc wejściowa: 150 W

Maksymalna długość masażu: 20 minut

Struktura bezpieczeństwa: klasa I

Materiał: PCV, PA, stal, części elektroniczne

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756