



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 18010 Masażer do stóp inSPORTline Otterchill



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
UŻYCIE.....	4
WYMIANA BATERII	4
ALTERNATYWNE UŻYCIE.....	5
REGULAMIN GWARANCJI, ROSZCZENIA GWARANYCJNE	6

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

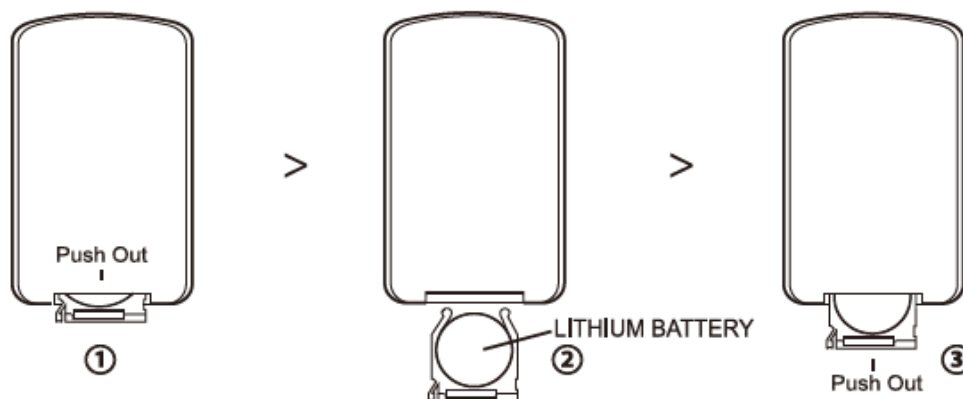
- Przeczytaj uważnie instrukcję.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu.
- Jeśli urządzenie wejdzie w kontakt z wodą, nie należy go dotykać i należy natychmiast odłączyć.
- Nie używaj podczas prysznica lub kąpieli.
- Nie przechowuj w wilgotnych miejscach, w wodzie lub w jej pobliżu.
- Nie upuszczaj do płynów.
- Nie pozostawiaj bez nadzoru po podłączeniu. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu.
- Nie należy używać pod kocem ani poduszką. Nadmierne ogrzewanie może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
- Nadzór jest konieczny w przypadku korzystania z produktu w pobliżu dzieci lub osób o ograniczonej sprawności umysłowej lub fizycznej.
- Używaj tylko do celów zgodnych z przeznaczeniem. Nie modyfikuj produktu.
- Nigdy nie próbuj używać produktu, gdy przewód zasilający jest uszkodzony lub mokry. Jeśli produkt jest uszkodzony, poproś dostawcę lub eksperta o naprawę.
- Nie ciągnij za przewód zasilający.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł ciepła.
- Zawsze utrzymuj wentylację.
- Nigdy nie upuszczaj żadnych przedmiotów do wentylacji.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Wyłącz wszystkie funkcje, a następnie odłącz od gniazda.
- Nie używaj funkcji ogrzewania, gdy jest ona wrażliwa na ciepło. Trzymaj z daleka od dzieci i osób o ograniczonej sprawności umysłowej lub fizycznej.
- Używaj masażu tylko podczas siedzenia.
- Nie uruchamiaj masażu przez ponad godzinę. Zaleca się używanie masażu w odstępach co 20 minut.
- Osoby cierpiące na: przewlekłą lub ciężką chorobę skóry, problemy z sercem, uraz fizyczny, gorączkę, udar, kobiety w ciąży i osoby chore psychicznie nie powinny używać tego produktu.
- Nie należy używać pod wpływem narkotyków i alkoholu.
- Nie używać w ciągu godziny przed i po posiłku.
- Do czyszczenia produktu używaj wilgotnej szmatki. NIE używaj alkoholu ani wody do czyszczenia produktu.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu we własnym zakresie.
- Nie stawaj ani nie siadaj na masażystce.
- Aby wyeliminować podrażnienia skóry, należy nosić skarpetki podczas masażu.
- Nie upuszczaj masażera.
- Nie wkładaj ciała obcych do otworu wentylacyjnego.

UŻYCIE

- Podłącz do gniazdka.
- Wyświetlacz pokaże OF, co oznacza, że masażer jest gotowy i znajduje się w trybie gotowości. Rozpocznij masaż, naciskając przycisk ON / OFF. Wyświetlacz pokaże OO. Masażer automatycznie wykona 1 poziom wibracji.
- Dostosuj prędkość, naciskając przycisk + i -. Jest 15 poziomów wibracji. Wyświetlacz przejdzie do kalorii po wybraniu prędkości.
- Aby włączyć funkcję grzania - naciśnij przycisk FIR na urządzeniu i Infrared na pilocie. Funkcję ogrzewania można włączyć niezależnie.
- Timer można ustawić na 10, 20, 30 minut. Masaż zatrzyma się automatycznie po wybranym czasie.
- W przypadku automatycznego ustawiania wstępnego masażu naciśnij przycisk SELECT. Naciśnij + i -, aby powrócić do trybu ręcznego.
- 4 wstępnie ustawione tryby: Tryb witalności
 Tryb relaksowania
 Tryb refleksologii
 Tryb wyszczuplania
- Podczas korzystania z ustawionego wcześniej masażu można wybrać czas.
- Liczba kalorii zostanie wyświetlona po kilku sekundach.
- Masaż rozpocznie się z niskiego poziomu, po którym możesz dostosować poziom do swoich wymagań. Nie używaj przez ponad 30 minut.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka po użyciu.



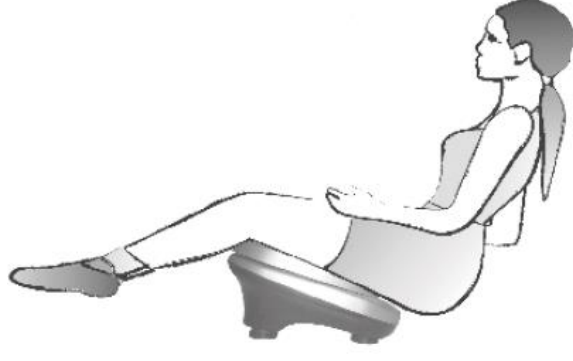
WYMIANA BATERII

- Bateria znajduje się z tyłu kontrolera bezprzewodowego.
- Naciśnij mały klips i wyciągnij komorę baterii szuflady.
- Używaj baterii "LITHIUM" CR2025.



ALTERNATYWNE UŻYCIE

Masażer może być używany na innych częściach ciała. Wibracje pomagają rozluźnić mięśnie i zmniejszyć sztywność podczas stosowania na łydkach, udach, plecach lub talii. Może być stosowany regularnie na obszarach brzucha i ud.

	<p>Umieść stopy na środku poduszki dociskowej.</p>
	<p>Oprzyj górną część pleców i bark na poduszce dociskowej, aby zmniejszyć ból szyi, ramion lub ramion.</p>
	<p>Usiądź wygodnie i umieść środek paska dociskowego masażera pod twoimi udami. (Noś długie spodnie).</p>

REGULAMIN GWARANCJI, ROSZCZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756