



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 19992 Kołnierz masujący inSPORTline S002



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
UŻYWANIE.....	4
OPIS PRODUKTU	5
PRZYCISKI.....	6
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	6
PARAMETRY TECHNICZNE	6
OCHRONA ŚRODOWISKA	7
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	7

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie nadaje się dla dzieci i kobiet w ciąży.
- Nie używać podczas jazdy.
- Nie stosować w przypadku następujących problemów zdrowotnych: wrażliwość na ciepło, problemy z krążeniem, żylaki, zasinienie, podrażnienie skóry, zapalenie mięśni lub tkanek, zapalenie żył lub otwarte rany
- Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, natychmiast wyłącz urządzenie i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie używaj produktu, jeśli używasz rozrusznika serca lub innych podobnych implantów medycznych.
- Nie używać, jeśli na skórę zastosowano krem lub olej.
- Wyłącz produkt i odłącz go, jeśli nie jest używany.
- Nie śpij podczas użytkowania.
- Nie transportuj produktu ani nie ciągnij za przewód zasilający.
- Wyczyść produkt, jeśli nie jest podłączony. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej szmatki. Następnie natychmiast osusz produkt. Nie podłączaj, dopóki urządzenie nie będzie suche.
- Nie przykrywaj żadnych koców ani nie kładź się na poduszce. Nagromadzone ciepło może uszkodzić produkt lub zranić użytkownika.
- Nie używać w miejscach o dużej wilgotności lub w pobliżu wody. Nie używaj produktu, jeśli nie jest całkowicie suchy.
- Nie wystawiaj na działanie płynów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru, gdy jest włączony.
- Nie ciągnij ani nie zostawiaj przewodu zasilającego w miejscach, w których istnieje ryzyko potknięcia się.
- Nie pozostawiaj w pobliżu źródła ciepła.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Regularnie sprawdzaj produkt i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Jeśli wymaga naprawy, skontaktuj się ze sprzedawcą, autoryzowanym serwisem lub specjalistą.
- Do naprawy używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, natychmiast go zatrzymaj.
- Nigdy nie używaj produktu, jeśli masz mokre ręce.
- Nigdy nie otwieraj ani nie naprawiaj produktu w domu.
- Nie używać przed snem, masaż może zakłócać sen.
- Wszystkie materiały opakowaniowe przechowuj poza zasięgiem dzieci.

UŻYWANIE

Dostosuj intensywność masażu do swoich potrzeb.




Neck&Shoulder

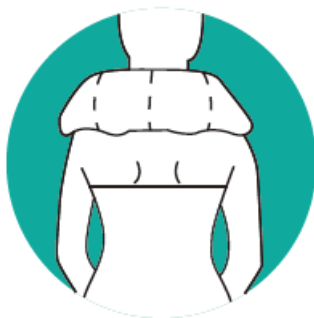


Neck



Back

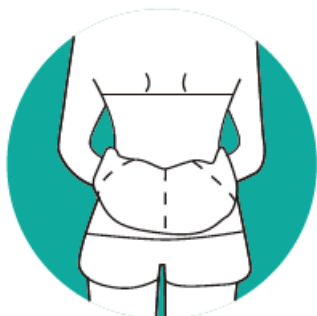

Waist

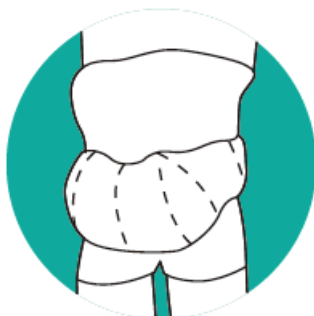

Abdomen



Thighs



Legs





Foot



Calf

OPIS PRODUKTU

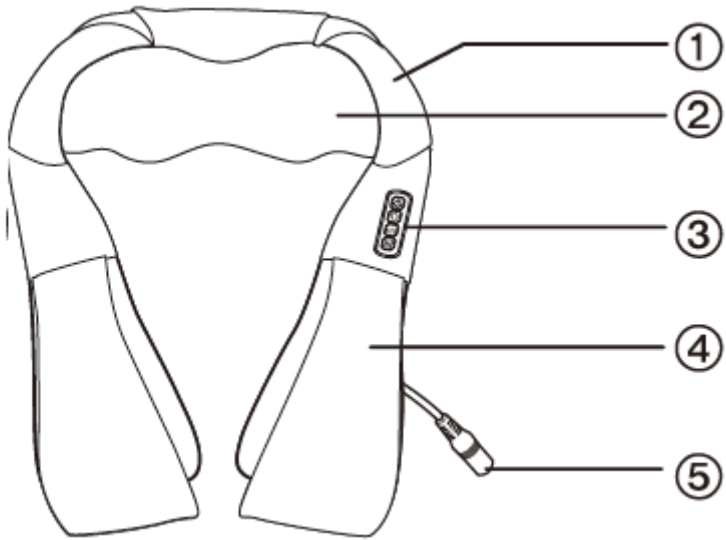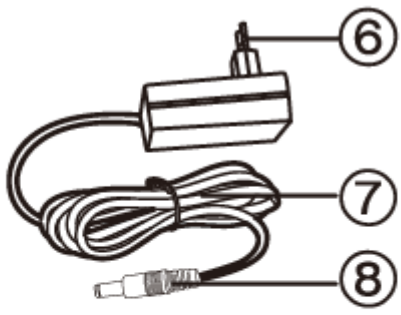A 	A – Część główna
	1 – Skórzana osłona
	2 – Głowica masująca
	3 – Przełącznik
	4 – Uchwyt
	5 – Złącze DC
B 	B – Zasilacz
	6 – Wtyczka
	7 – Linka
	8 – Wtyczka urządzenia
C 	C – Zasilacz samochodowy

PRZYCISKI

	Włącz / wyłącz Włącz / wyłącz urządzenie. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach.
	Prędkość Dostosuj prędkość masażu
	Kierunek Dostosuj kierunek masażu
	Ogrzewanie Włącz / wyłącz

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie można rozpocząć masażu	Upewnij się, że wtyczka jest w gniazdku. Sprawdź, czy przełącznik jest włączony.
Nagle przestaje działać podczas użytkowania	Masaż wyłączy się automatycznie po 15 minutach. Upewnij się, że wtyczka jest w gniazdku. Sprawdź wtyczkę i przewód zasilający. Jeśli są uszkodzone, natychmiast przestań ich używać. Produkt ma ochronę przed przegrzaniem. Wyłącz go na co najmniej godzinę. Jeśli problemy się utrzymują, skontaktuj się z lokalnym dealerem.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie: Dc 12 V

Moc: 24 W

Częstotliwość: 50 Hz

Funkcje lub projekt produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu trwałości produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami i przyjaznymi dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756