




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 21961 Pistolet do masażu inSPORTline Rondys

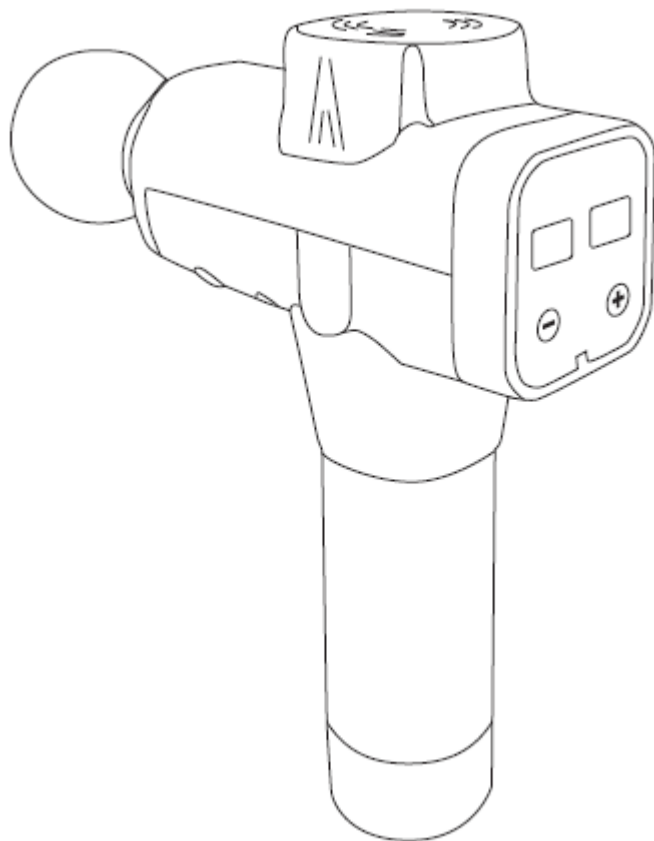


SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS PRODUKTU	4
UŻYTKOWANIE	4
ŁADOWANIE	4
KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE	4
OCHRONA ŚRODOWISKA	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	5

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie zanurzaj w wodzie. Trzymaj z dala od źródeł wody i ciepła.
- Otwory wentylacyjne muszą być zawsze czyste.
- Urządzenie nie może pracować w trybie ciągłym dłużej niż 1 godzinę. Zaleca się, aby urządzenie ostygło po 30 minutach pracy.
- Odłącz ładowarkę po naładowaniu.
- Tylko dla dorosłych.
- Nie stosować na zranioną lub wrażliwą skórę.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Używaj tylko na suchej skórze i na lekkiej odzieży.
- Używaj tylko przez 60 sekund na każdej części ciała.
- Używaj tylko na miękkich częściach ciała, nie używaj na kościach ani twardych częściach ciała.
- Masaż musi być bezbolesny i wygodny.
- Użyj głowicy masującej, która najlepiej służy temu celowi.
- Podczas użytkowania mogą pojawić się siniaki, często sprawdzaj masowany obszar.
- Natychmiast przerwij masaż, jeśli poczujesz ból.
- Trzymaj palce, włosy i inne części ciała z dala od tylnej części urządzenia.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.
- Unikaj wstrząsania i uderzania pistoletem.
- Sprawdź stan produktu przed i po użyciu.
- Nie modyfikuj produktu.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia w ładowarce lub podczas pracy bez nadzoru.
- Nie nadaje się dla osób wrażliwych na wibracje.
- Trzymaj części ciała z dala od ruchomych części, istnieje ryzyko zakleszczenia.
- Używaj tylko oryginalnej ładowarki.
- Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach użytkowania.
- Nie nadaje się dla osób o ograniczonych zdolnościach motorycznych, chorobach psychicznych lub fizycznych, braku doświadczenia i wiedzy. Osoby te mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie nadaje się dla: kobiet w ciąży, osób cierpiących na cukrzycę, neuropatię, uszkodzenie siatkówki, epilepsję, migreny, przepuklinowe dyski, spondylolistezę, spondylolizę; osób, które miały ostatnio operację, wymianę stawów, metalowe szpilki lub płytki (w ciele). Używaj tego urządzenia tylko po konsultacji z lekarzem.

OPIS PRODUKTU

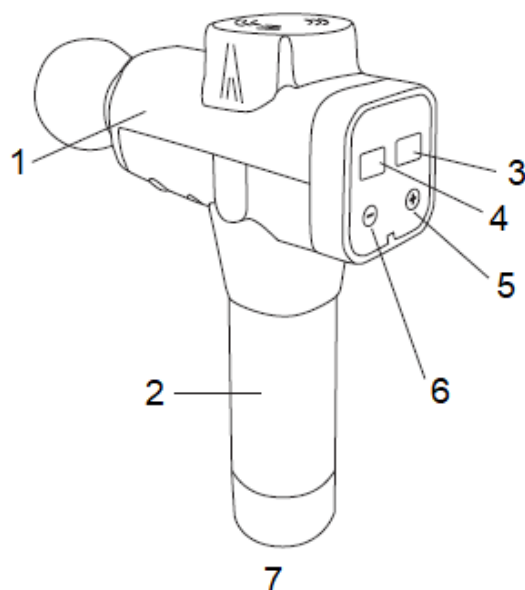

1.	Korpus główny
2.	Bateria i uchwyt
3.	Wyświetlanie zasilania
4.	Wyświetlanie prędkości
5.	Prędkość +
6.	Prędkość -
7.	Przycisk włączania / wyłączania

UŻYTKOWANIE

Bezpiecznie podłącz baterię do podstawy. Włącz urządzenie, włączając przełącznik zasilania na spodzie baterii. Wyłącz urządzenie, wyłączając przełącznik zasilania. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przyciski prędkości +/-, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość. Naciśnij jeden z przycisków przez 3 sekundy, aby zatrzymać urządzenie. Wyłącz przełącznik baterii w pozycji wyłączonej, ekran wyłączy się. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach ciągłego użytkowania.

ŁADOWANIE

Pierwsze ładowanie baterii do pełna może potrwać do 6 godzin. Aby naładować, podłącz ładowarkę do portu ładowania i podłącz ładowarkę do gniazdka.

Wyświetlacz baterii pokazuje stan baterii, jeśli wartość wynosi 20, naładuj baterię. Nie zaleca się całkowitego rozładowania akumulatora.

Czas działania urządzenia zależy od intensywności i prędkości masażu.

KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Do czyszczenia urządzenia użyj wilgotnej szmatki, a następnie osusz urządzenie.

Podczas przechowywania lub transportu, wyjmij baterię i schowaj urządzenie w pudełku.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756