



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 22843 Masażer oczu inSPORTline Salook






SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS PRODUKTU	4
UŻYTKOWANIE	5
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	5
PARAMETRY	5
OCHRONA ŚRODOWISKA	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	6

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Używaj tego produktu zgodnie z instrukcją.
- Sprawdź produkt przed użyciem.
- Nie zbliżaj się do wody, aby uniknąć obrażeń spowodowanych porażeniem prądem.
- Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Nie używaj mokrymi rękami.
- Nie uszkadzaj kabla ani nie zmieniaj obwodu elektrycznego.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
- Nie modyfikuj tego produktu.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie stosować w ciągu godziny po posiłku.
- Jeśli poczujesz nudności lub zawroty głowy, przestań używać tego produktu i poproś lekarza o poradę.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub sensorycznych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy oraz dzieci nie powinny używać tego produktu bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie używaj w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka.
- Nie używaj przy nagłych zmianach temperatury.
- Stosować tylko w dobrze wentylowanych i bezpyłowych pomieszczeniach.
- Podczas używania tego produktu nie należy używać alkoholu ani innych narkotyków.
- Kobiety w ciąży, osoby używające elektrycznych urządzeń medycznych lub cierpiące na choroby skóry nie powinny używać tego produktu.
- Nie używaj produktu, gdy jest mokry.
- Osoby wrażliwe na ciepło muszą używać tego produktu z ostrożnością.
- To nie jest zabawka, trzymaj ją z dala od dzieci i zwierząt, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby chore psychicznie nie powinny używać tego produktu.
- Urządzenie nie działa podczas ładowania.
- Czas ładowania to około 3 godziny.
- Jeśli wystąpi ból lub inna negatywna reakcja organizmu, należy natychmiast przerwać używanie urządzenia.

OPIS PRODUKTU

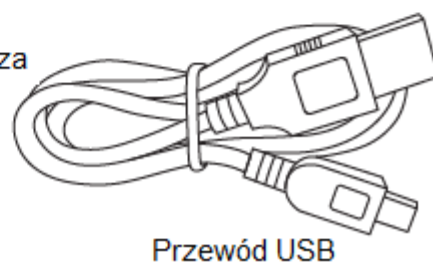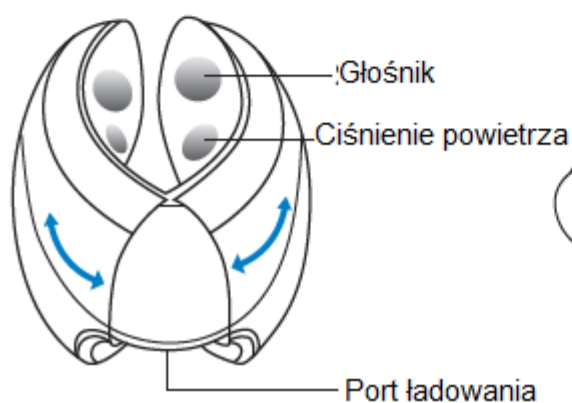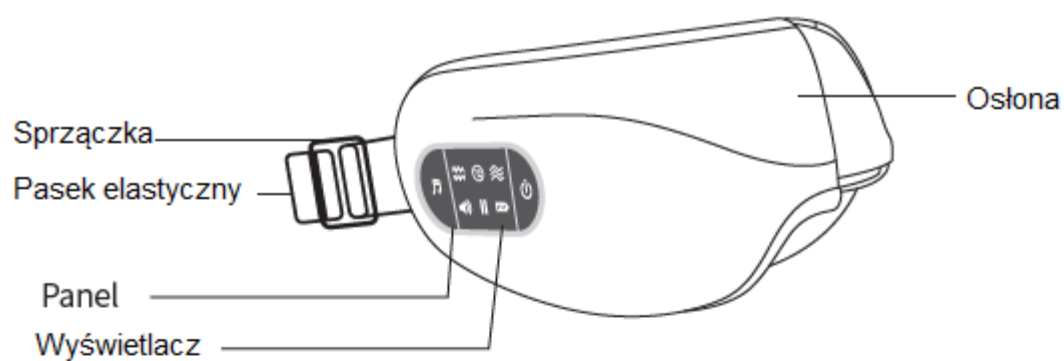

UŻYTKOWANIE

- Dopasuj elastyczny pasek tak, aby okulary dobrze przylegały do oczu i nie były zbyt ciasne.
- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, urządzenie uruchomi się, a domyślny program uruchomi się automatycznie na 15 minut.
- Każde naciśnięcie przycisku zasilania powoduje zmianę trybu. Dostępne są trzy tryby masażu powietrznego, tryb ogrzewania i wibracja.
- Przytrzymaj przycisk muzyki przez 2 sekundy, aby sterować, wstrzymywać lub włączać muzykę.
- Jeśli masaż jest słaby lub nie można uruchomić urządzenia, naładuj urządzenie.
- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć.
- Muzykę można dodawać lub usuwać, podłączając urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- Nie ruszaj się podczas używania, nie kładź się lub nie siadaj.
- Jeśli urządzenie jest wilgotne, wysusz je.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna powstania	Rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia	Bateria jest rozładowana	Naładuj urządzenie
	Automatycznie wyłączony	Włącz urządzenie
Nie można naładować	USB nie jest podłączone	Podłącz kabel USB
Masaż powietrzny jest słaby	Niski poziom baterii	Naładuj urządzenie
Wskaźniki są przyciemnione lub migają		

PARAMETRY

Napięcie	5 V
Moc	5 W
Wejście	USB, 5V, 1A

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o dodatkowe informacje, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756