



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 22994 Pistolet do masażu inSPORTline Shormi



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	3
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
GŁOWICE MASUJĄCE	4
UŻYTKOWANIE	4
ŁADOWANIE	5
PARAMETRY TECHNICZNE	5
OCHRONA ŚRODOWISKA	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Produkt nie jest zabawką.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Produkt nie jest wodoodporny, nie zanurzaj go w wodzie.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokich temperatur ani nie wrzucaj do ognia.
- Nie używaj w pobliżu głowy, serca i genitaliów.
- Stosować tylko na tkankach miękkich, takich jak mięśnie, nie stosować na kości.
- Chronić przed upadkami i uderzeniami.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj produktu.
- Używaj tylko oryginalnej ładowarki i kabla lub o takich samych parametrach.
- Wyłącz urządzenie po użyciu.
- Ładuj urządzenie w temperaturze od 10 ° C do 40 ° C.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli temperatura otoczenia przekracza 70 ° C.
- Nie używaj szybkich ładowarek.
- Produkt nie jest przeznaczony do celów medycznych ani leczniczych. Jeśli podczas stosowania wystąpią nudności lub ból, należy natychmiast przerwać operację i skontaktować się z lekarzem.
- Trzymaj palce, włosy i inne części ciała z dala od osi i ruchomych części.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo, natychmiast przerwij jego pracę.
- Wejście urządzenia to 5V 2A.
- Tylko do użytku domowego.
- **OSTRZEŻENIE:** Produkt nie jest przeznaczony do celów medycznych ani opieki zdrowotnej.
- **UWAGA:** Produkt nie jest przeznaczony dla: kobiet w ciąży, diabetyków, neuropatów, osób z uszkodzoną siatkówką, osób z rozrusznikiem serca, po przeszczepie stawu, po operacji, dla osób cierpiących na migrenę, epilepsję itp.
- **OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1x Masażer


6x Głowice masujące

1x Przewód USB-C do ładowania

1x Instrukcja

ŁADOWARKA NIE JEST DOŁĄCZONA DO ZESTAWU

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

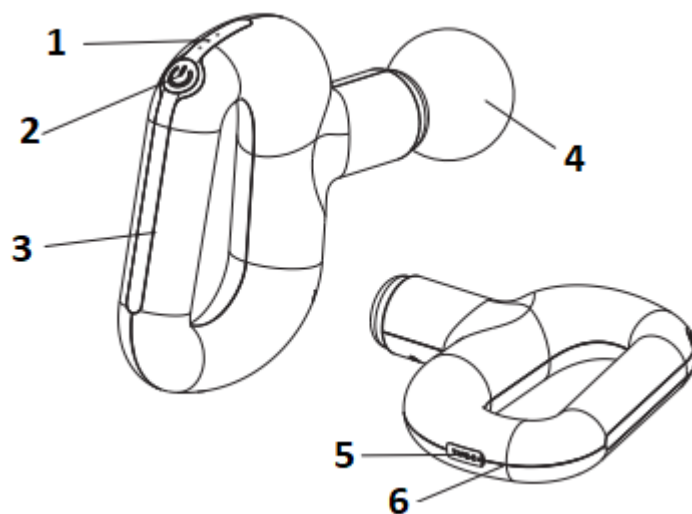

1. Wskaźniki prędkości LED
2. Przycisk zasilania / trybu
3. Uchwyt
4. Głowica masująca
5. Port ładowania USB-C
6. Wskaźnik ledowy

GŁOWICE MASUJĄCE



Mała dla
wszystkich
mięśni



Mała okrągła
do stawów



Głowica "U"
do kręgów
szyjnych



Okrągła dla
dużych mięśni





Krzyżak do
wszystkich
mięśni



Zakrzywiona
dla ud i
nadgarstków

UŻYTKOWANIE

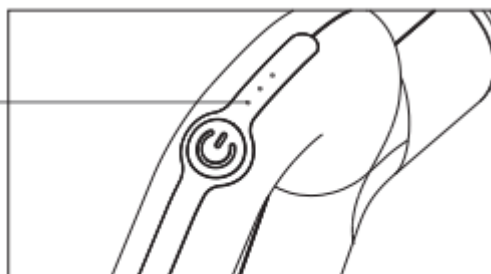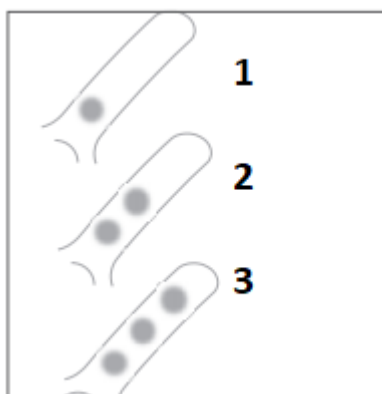

1 – niska prędkość
(2100)

2 – średnia prędkość
(2700)

3 – duża prędkość
(3100)

Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, urządzenie się włączy, wskaźnik prędkości zaświeci się, domyślnym trybem jest niska prędkość.

Urządzenie posiada 3 tryby prędkości, kolejność: wolny - średni - szybki - wyłączony

Aby zmienić tryb prędkości, naciśnij przycisk, jeśli naciśniesz przycisk na największej prędkości, urządzenie przełączy się z powrotem w najwolniejszy tryb.

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

UWAGA: Urządzenie posiada wbudowaną blokadę, jeśli głowica utknie, silnik się wyłączy. Aby uruchomić ponownie, musisz przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy.

ŁADOWANIE

OSTRZEŻENIE: Używaj tylko oryginalnego adaptera / ładowarki z wejściem 5 V lub o takich samych specyfikacjach jak oryginał. Nie używaj szybkich ładowarek.

Użyj przewodu USB-C do ładowania.


Podłącz kabel do urządzenia, a następnie do ładowarki lub komputera.

Podczas ładowania wskaźnik LED będzie się świecił.



Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono.

Wskaźnik świeci na biało, gdy bateria jest naładowana

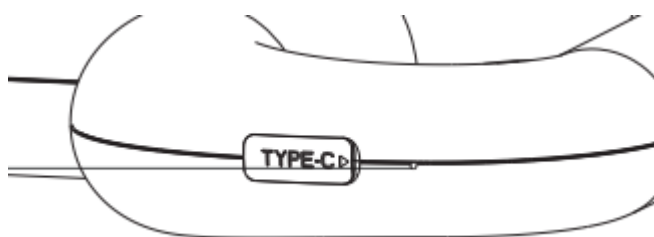

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa	12W $\pm$ 10%
Tryby prędkości	3 poziomy
Prędkość	2000 – 3100 RPM
Bateria	4800 mAh
Wejście	5V 2A, USB-C
Żywotność baterii na jednym ładowaniu	12 godzin
Czas ładowania	3,5 godziny



OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756