




## INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 23093 Wibrujący masażer bańkowy inSPORTline Vaccup**

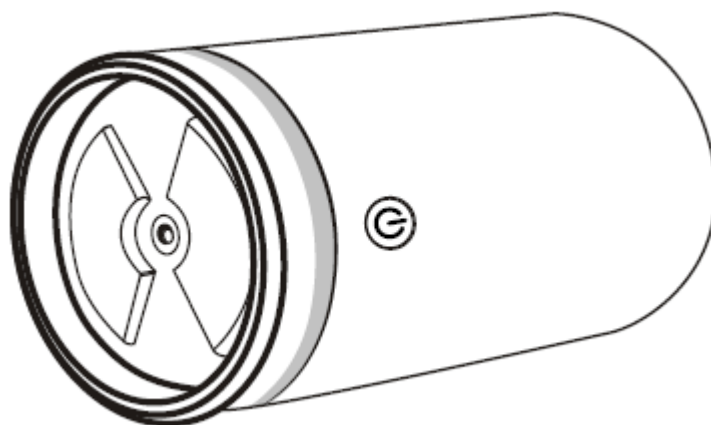


## SPIS TREŚCI

|  |   |
|--|---|
| INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....                 | 3                                       |
| OPIS PRODUKTU.....                             | 4                                       |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....                      | 4                                       |
| UŻYTKOWANIE .....                              | 5                                       |
| ŁADOWANIE.....                                 | 5                                       |
| KONSERWACJA.....                               | 5                                       |
| PRZECHOWYWANIE .....                           | 5                                       |
| ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....                   | 5                                       |
| PARAMETRY TECHNICZNE .....                     | 6                                       |
| OCHRONA ŚRODOWISKA .....                       | 6                                       |
| WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE..... | <b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b> |

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Aby uzyskać lepsze wrażenia, przed użyciem wytrzyj masowany obszar wilgotnym ręcznikiem.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, nie jest wodoodporne.
- Urządzenie wyłącza się automatycznie po 15 minutach użytkowania.
- Jeśli poczujesz się źle, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze lub dużej wilgotności.
- Nie używaj długoterminowo w jednym miejscu.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz jakiegokolwiek choroby skóry lub obrażenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli używasz medycznego sprzętu elektrycznego, takiego jak rozrusznik serca itp.
- Urządzenie nie zastępuje opieki medycznej lub terapeutycznej.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do celów komercyjnych ani medycznych.
- Produkt nie jest odpowiedni dla osób poniżej 16 roku życia.
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie nie jest przeznaczone dla użytkowników cierpiących na: wrażliwą skórę, wysokie lub niskie ciśnienie krwi, choroby naczyniowo-mózgowe, guzy, zaburzenia krzepnięcia, stany zapalne lub inne choroby. Przed użyciem zawsze skonsultuj się z lekarzem.

## OPIS PRODUKTU

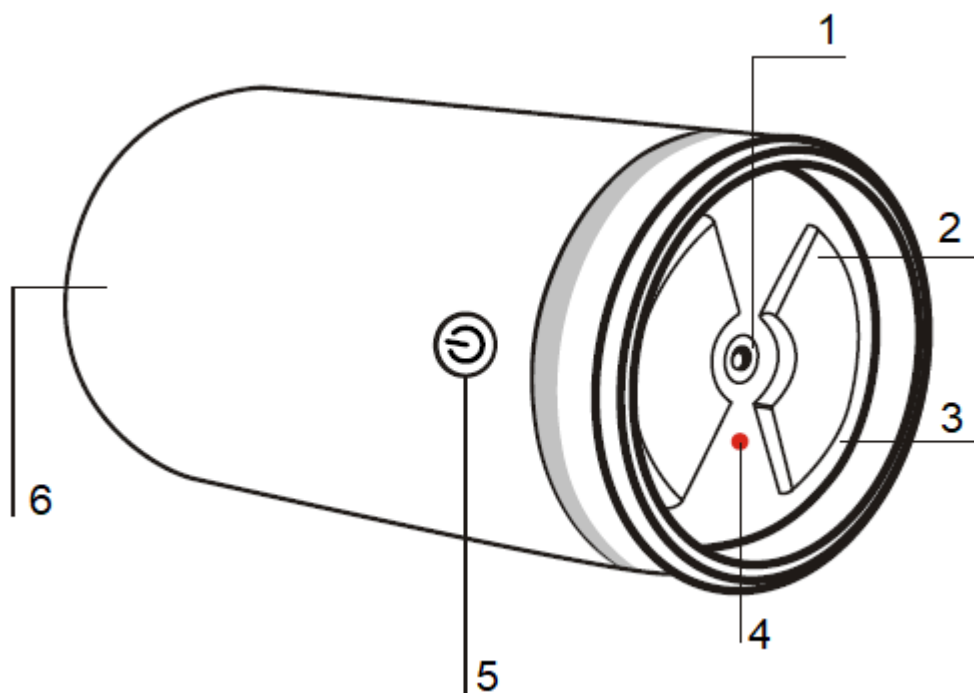

1. Port do ładowania
2. Stal nierdzewna
3. Materiał ABS
4. Wskaźnik ładowania
5. Przycisk
6. Silikonowa osłona


## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Masażer



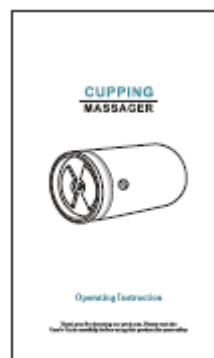


Przewód USB do ładowania



Instrukcja użytkownika

## UŻYTKOWANIE

1. Przed użyciem należy zwilżyć masowany obszar.
2. Masowany obszar powinien być płaski i muskularny, aby uzyskać maksymalny efekt (nie kości itp.)
3. Naciśnij i umieść na skórze, urządzenie będzie ssać skórę.
4. Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie, domyślnym trybem jest wibracja + EMS zostanie uruchomiony.
5. Naciśnij przycisk  aby ustawić intensywność.
6. Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
7. Naciśnij urządzenie, aby zdjąć je ze skóry.
8. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach użytkowania.

## ŁADOWANIE

- Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, lampka wskaźnika miga na czerwono.
- Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono i miga, po naładowaniu świeci na niebiesko.
- Czas ładowania: 2 - 3 godziny.
- Urządzenie jest zasilane baterią litową.

## KONSERWACJA

- Czyścić tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Czyść urządzenie suchą szmatką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.

## PRZECHOWYWANIE

- Jeśli planujesz przechowywać urządzenie dłużej niż 3 miesiące, regularnie ładuj baterię.
- Przechowywać w dobrze wentylowanym i zacienionym pomieszczeniu.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem                      | Przyczyna i możliwe rozwiązanie  |
|------------------------------|--|
| Urządzenie się nie uruchamia | 1. Upewnij się, że urządzenie jest naładowane<br>2. Spróbuj włączyć.                             |
| Słabe wibracje               | 1. Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco naładowane.<br>2. Zwiększ intensywność wibracji |

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Model          | HZ-MSG-1        |
| Wymiary        | 45 x 45 x 93 mm |
| Wejście        | 5 V 1A          |
| Moc znamionowa | 1 W             |
| Waga           | 80 g            |

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale oddaj je do punktu recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756