



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23200 Urządzenie do masażu inSPORTline Lilona



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	3
OPIS PRODUKTU.....	3
UŻYTKOWANIE	4
KONSERWACJA.....	4
PARAMETRY TECHNICZNE	4
OCHRONA ŚRODOWISKA	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Przed pierwszym użyciem przetestuj urządzenie na przedramieniu, a następnie na twarzy.
- Po wypróbowaniu urządzenia pozwól skórze odpocząć przez godzinę. Jeśli nie wystąpi reakcja alergiczna lub podrażnienie, możesz bezpiecznie korzystać z urządzenia.
- Urządzenie nie jest odpowiednie dla: osób z alergiami, w tym. alergii na metale, uszkodzona lub bliznowata skóra, kobiet w ciąży, osób cierpiących na choroby dermatologiczne, osób wrażliwych na ciepło itp.
- Produkt nie jest zabawką, należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wysokich temperatur.
- Nie używaj ani nie przechowuj produktu w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani bezpośredni kontakt z wodą.
- Nie czyść produktu wodą.
- Nałóż krem na skórę przed użyciem.
- Połącz urządzenie ze zwykłą pielęgnacją skóry.
- Stosować na twarz przez 5 - 10 minut, na szyję maksymalnie 3 minuty.
- Zalecamy używanie urządzenia 3 - 4 razy w tygodniu, maksymalnie 15 min.
- Urządzenie wyłącza się automatycznie po 5 minutach, jeśli chcesz dalej korzystać z urządzenia, naciśnij przycisk zasilania w ciągu 1 minuty od automatycznego wyłączenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie nie zastępuje opieki medycznej lub terapeutycznej.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Masażer	1x
Przewód USB	1x
Instrukcja obsługi	1x


OPIS PRODUKTU

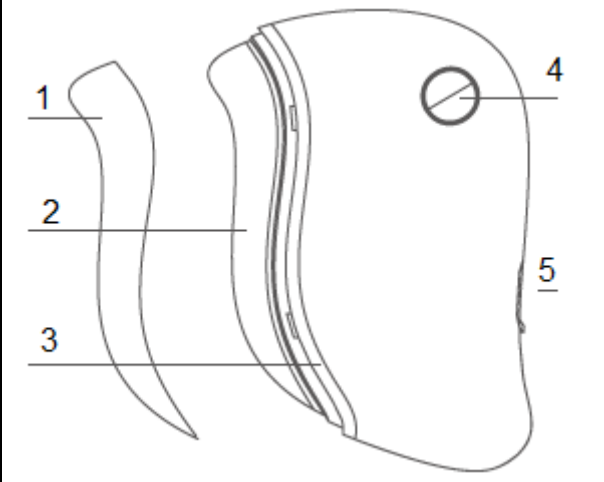	1.	Pokrywa
	2.	Płyta do masażu
	3.	LED
	4.	Przełącznik zasilania / zmiany trybu
	5.	Port ładowania USB

UŻYTKOWANIE

Urządzenie posiada 4 tryby: wibracja + LED, grzanie + LED, grzanie + wibracja, grzanie + wibracja + LED.

- Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć. Aby wyłączyć, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy w dowolnym trybie.
- Aby zmienić tryb, naciśnij przycisk zmiany trybu.
- Urządzenie wyłącza się automatycznie po 5 minutach pracy.
- Urządzenie wykonuje trzy ruchy: naciskający, spiralny i ślizgowy.
- Nacisk: delikatnie naciska na skórę
- Spirala: delikatne i rytmiczne ruchy spiralne
- Ruch ślizgowy: ruch w górę i w dół.

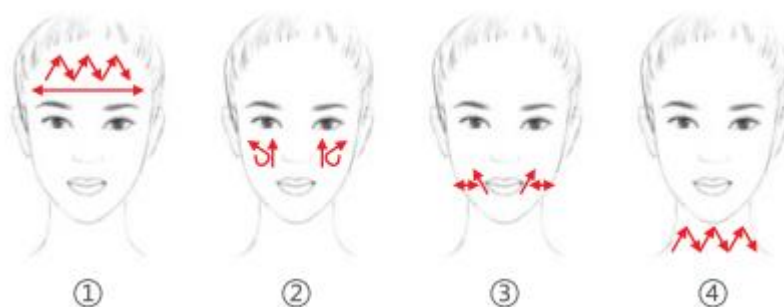

Odpowiednie dla obszarów:

- Czoło: Poruszaj powoli w górę i w dół / w prawo i w lewo.
- Twarz: Powoli przesuwaj po policzkach od góry do dołu / od wewnątrz na zewnątrz.
- Kąciki ust: Powoli przesuwaj od góry do dołu wokół kącika ust.
- Szyja: Powoli przesuwaj urządzenie od góry do dołu lub od dołu do góry.

KONSERWACJA

- Wyczyść płytę do masażu miękką szmatką.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Nie zanurzaj w wodzie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa	Grzejący masażer upiększający		
Napięcie wejściowe	DC 5 V	Zasilacz	2,6 W
Czas ładowania	90 min	Prąd	330 mA
Pojemność baterii	500 mAh	Temperatura	42-46 °C
Praca na jednym ładowaniu	50 min	Waga	60 g
Częstotliwość wibracji	8000 rpm		
Wymiary produktu	101 x 73,5 x 19 mm		

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, zwróć się do lokalnych władz, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756