



## INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23202 Maska LED na twarz i szyję inSPORTline Hilmana



## **SPIS TREŚCI**

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	3
PARAMETRY .....	3
KORZYŚCI Z UŻYTKOWANIA.....	3
UŻYTKOWANIE .....	4
EFEKTY ŚWIATŁA LED.....	5
OCHRONA ŚRODOWISKA .....	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	7

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie używaj dłużej niż 20 minut dziennie.
- Nie używaj przez dłuższy czas.
- Produkt nie jest zabawką, przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu światła z oczami. Nie patrz bezpośrednio w światła maski. Podczas użytkowania zamknij oczy, jeśli światło jest nadal zbyt intensywne, zasłoń je bawełnianą szmatką.
- Aby uzyskać lepszy efekt, stosuj podczas rutynowej pielęgnacji skóry.
- Urządzenie zawiera obwody elektryczne i diody LED. Nie naciskaj ani nie składaj produktu.
- Nie używaj podczas snu.
- Nie zanurzaj w wodzie.
- Do czyszczenia nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Produkt nie jest przeznaczony dla: kobiet w ciąży, osób z padaczką, alergiami na światło i ciepło, osób z wrażliwą skórą, chorobami dermatologicznymi, osobami z urazami lub bliznami itp.
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie nie zastępuje opieki medycznej lub terapeutycznej.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Maska LED	1x
Przedłużenie szyi	1x
Instrukcja obsługi	1x
Pilot	1x
Kabel do ładowania	1x
Elektrody	7x

## PARAMETRY

Moc wyjściowa	DC10V 2500mA	Pilot	Sterowanie cyfrowe
Źródło światła	Diody LED	Napięcie wejściowe	AC 100 - 240 V
Liczba światła LED	138 maska + 54 szyja	Ustawienie czasu	5 - 60 minut

## KORZYŚCI Z UŻYTKOWANIA

Korzyści wynikające z regularnego stosowania:






- poprawa jakości i elastyczności skóry
- usuwanie trądziku i niedoskonałości skóry (np. plamy pigmentacyjne)
- redukcja zmarszczek
- regeneracja komórek i przyspieszenie metabolizmu tkankowego
- wspomaganie krążenia krwi


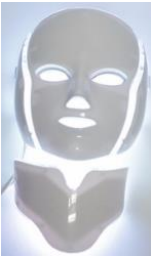
- ukrwienie twarzy.

## UŻYTKOWANIE

- Oczyszczyć i delikatnie osuszyć twarz i szyję. Nie pocierać twarzy, aby uniknąć podrażnienia skóry.
- Możesz nałożyć kosmetyk na twarz i szyję, aby poprawić jakość skóry (promieniowanie LED może lepiej wchłoniąć produkty w skórę).
- Przetestuj działanie kontrolera przed nałożeniem maski.
- Jeśli chcesz używać maski z elektrodami, umieść je po wewnętrznej stronie maski (możesz używać maski bez elektrod).
- Załóż maskę na twarz i podłącz ją do kontrolera za pomocą kabla.
- Podczas używania nie czytaj książek ani nie oglądaj telewizji lub komputera. Miej oczy zamknięte. Zalecamy siedzenie lub leżenie.
- Naciśnij przycisk „color select”, aby wybrać kolor: czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, żółty, jasnoniebieski lub biały.
- Użyj dwóch strzałek (Time), aby ustawić czas (zalecamy 10 - 20 minut). Zaczynij od KRÓTKIEGO czasu używania maski.
- Użyj przycisku Brightness, aby dostosować intensywność światła. Od początku stosowania ustaw intensywność na NAJNIŻSZĄ i stopniowo zwiększaj intensywność po 3 użyciach.
- Przycisk Microelectronics służy do ustawiania intensywności mikroprądu, który będzie dostarczany do skóry przez delikatne impulsy. Zaczynij ponownie od najniższego ustawienia, które możesz stopniowo zwiększać.
- Użyj przycisku Migotanie, aby rozpocząć migotanie maski, które jest używane do uzyskania wyższego i bardziej intensywnego efektu światła. Nie zaleca się jednak długotrwałego korzystania z tej funkcji. Maksymalnie raz w tygodniu przez jeden miesiąc.
- Maseczkę można stosować razem z produktami do pielęgnacji skóry. W przypadku stosowania maski razem z produktami kosmetycznymi zalecamy użycie czerwonej diody LED, a następnie wyczyszczenie maski wilgotną miękką ściereczką i osuszenie.
- Zalecamy stosowanie maski przez maksymalnie 20 minut dziennie. Możesz wypróbować kilka zabiegów (kolorów) w ciągu jednego dnia, ale odczekaj co najmniej 10 minut między nimi.
- Najlepiej stosować maseczkę 2-3 razy w tygodniu.
- W przypadku długotrwałego regularnego użytkowania zaleca się używanie maski maksymalnie przez rok, a następnie nieużywanie jej w ogóle przez miesiąc.

## EFEKTY ŚWIATŁA LED

<p><b>Niebieskie światło</b></p> 	<p>Sterylizacja, tłumi stany zapalne</p>
<p><b>Zielone światło</b></p> 	<p>Zmniejsza wydzielanie sebum</p>
<p><b>Czerwone światło</b></p> 	<p>Rozjaśnia skórę, wygładza zmarszczki</p>
<p><b>Jasnoniebieskie światło</b></p> 	<p>Poprawia metabolizm</p>
<p><b>Fioletowe światło</b></p> 	<p>Zmniejsza blizny potrądzikowe</p>

<p><b>Żółte światło</b></p> 	<p>Energetyzuje skórę</p>
<p><b>Białe światło</b></p> 	<p>Zmniejsza piegi</p>

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756