



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23224 Panel LED na podczerwień inSPORTline
Romanifra (TL100)



SPIS TREŚCI


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OPIS PRODUKTU.....	3
ZAŁĄCZNIK.....	4
UŻYTKOWANIE.....	4
OCHRONA ŚRODOWISKA.....	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	6

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję przed pierwszym użyciem i montażem i zachowaj ją na przyszłość.
- Urządzenie nie jest zabawką, nie pozostawiaj dzieci i zwierząt w pobliżu urządzenia bez nadzoru.
- Nie patrz bezpośrednio na światła.
- Urządzenie musi być prawidłowo zamontowane, w przypadku braku pewności co do montażu skontaktuj się ze specjalistą.
- Produkt nie jest przeznaczony dla: kobiet w ciąży, osób z padaczką, alergiami na światło i ciepło, osób z wrażliwą skórą, chorobami dermatologicznymi, osobami z urazami lub bliznami itp.
- Nie zanurzaj w wodzie.
- Nie używaj przez dłuższy czas.
- Nie modyfikuj urządzenia
- Podczas używania zawsze zakładaj okulary ochronne dołączone do opakowania.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie nie zastępuje opieki medycznej lub terapeutycznej.

OPIS PRODUKTU

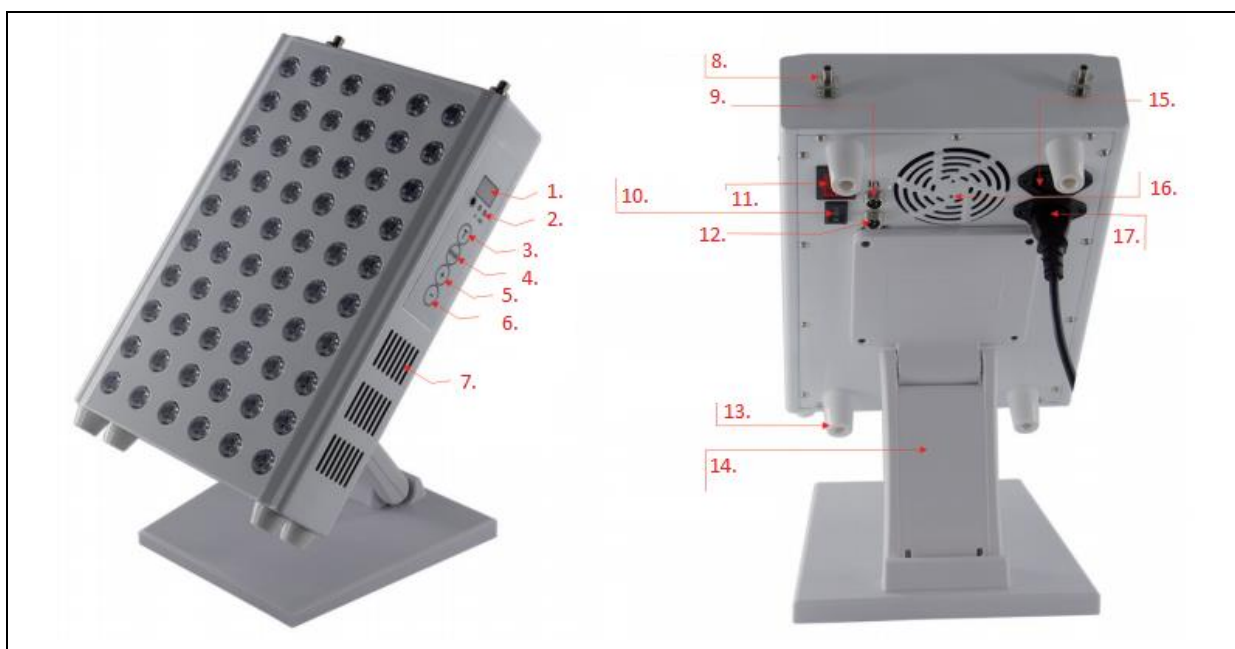

1.	Wyświetlanie czasu	10.	Ustawienia sparowanego urządzenia (I - źródło / II - odbiór)
2.	LED (podczerwień / światło czerwone)	11.	Przełącznik
3.	Ustawienie odliczania (T - wł. / N - wył.)	12.	Wyjście sygnału z innego urządzenia
4.	Ppodczerwień / czerwony / kombinacja	13.	Ochronne stopy
5.	Rosnący czas	14.	Regulowana podstawka
6.	Skróć czas	15.	Wyjście (maks. 110 V ~ 240 V 15 A)
7.	Wentylacja	16.	Wentylacja
8.	Mocowanie nici	17.	Napięcie zasilania wejś. (110 V ~ 240 V)

ZAŁĄCZNIK

Panel ten jest dostarczany ze stojakiem, który można umieścić na płaskiej i solidnej powierzchni (stół itp.)

PONIŻSZY MONTAŻ JEST OPCJONALNY I NIE JEST DOŁĄCZONY

Ten panel umożliwia montaż za pomocą kabli i śrub.

Przymocuj kabel do gwintów montażowych znajdujących się w górnej części panelu.

Następnie przymocuj linkę do karabińczyka i haczyka. Hak i koło pasowe muszą być zamocowane, aby utrzymać wymaganą wagę. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się ze specjalistą.

Możesz regulować wysokość za pomocą linki i koła pasowego.

Aby obniżyć panel, naciśnij mechanizm na kole pasowym. Zawsze trzymaj kabel.

UŻYTKOWANIE

Zalecany czas ciągłego stosowania to 10-20 min. Dzienna ekspozycja na określony obszar nie powinna przekraczać 30 minut. Najlepsze efekty osiągniesz przy odległości panelu 10 – 30 cm od ciała.

Przybliżona długość fali światła w stosunku do odległości:


> 110 mW / cm² dla odległości 15 cm

> 90 mW / cm² dla odległości 30 cm

> 30 mW / cm² dla odległości 91 cm

Wymiary	320 x 220
Liczba diod LED	60
Typ światła LED	Czerwone, podczerwień, kombinacja
Regulator czasowy	tak
Kontroler	tak
Stojak	tak
Zawieszenie	/
Stojak na telefon	/
Montaż naścienny	/
Montaż równoległy	/
Łączenie z innymi panelami	tak

Panel można podłączyć do innych kompatybilnych paneli, np. TL300

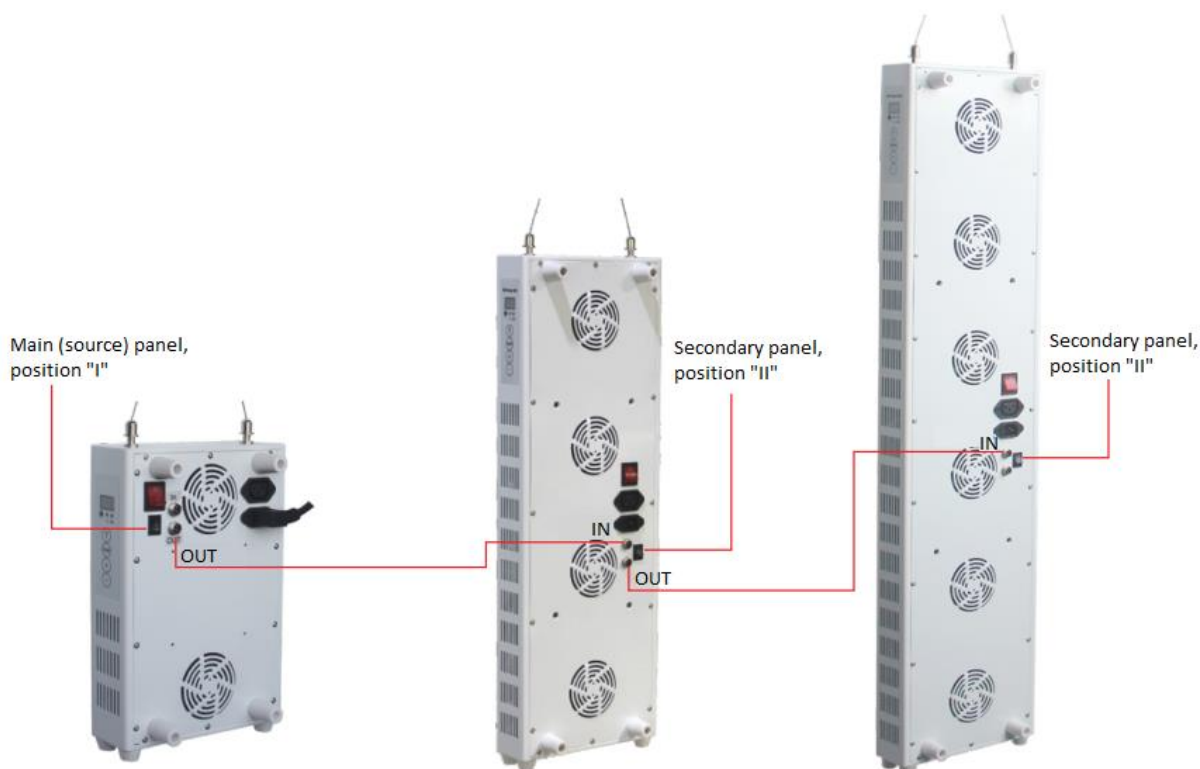

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

