



**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**

**IN 23303 Elektrycznie ogrzewany pas biodrowy  
inSPORTline Sonnex**

## SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .....	3
KONSERWACJA.....	4
PARAMETRY .....	4
UŻYTKOWANIE .....	4
Przyciski: .....	5
OCHRONA ŚRODOWISKA .....	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE .....	<b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>


## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Używaj go tylko zgodnie z niniejszą instrukcją. Niewłaściwe użycie może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie produktu. Nie rób żadnych niewłaściwych modyfikacji tego pasa.
- Używaj tylko oryginalnych (dostarczonych) akcesoriów i oryginalnych części zamiennych.
- Nigdy nie używaj go podczas snu lub z upośledzoną wrażliwością.
- Nie używaj go nieprzerwanie dłużej niż 2 godziny.
- Trzymaj go z dala od dzieci i zwierząt. To nie jest zabawka. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych użytkowników.
- Osoby z powikłaniami zdrowotnymi (paraliż, niewrażliwość termiczna itp.) nie mogą z niego korzystać. Ten produkt nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży ani dla diabetyków.
- Nie nadaje się dla osób sennych lub dla osób rozproszonych.
- Nigdy nie używaj go w miejscach z łatwopalnymi substancjami i gazami lub w magazynach tlenu.
- Nie składaj ani nie skręcaj produktu podczas używania lub pakowania.
- Nigdy nie używaj szpilek ani innych metalowych elementów, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nigdy nie wyciągaj gwałtownie przewodu z gniazdka. Sprawdzaj regularnie pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem używania tego produktu. Jeśli zauważysz jakieś komplikacje zdrowotne lub zawroty głowy podczas używania, natychmiast przestań.
- Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób z ostrymi obrażeniami, krwawieniem lub obrzękiem.
- Nigdy nie siadaj, nie leż ani nie naciskaj mocno na ten produkt.
- Nigdy nie używaj materiałów izolacyjnych do przykrycia tego pasa grzejnego, gdy jest pod napięciem.
- Regularnie sprawdzaj skórę, aby uniknąć oparzeń.
- Używaj tylko właściwego źródła zasilania. Inne źródło zasilania może być niewystarczające ze względu na różnicę w napięciu.
- Ten produkt nie posiada żadnej certyfikacji terapeutycznej, a jego stosowanie nie zastępuje profesjonalnej opieki medycznej.

## KONSERWACJA



Myć ręcznie

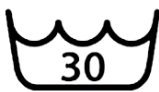

Myć w temperaturze do 30°C



Nie prasować



Nie wybielać



Nie prać



Nie czyścić chemicznie



Powiesić na sucho



Nie wykręcać

## PARAMETRY

**Rozmiar:** Universalny

**Długość:** 110 cm

**Szerokość:** 22 cm

**Napięcie wejściowe:** 220V-240V

**Napięcie znamionowe:** 12V, 1A

## UŻYTKOWANIE

- Umieść pas wygodnie w talii.
- Podłącz pas do gniazdka.
- Aby uruchomić / zatrzymać, przytrzymaj przycisk ogrzewania przez 3 sekundy. Wskaźnik zapala się, gdy pas jest włączony. Po włączeniu taśma startuje w wysokiej temperaturze nagrzewania (ustawienie początkowe).
- Po uruchomieniu naciśnij przycisk ogrzewania:
  - Niebieskie światło: niska temperatura
  - Zielone światło: średnia temperatura
  - Czerwone światło: wysoka temperatura
- Temperatury zmieniają się w kolejności wysoka - średnia - niska.
- Po 5 minutach temperatura zmienia się cyklicznie z wysokiej na średnią, a następnie na niską.

## Przyciski:



Ogrzewanie



Masaż

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756