



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 24098 Podgrzewany pas lędźwiowy inSPORTline
eHeatage z funkcją masażu**

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
FUNKCJE	3
PRZYGOTOWANIE	4
UŻYTKOWANIE	5
KONSERWACJA	6
OCHRONA ŚRODOWISKA	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	7

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności, aby uniknąć uszkodzeń produktu lub obrażeń.
- Używaj produkt tylko zgodnie z niniejszą instrukcją. Niewłaściwe użycie może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie produktu. Nie rób żadnych niewłaściwych modyfikacji tego pasa.
- Używaj tylko oryginalnych (dostarczonych) akcesoriów i oryginalnych części zamiennych.
- Nigdy nie używaj go podczas snu lub z upośledzoną wrażliwością.
- Nie używaj go nieprzerwanie dłużej niż 30 minut.
- Trzymaj go z dala od dzieci i zwierząt. To nie jest zabawka. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych użytkowników.
- Osoby z komplikacjami zdrowotnymi (paraliż, niewrażliwość termiczna itp.) nie mogą z niego korzystać. Ten produkt nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży ani dla diabetyków.
- Nie nadaje się dla osób twardo śpiących lub dla osób rozkojarzonych.
- Nigdy nie używaj go w miejscach z łatwopalnymi substancjami i gazami lub w magazynach tlenu.
- Nie składaj ani nie skręcaj produktu podczas jego używania lub pakowania.
- Nigdy nie używaj szpilek ani innych metalowych elementów, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nigdy nie wyciągaj gwałtownie przewodu z gniazdka. Sprawdzaj regularnie pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem używania tego produktu. Jeśli zauważysz jakieś komplikacje zdrowotne lub zawroty głowy podczas używania, natychmiast przestań.
- Produkt nie jest odpowiedni dla osób z ostrymi obrażeniami, krwawieniem lub obrzękiem.
- Nigdy nie używaj żadnych materiałów izolacyjnych do przykrycia pasa grzejnego podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj skórę, aby uniknąć oparzeń.
- Produkt nie posiada żadnej certyfikacji terapeutycznej, a jego stosowanie nie zastępuje profesjonalnej opieki medycznej.

FUNKCJE


Ogrzewanie i wibracje mogą być używane razem lub osobno.

4-5 godzin pracy (w zależności od intensywności i funkcji biegania)


3 tryby ogrzewania: czerwone, mocne (65°C – 75°C)
 białe, średnie (55°C – 65°C)
 niebieskie, słabe (40°C – 60°C)

3 tryby wibracji: czerwony (stała wibracja)
 biały i niebieski (drgania pulsacyjne o różnych częstotliwościach).


PRZYGOTOWANIE

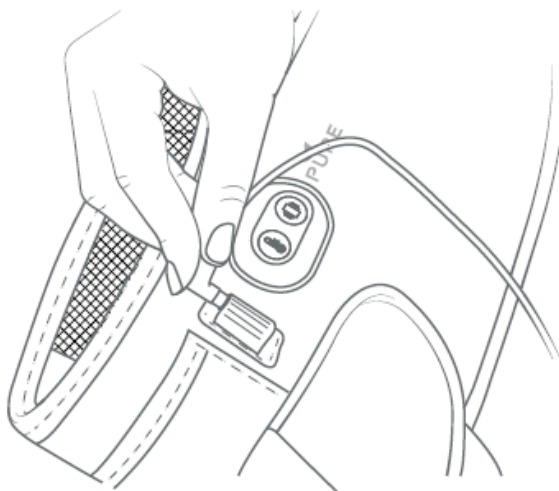


Podłącz przewód zasilający do pasa.

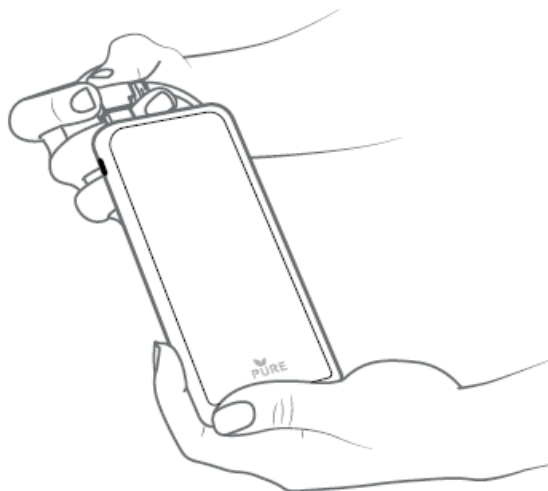

Podłącz przewód zasilający do powerbanku.

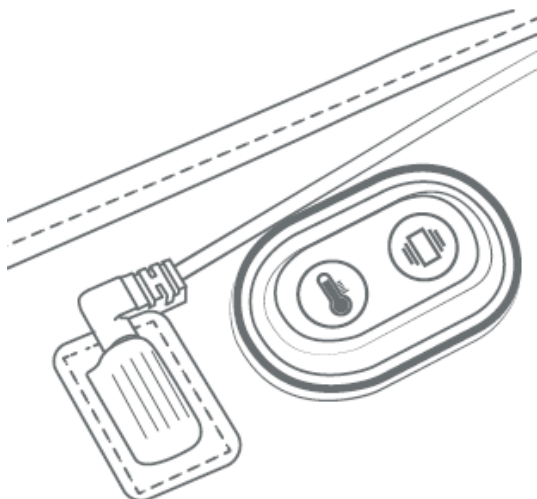


Gdy pas jest zasilany, przyciski świecą.

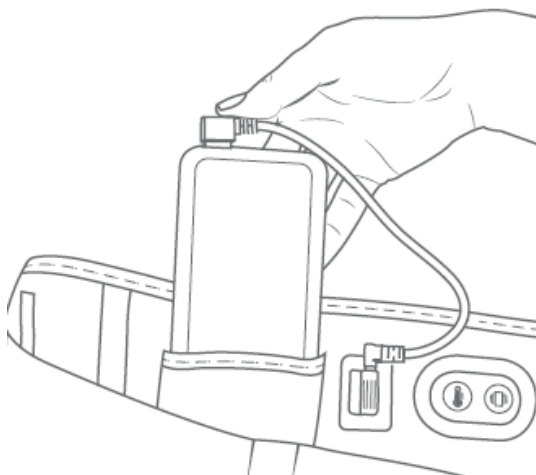

Włóż powerbank do kieszeni.




Zapij pas na rzep.

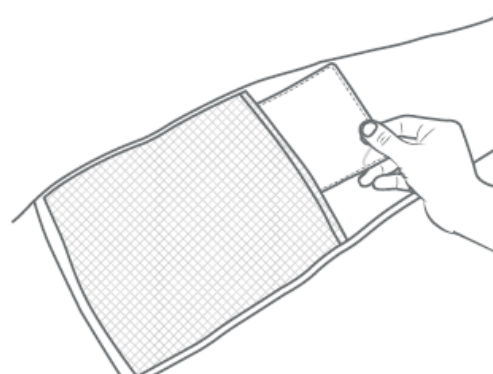

W razie potrzeby możesz użyć podkładki chłodzącej.

UŻYTKOWANIE

Naciśnij przycisk, aby zmienić funkcję, każda funkcja jest sygnalizowana innym światłem przycisku. Możesz włączyć/wyłączyć funkcję, przytrzymując przycisk.

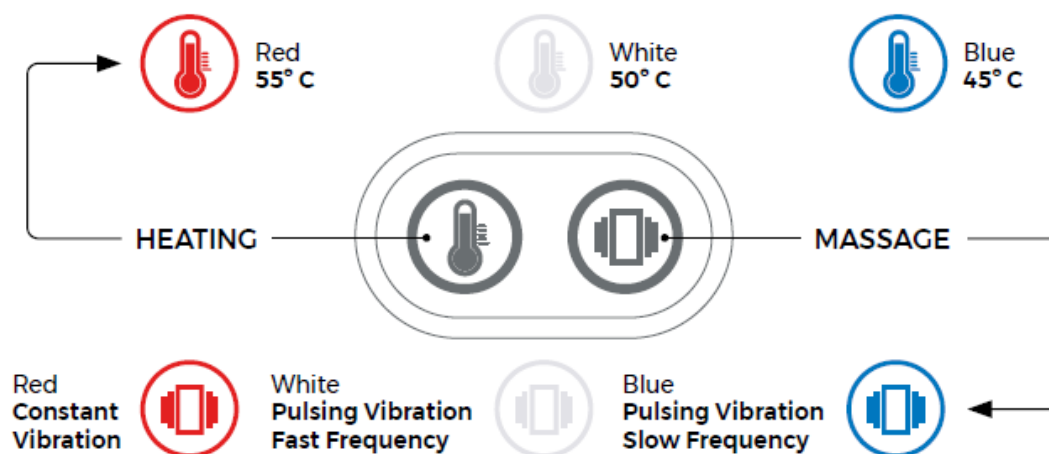

Podgrzewanie

- Niebieskie (słabe) – 45 °C
- Białe (średnie) – 50 °C
- Czerwone (mocne) – 55 °C

Wibracje

- Niebieskie – pulsujące wibracje, niska częstotliwość
- Białe – drgania pulsacyjne, średnia częstotliwość
- Czerwone – stałe wibracje

POWERBANK


Zawiera 2 porty USB 3.0.

Ładowanie powerbanku przez micro-USB.

Wskaźniki pokazują stan naładowania powerbanku: 4 wskaźniki (w pełni naładowany), 1 wskaźnik (należy naładować).

Użyj bocznego przycisku, aby włączyć/wyłączyć powerbank: naciśnij raz, aby rozpocząć/naciśnij dwukrotnie, aby wyłączyć

Naładuj powerbank za pomocą dostarczonego adaptera.

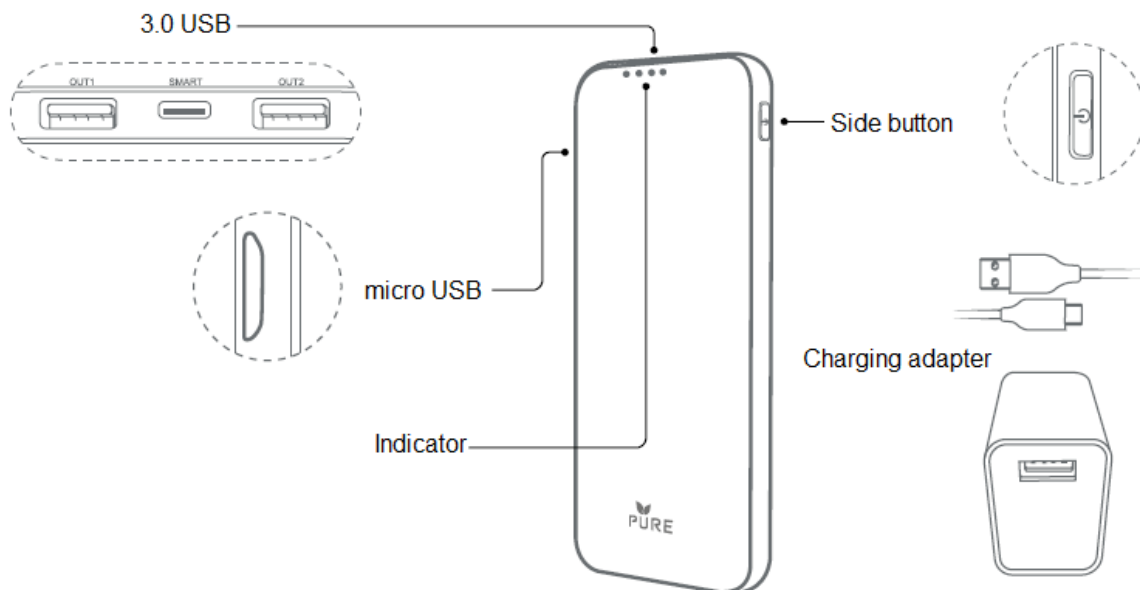

KONSERWACJA

Prać ręcznie

Nie wybielać

Nie prasować

Suszyć w pozycji wiszącej

Nie czyścić chemicznie

Nie wykręcać



MATERIAŁ

70 % neopren

25 % nylon

5 % spandex

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756