



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 24988 Ultrasoniczne urządzenie kosmetyczne
inSPORTline Lovret**



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEPIECZEŃSTWA	3
UŻYTKOWANIE	3
Tryb oczyszczania	3
Tryb nawilżający	4
Tryb liftingu.....	4
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE	5
ŁADOWANIE	5
OPIS PRODUKTU	6
FUNKCJE	6
PARAMETRY	6
OCHRONA ŚRODOWISKA	7
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	7

INSTRUKCJA BEPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie używaj przez dłuższy czas.
- Produkt nie jest zabawką, przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Unikać kontaktu z oczami.
- Aby uzyskać lepszy efekt, stosuj podczas rutynowej pielęgnacji skóry.
- Nie używać podczas snu.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Do czyszczenia nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Produkt nie jest odpowiedni dla: kobiet w ciąży, osób cierpiących na epilepsję, alergii na światło i ciepło, osób z wrażliwą skórą, chorób dermatologicznych, osób z urazami lub bliznami itp.
- Nie używaj bez przerwy dłużej niż 15 minut.
- Nie stosować częściej niż raz w tygodniu.
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie nie zastępuje opieki medycznej ani terapeutycznej.

UŻYTKOWANIE

Tryby:

Oczyszczanie

Oczyszczanie skóry za pomocą wibracji ultradźwiękowych o wysokiej częstotliwości, jony dodatnie dokładnie oczyszczają pory.

Nawilżenie (wchłanianie kosmetyków/nawilżenie)


Wspomaganie wchłaniania składników odżywczych z kosmetyków. Pomaga nawilżyć, odżywić i rozjaśnić skórę.

Lifting

Elektrostymulacja przywraca elastyczność skóry, wzmacnia i wygładza skórę

Tryb oczyszczania

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
2. Następnie naciśnij przycisk zasilania i wybierz tryb Oczyszczanie, zaświeci się odpowiednia dioda LED (rys. 1). Aby czyścić jonami dodatnimi, musisz dotykać oba paski przewodzące. Przed oczyszczeniem zalecamy oczyszczenie skóry produktami pielęgnacyjnymi, którego zwykle używasz.

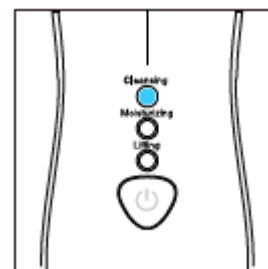

Rys. 1

3. Zastosuj produkty do pielęgnacji skóry.


4. Przesuń urządzenie jak pokazano na rys. 2.



Rys. 2

Tryb nawilżający

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
2. Następnie naciśnij przycisk zasilania i wybierz tryb nawilżania, odpowiednia dioda LED zaświeci się (rys. 1). Musisz trzymać oba paski przewodzące, aby nawilżyć jonami ujemnymi. Przed nawilżeniem zalecamy użycie maseczki na twarz.

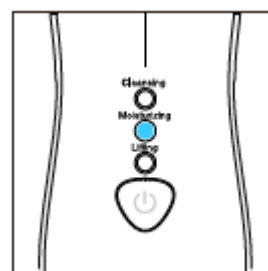

Rys. 1


3. Zastosuj produkty do pielęgnacji skóry.
4. Przesuń urządzenie jak pokazano na rys. 2.



Rys. 2

Tryb liftingu

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
2. Następnie naciśnij przycisk zasilania i wybierz tryb liftingu, odpowiednia dioda LED zaświeci się (rys. 1). Do liftingu należy trzymać oba paski przewodzące. Przed liftingiem zalecamy stosowanie kremów odmładzających lub liftingujących.

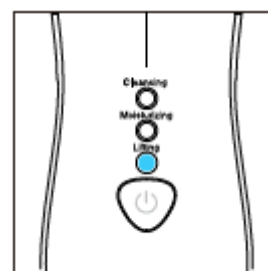

Rys. 1

3. Zastosuj produkty do pielęgnacji skóry.

4. Przesuń urządzenie jak pokazano na rys. 2.




Rys. 2

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE


- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed jakąkolwiek konserwacją i przechowywaniem.
- Urządzenie można czyścić wilgotną szmatką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Po wyczyszczeniu głowicy urządzenie przechowywać w suchym miejscu.
- Nie przechowuj urządzenia w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

ŁADOWANIE

- Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie i usuń folię ochronną.
- Urządzenie jest ładowane przez USB.
- Aby naładować urządzenie, podłącz USB do zasilacza, telefonu komórkowego, powerbanku lub komputera.
- Dioda LED miga podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu dioda LED świeci.

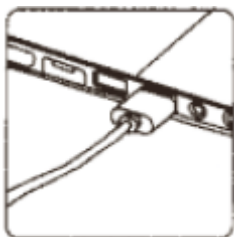

Ładowanie z komputera

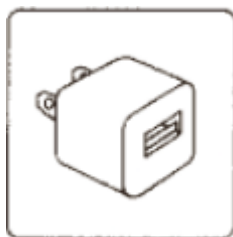


Ładowanie ładowarką



Ładowanie powerbankiem

- Gdy pojemność baterii jest niska, rozlega się sygnał dźwiękowy, a następnie urządzenie się wyłącza.
- Czas ładowania wynosi około 2,5 - 3 godziny.

OPIS PRODUKTU

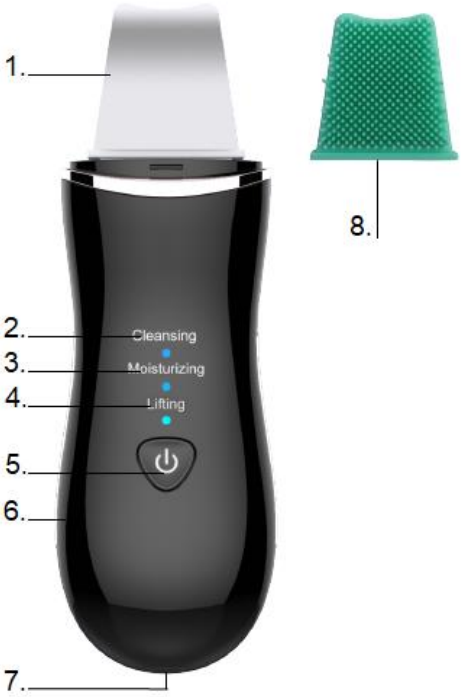	1. Głowica metalowa
	2. Tryb oczyszczania
	3. Tryb nawilżania
	4. Tryb liftingu
	5. Przełącznik zasilania / wybór trybu
	6. Paski przewodzące jony
	7. Port ładowania USB
	8. Silikonowa szczoteczka do czyszczenia

FUNKCJE

- Dogłębne czyszczenie i usuwanie martwych komórek skóry.
- Blaknięcie plam pigmentowych.
- Przeciwzmarszczkowy zwiększa elastyczność skóry.
- Wspomaga krążenie krwi i układ limfatyczny.
- Zwiększa regenerację i przepuszczalność komórek skóry.
- Masaż twarzy, import składników odżywczych.

PARAMETRY

Nazwa: Ultradźwiękowe urządzenie kosmetyczne	Model: IF-1015
Napięcie wejściowe: DC 5 V	Czas ładowania: ok. 3 godziny
Moc: ≤ 3 W	Waga: 122g
Wymiary: 175 x 55 x 67 mm	Czas pracy: 15 min
Bateria: 500 mA	Częstotliwość stosowania: raz w tygodniu

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

6-miesięczna gwarancja na akumulator – gwarantujemy, że nominalna pojemność akumulatora nie spadnie poniżej 70% jego całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży produktu.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756