




**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**

**IN 24990 Pielęgnacyjna maska LED na twarz inSPORTline  
Esgrima**

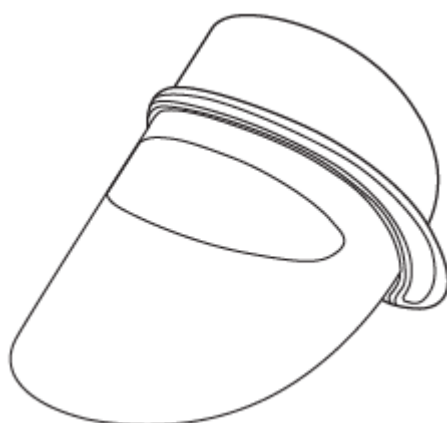


## **SPIS TREŚCI**

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OPIS PRODUKTU.....	3
UŻYTKOWANIE .....	3
TERAPIA ŚWIATŁEM .....	4
PARAMETRY .....	5
OCHRONA ŚRODOWISKA .....	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE .....	6

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie nadaje się dla kobiet w ciąży.
- Nieodpowiednia dla osób z padaczką.
- Nieodpowiednia dla osób przyjmujących leki na tarczycę.
- Po użyciu wyczyść urządzenie bawełnianą szmatką. Delikatnie wyczyść urządzenie, aby uniknąć deformacji i uszkodzenia.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Przechowuj urządzenie w zacienionym i suchym miejscu. Przechowywać poza zasięgiem słońca.
- Nie naprawiaj, nie modyfikuj i używaj urządzenia wyłącznie do celów opisanych w instrukcji. Nie przechowywać w ekstremalnych warunkach lub w bezpośrednim świetle słonecznym.


## OPIS PRODUKTU

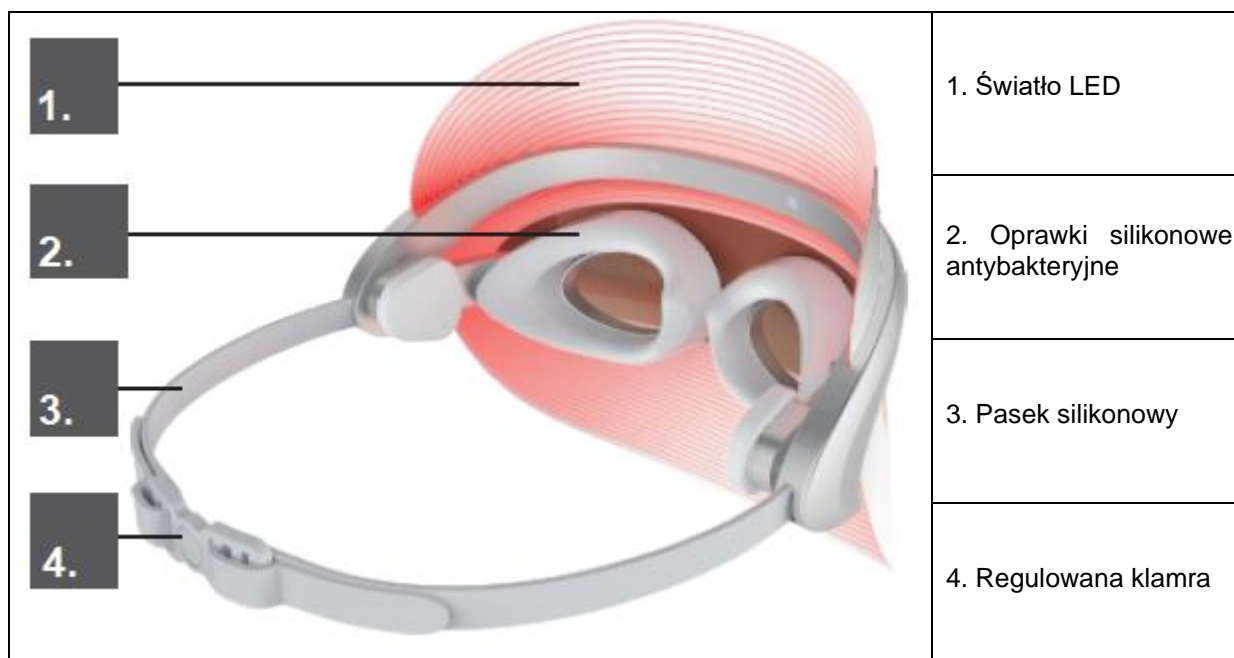

## UŻYTKOWANIE

- Oczyszczyć i osuszyć twarz. Dopasuj pasek do odpowiedniej długości.
- Upewnij się, że bateria jest naładowana lub ładuj ją przez port USB (5 V 1 A)
- Dla lepszego efektu można zastosować maseczkę na twarz lub inne kosmetyki przeznaczone do skóry (balsamy, olejki).
- Noś maskę na twarzy przez 10-20 minut. Użytkownik może używać maski do 30 minut po kilku miesiącach regularnego użytkowania.

1. Naciśnij przycisk zasilania (2.) przez 1 sekundę. Możesz ustawić temperaturę, częstotliwość wibracji, terapię światłem LED.
2. Przytrzymaj przycisk zasilania (2.) przez 1 sekundę, aby wyłączyć.
3. Krótco naciśnij przycisk zasilania (2.), aby ustawić wibracje.
4. Naciśnij przycisk timera (3.), aby ustawić czas rozpoczęcia 10 min, 15 min, 20 min i 30 min.
5. Przytrzymaj przycisk timera (3.) przez 1 sekundę, aby ustawić terapię światłem LED. Do wyboru jest 7 rodzajów kolorów terapii.

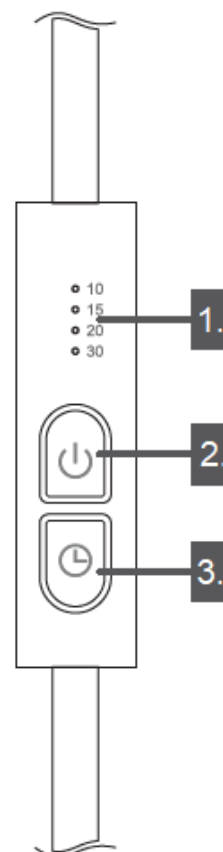

## TERAPIA ŚWIATŁEM

### Czerwone

Zwiększony przepływ krwi i produkcja kolagenu. Wspomaga naprawę tkanek (wymianę starych komórek skóry na nowe) i redukcję porów.

### Zielone

Pomaga zrównoważyć kolor pigmentu, przyspieszyć regenerację skóry i zmniejszyć przetłuszczenie się.

### Niebieskie

Poprawia jędrność i elastyczność skóry. Działa uspokajająco na skórę wrażliwą.

### Pomarańczowe

Energetyzuje skórę, pomaga zredukować zmarszczki, wyrównać kolor pigmentu i wygładzić skórę.

### Fioletowe

Pomaga zapobiegać trądzikowi.

### Błękitne

Pomaga zwiększyć energię komórek i poprawić metabolizm.


### Białe

Pomaga poprawić napięcie skóry i metabolizm tkanek.

### Pielęgnacja oczu

Temperatura 40°C zmniejsza suchość i zmęczenie oczu. Zmiękcza cienie i worki pod oczami.

## PARAMETRY

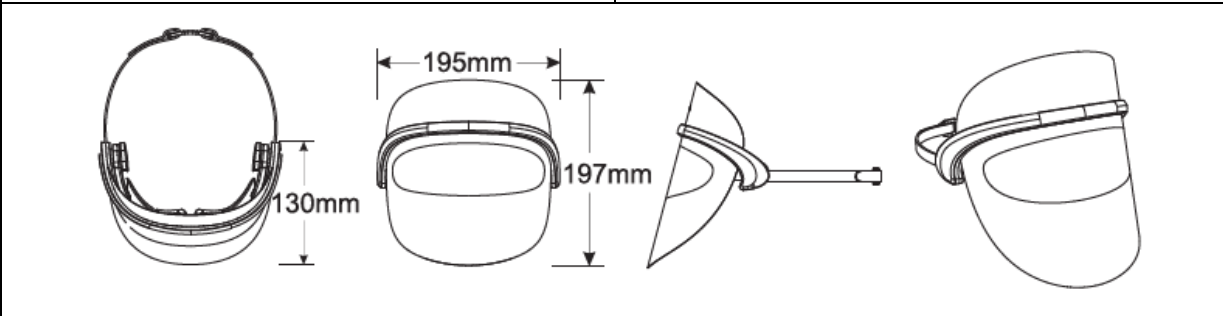Model: IF-0802	Czas pracy: 10-30 min
Napięcie: 9 W	Napięcie wejściowe: 5 V - 2 A
	

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

6-miesięczna gwarancja na akumulator – gwarantujemy, że nominalna pojemność akumulatora nie spadnie poniżej 70% jego całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży produktu.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756