



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL


IN 28768 Silikonowa maska LED z możliwością ładowania inSPORTline Santorina

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem produktu.
- Nie używaj, jeśli niedawno przeszedłeś operację, uraz twarzy lub jakiegokolwiek zabieg medyczny/kosmetyczny.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj, jeśli podczas poprzedniego użycia zaobserwowałeś zaczerwienienie lub obrzęk. Jeśli zaczerwienienie lub obrzęk utrzymuje się dłużej niż 2 godziny, zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli masz wrażliwą skórę, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
- Nie stosuj na otwarte rany.
- Po użyciu skóra może być bardziej wrażliwa na światło słoneczne.
- Nie nadaje się dla dzieci.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.
- Nie patrz bezpośrednio w światło.
- Nie przekraczaj zalecanego czasu stosowania.
- Jeśli cierpisz na następujące choroby, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem: guzy, stany zapalne, wrażliwość na ciepło, wrażliwość na światło, otwarte rany, krwawienie, otarcia skóry, obrzęk, zaczerwienienie skóry itp.
- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli jesteś w ciąży.
- Jeśli odczuwasz nudności lub dyskomfort, natychmiast przerwij stosowanie.
- Przed użyciem oczyść skórę z kosmetyków i kremów.
- Nie używaj w pobliżu wody ani w wilgotnym środowisku.
- Trzymaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- Nie używaj, jeśli bateria, kabel ładujący lub ładowarka są uszkodzone.
- Używaj i ładuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od gazów wybuchowych.
- Nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu.
- Nie ładuj dłużej niż 1 godzinę.
- Chroń przed uderzeniami i upadkami.
- Nie przykrywaj produktu podczas użytkowania.
- Nie można używać podczas ładowania.
- Przed założeniem maski na twarz przetestuj urządzenie na ramieniu.
- Zalecana częstotliwość stosowania: 3–5 razy w tygodniu, 10–20 min.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

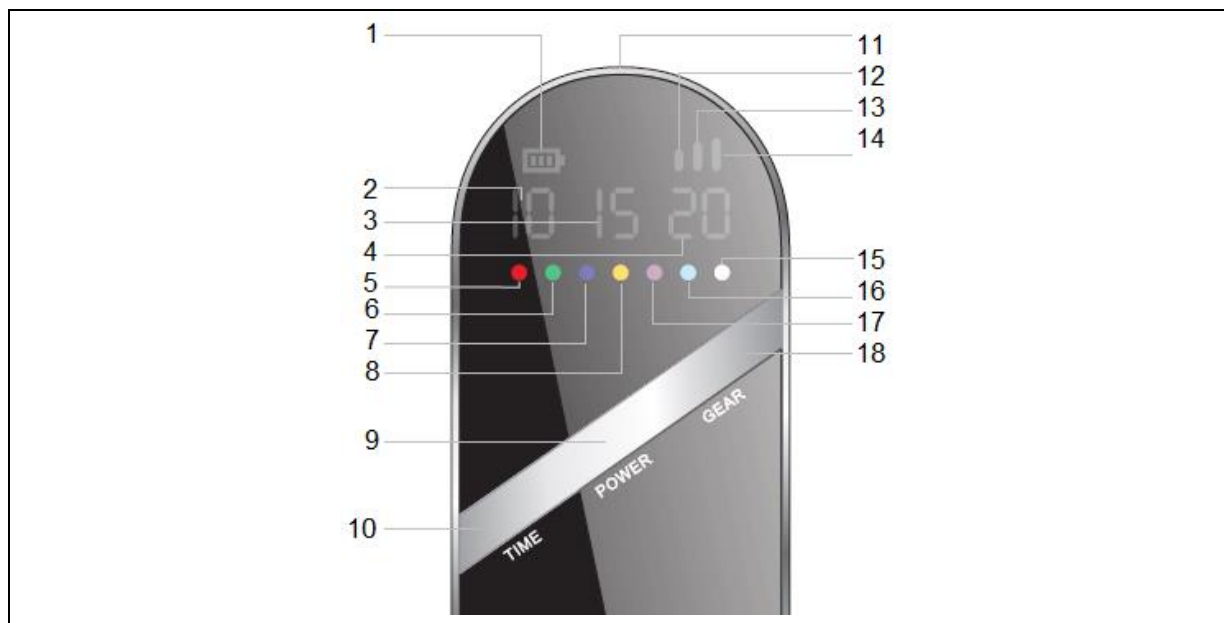

1. Wskaźnik baterii	10. Czas
2. 10 min	11. Port ładowania/port wyjściowy
3. 15 min	12. 1. poziom intensywności
4. 20 min	13. 2. poziom intensywności
5. Czerwone światło	14. 3. poziom intensywności
6. Zielone światło	15. Białe światło
7. Niebieskie światło	16. Jasnoniebieskie światło
8. Żółte światło	17. Fioletowe światło
9. Przycisk zasilania/trybu	18. Poziom intensywności

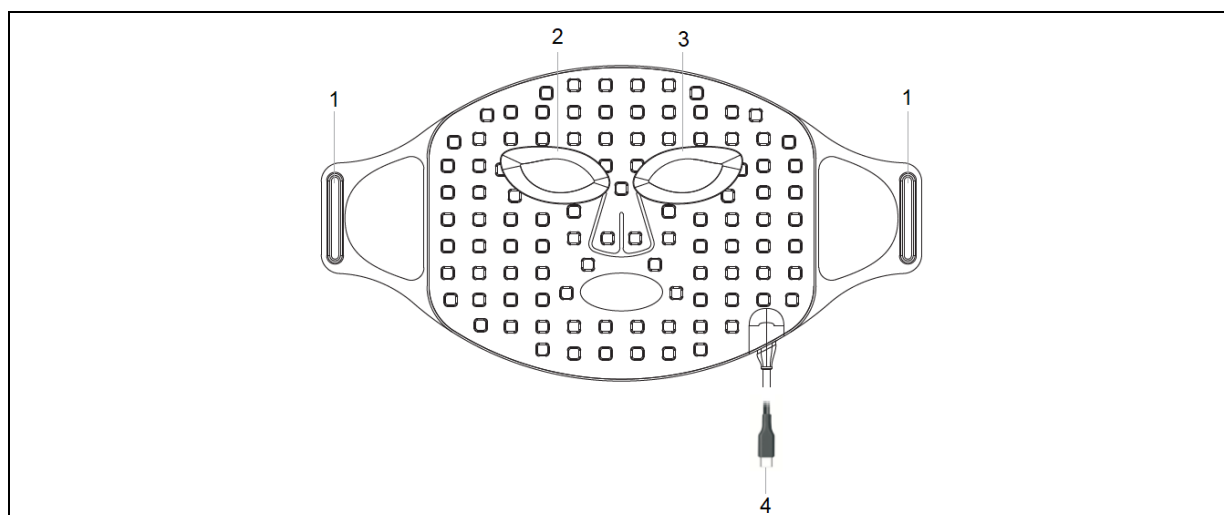

1. Mocowanie paska	3. Ochrona prawego oka
2. Ochrona lewego oka	4. Złącze USB-C

UŻYTKOWANIE

Przed założeniem maski na twarz zalecamy przetestowanie maski poprzez umieszczenie jej na ramieniu.

1. Umieść maskę na ramieniu.
2. Naciśnij przycisk POWER, aby uruchomić maskę, kontynuuj 10-minutowy program.
3. Jeśli poczujesz pieczenie lub dyskomfort, natychmiast przerwij stosowanie.
4. Po wykonaniu testu odczekaj co najmniej 6 godzin i obserwuj leczony obszar. Jeśli zauważysz zaczerwienienie, wysypkę, swędzenie lub inne problemy, nie używaj maski.

Częstotliwość stosowania: 3-5 dni w tygodniu po 10-20 min.

Przy pierwszym użyciu zalecamy użycie maski na poziomie intensywności 1-2. Po zbudowaniu tolerancji możesz zwiększyć intensywność.

Dostosuj intensywność i czas stosowania zgodnie z reakcją skóry. (W przypadku światła niebieskiego czas stosowania nie powinien przekraczać 10 min)

Przed użyciem konieczne jest oczyszczenie skóry z brudu, kosmetyków, kremów, olejków itp. Przed nałożeniem maski osusz skórę.

Załóż maskę na twarz i zabezpiecz ją paskami. Przytrzymaj przycisk POWER, aby uruchomić maskę.

Maska zaczyna świecić na czerwono. Naciśnij przycisk POWER, aby przełączać się między poszczególnymi trybami światła.


Dostosuj czas stosowania, naciskając przycisk TIME. Możesz zakończyć stosowanie w dowolnym momencie, przytrzymując przycisk POWER.

Dostosuj intensywność za pomocą przycisku GEAR.


Po zdjęciu maski możesz nałożyć kosmetyki.

Czyść maskę wilgotną szmatką, nie używaj środków chemicznych. Przed czyszczeniem upewnij się, że maska jest wyłączona i nie jest podłączona do ładowarki.


ZAKŁADANIE MASECZKI NA TWARZ

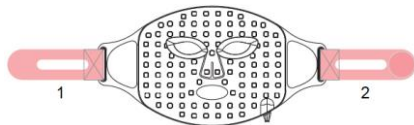

1. pasek lewy, 2. pasek prawy

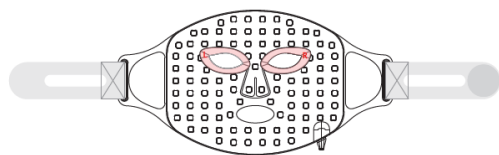

Zdejmij folię ochronną i załóż lewą i prawą ochronę oka.

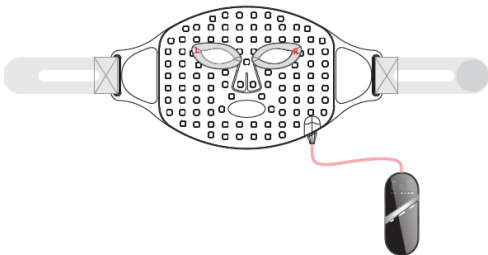

Podłącz kontroler za pomocą złącza USB-C.

ZALETY RÓŻNYCH TRYBÓW ŚWIATŁA

Czerwone światło

Stymuluje produkcję kolagenu. Nadaje się do naprawy tkanek i wymiany starych tkanek skóry. Nadaje się do redukcji porów.

Zielone światło

Pomaga wyrównać kolor pigmentu i przyspieszyć regenerację skóry, zmniejsza przetłuszczanie.

Niebieskie światło

Nadaje się do niszczenia bakterii i łagodzenia skóry, tłumi stany zapalne.

Żółte światło

Ożywia skórę, redukuje zmarszczki, wyrównuje kolor pigmentu, poprawia miękkość skóry itp.

Fioletowe światło

Nadaje się do skóry podatnej na pryszcze.

Jasnoniebieskie światło

Wspiera energię komórkową i metabolizm.

Białe światło

Poprawia jędrność skóry i przyspiesza metabolizm tkanek.

PARAMETRY

Światła LED	Czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, jasnoniebieski, biały
Liczba świateł	100 szt.
Bateria	1500 mAh
Napięcie	5 V / 1 A
Moc	Ok. 6,5 W
Rozmiar kontrolera	110 x 45 x 22 mm
Rozmiar maski	380 x 200 x 3 mm
Timer	10 / 15 / 20 min
Materiał	ABS + silikon
Zawartość opakowania	1x maska LED, 1x pilot zdalnego sterowania, 2x ochrona oczu, 2x gumki, 1x instrukcja, 1x kabel do ładowania, 1x torba do przechowywania

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

