



## **INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**

### **IN 29103 Masażer kompresyjny inSPORTline Compini**

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową [www.e-inSPORTline.pl](http://www.e-inSPORTline.pl), gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Zalecamy użycie niższej intensywności podczas pierwszego użycia.
- Jeśli odczuwasz ból, dyskomfort lub nudności, natychmiast przerwij używanie urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj razem z innym sprzętem grzewczym (koce, podkładki itp.)
- Trzymaj z dala od wody.
- Przed użyciem oczyść i osusz skórę. Nie używaj na wilgotnej lub mokrej skórze.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem odpowiedzialnego dorosłego lub opiekuna.
- Zalecamy, aby nogi były nieruchome podczas używania. Nie wykonuj żadnych innych czynności.
- Nie spożywaj alkoholu, narkotyków ani leków wpływających na osąd podczas używania.
- Chron przed uszkodzeniami fizycznymi.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wykazuje nieprawidłowości podczas działania, natychmiast przerwij jego używanie i nie używaj go, dopóki uszkodzenie nie zostanie naprawione.
- Nie używaj, jeśli masz chorobę skóry; stan zapalny, otwarte rany lub niezagojone obrażenia w okolicy użycia; osoby po lub przed operacją żyłaków; choroby serca; zablokowane naczynia krwionośne itp.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Nie stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności (sauny, baseny itp.)
- Nie zasypiaj podczas stosowania.

### **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

1x urządzenie, 1x kabel ładujący USB-C, 1x instrukcja.

## CZYSZCZENIE, KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE

Przed czyszczeniem i konserwacją wyłącz urządzenie. Wyczyść powierzchnię 75% roztworem alkoholu. Zwilżaj tylko ściereczkę, nie dopuść do przedostania się płynów do urządzenia. Po czyszczeniu pozwól mu swobodnie wyschnąć i przechowuj w czystym, zacienionym i suchym miejscu.

## UŻYTKOWANIE

Aby włączyć/wyłączyć, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.




1. Program

2. Dioda grzewcza

3. Stan baterii

4. Ciśnienie

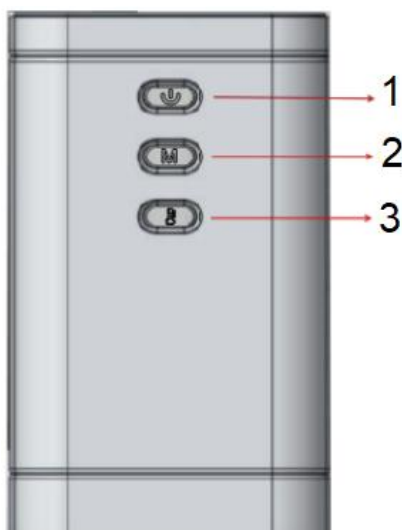

1. Przełącznik włączania/wyłączania i ustawiania ciśnienia

2. Wybór programu

3. Przycisk ogrzewania

### PROGRAMY

Przełączanie między programami odbywa się za pomocą przycisku M, przełączanie odbywa się w cyklu F1, F2, F3, F1...

#### F1

Długość jednego cyklu: maks. 90 sekund

Czas nadmuchania komory powietrznej: 30 sekund

Długość komory przy maksymalnej wartości: 10 sekund

Ciśnienie w komorach powietrznych zmienia się w sposób ciągły w ustawionym cyklu.

#### F2

Długość jednego cyklu: maks. 80 sekund

Czas nadmuchania komory powietrznej: 60 sekund

Długość komory przy maksymalnej wartości: 10 sekund

Program jednocześnie nadmucha dwie komory powietrzne.

#### F3

Program powtarza w cyklu funkcje programów F1 i F2.

### NOSZENIE I OBSŁUGA

Otwórz rzep i owiń wokół łydki. Podczas zakładania zwróć uwagę na kierunek wyświetlacza panelu sterowania, musi być skierowany do góry.

Aby rozpocząć, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, wyświetlacz się zaświeci i zostaną wyświetlone oryginalne wartości (tryb F1, ciśnienie: 60 mmHg)

Naciśnij przycisk zasilania, aby ustawić ciśnienie w 3 wartościach, 60 / 80 / 90 mmHg, wartość jest dostosowywana w cyklu.

Naciśnij przycisk ogrzewania, aby rozpocząć / zatrzymać ogrzewanie (45 ° C ~ 55 ° C).

Naciśnij przycisk M, aby przełączać się między programami. Do wyboru są 3 programy: F1, F2, F3.

Po użyciu wyłącz kontroler, a następnie odepnij rzep.

## PARAMETRY

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Waga: 400 g                                            | Rozmiar: 600*350*2,5 mm            |
| Napięcie znamionowe: 3,7 V                             | Ciśnienie: 60/80/99 mmHg           |
| Moc znamionowa: 5 W                                    | Liczba programów: F1, F2, F3       |
| Pojemność baterii: DC3,7 V 2500 mAh Bateria polimerowa | Temperatura grzania: 45°C ~ 55°C   |
| Metoda ładowania: DC5 V/1500~2000, USB-C               | Hałas: <55 dBm                     |
| Temperatura przechowywania: -40°C ~ +70°C              | Temperatura robocza: +10°C ~ +40°C |

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchniowego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

**Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

### **Formularz kontaktowy**

