



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 29214 Poduszka do masażu szyi i pleców inSPORTline
Belvetino**

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
UŻYTKOWANIE	4
PILOT	7
PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA	11
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	11
OCHRONA ŚRODOWISKA	11
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	11

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Poduszka nie jest odpowiednia dla następujących grup osób:
 - Osoby z rozrusznikiem serca lub podobnym urządzeniem.
 - Osoby z guzami lub rakiem.
 - Osoby z zaburzeniami krążenia lub chorobami.
 - Osoby z chorobami serca.
 - Osoby z wrażliwością na ciepło lub słabą wrażliwością na ciepło.
 - Kobiety w ciąży lub kobiety, które niedawno urodziły.
 - Osoby z uszkodzonymi naczyniami krwionośnymi lub nerwami z powodu cukrzycy lub podobnych chorób.
 - Osoby z osteoporozą, urazami kręgosłupa, skręceniami lub osoby cierpiące na skurcze mięśni.
 - Osoby z urazami w obszarze stosowania.
 - Zawsze skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
- Długotrwałe używanie poduszki nawet przy niskich temperaturach w tym samym obszarze może prowadzić do oparzeń.
- Nie używaj przedłużaczy ani adapterów.
- Nie używaj zużytego lub uszkodzonego produktu.
- Elektrody muszą mieć kontakt ze skórą podczas użytkowania.
- Używaj tylko na plecach i szyi.
- Chroń produkt przed uderzeniami, upadkami i uszkodzeniami fizycznymi. Nie stawaj na produkcie.
- Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniem.
- Nie używaj jednocześnie z innymi produktami emitującymi ciepło lub w pobliżu takich obiektów (kaloryferów, podgrzewanych koców, podkładek itp.).
- Maksymalny czas użytkowania w jednym miejscu 15 min.
- Nie używaj podczas snu lub gdy jesteś zmęczony.
- Nie używaj w wilgotnych środowiskach, takich jak łazienki, baseny itp.
- Automatyczne wyłączenie po 15 minutach ciągłego użytkowania. Następnie należy odczekać 1 godzinę, aż produkt ostygnie.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru. Elektrody należy stosować wyłącznie na plecach, szyi, przedniej części ud, łydkach, ramionach i talii. Nie należy stosować na oczach, na narządach płciowych ani innych obszarach o wrażliwej skórze.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Każda elektroda ma żywotność 10-15 użyć.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Poduszka masująca	
Zasilacz	
Kabel elektrod	
Elektrody	

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

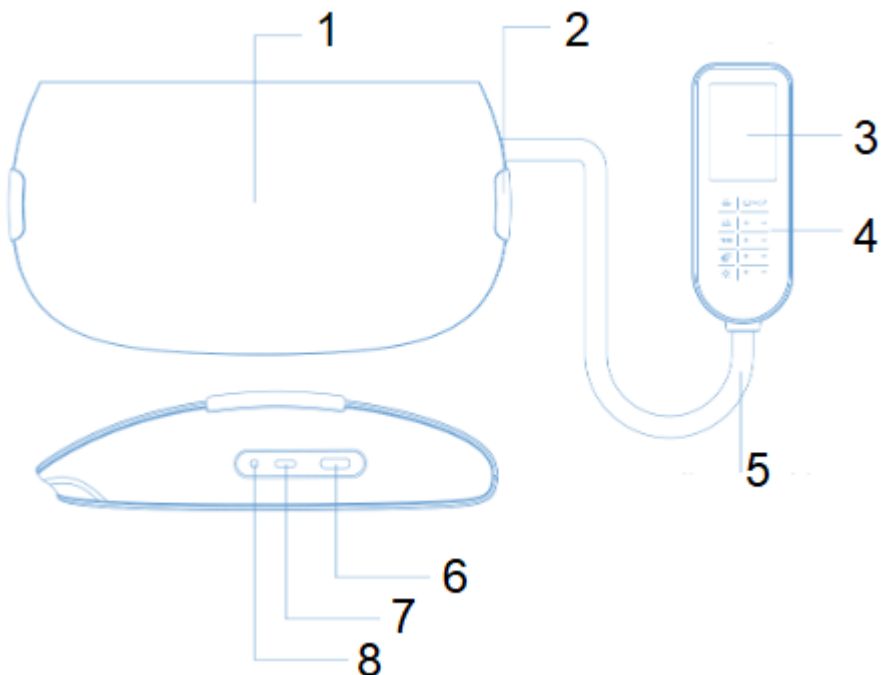
	
1. Obszar masujący	5. Przewód sterujący / wąż powietrza
2. Kontrolka	6. Złącze kontrolera / węża powietrza
3. Wyświetlacz	7. Przycisk zasilania
4. Przyciski	8. Przycisk ogrzewania / masażu

UŻYTKOWANIE


Możesz wybrać kierunek masażu. Inny kierunek może prowadzić do innego doświadczenia masażu. Zalecamy korzystanie z poduszki masującej z masażem skierowanym do przodu.

Talia

Do przodu

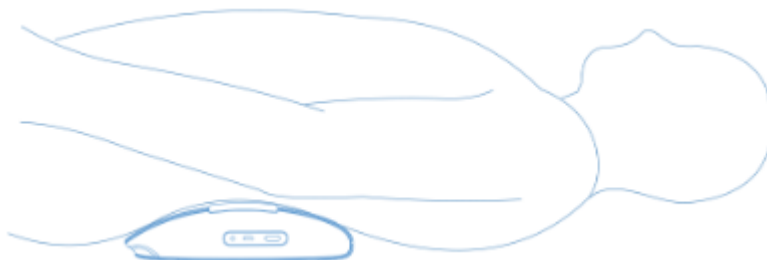


Do tyłu

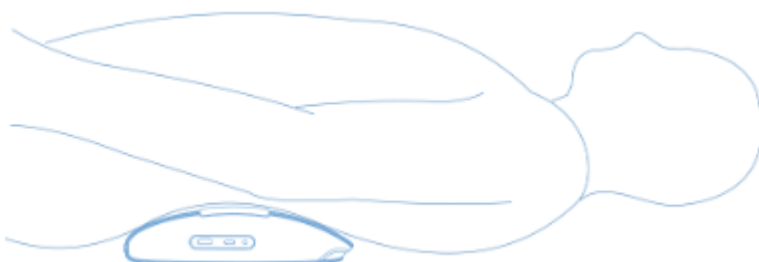


Szyja


Do przodu

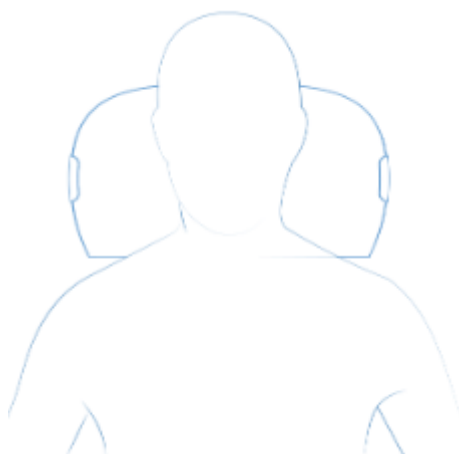

Do tyłu

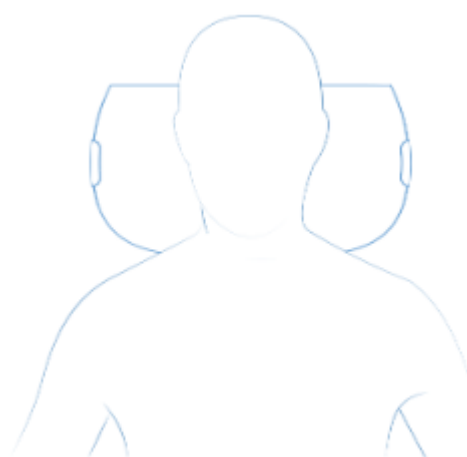


Podłącz poduszkę do gniazdka. Koniec przewodu zasilającego ma kształt litery L, zaleca się, aby przewód zasilający był skierowany w stronę gniazdka.

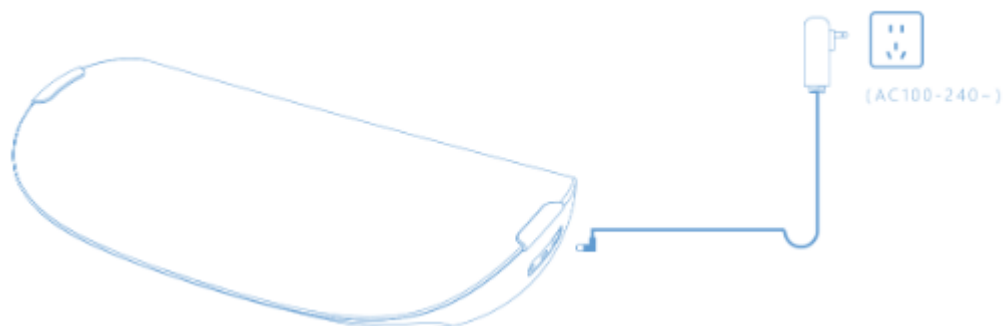


Wybierz kierunek i obszar masażu.

Talia

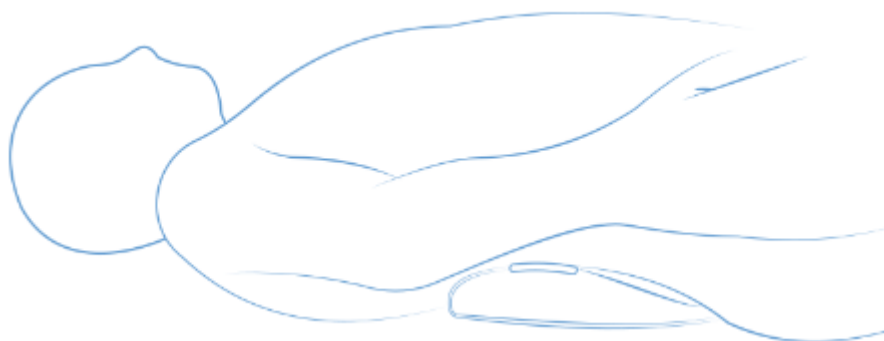

Szyja

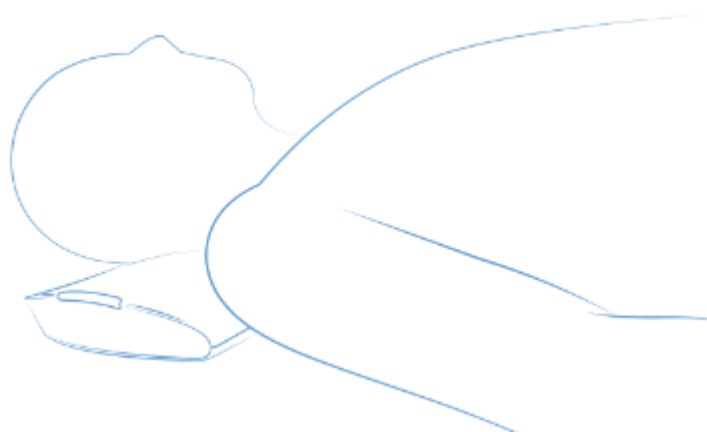


PILOT

	1.	Program masażu talii
	2.	Program automatyczny
	3.	Program masażu szyi
	4.	Program wahadłowy
	5.	Program podnoszenia
	6.	Program trakcji
	7.	Tryb pulsowania
	8.	Odliczanie wibracji
	9.	Odliczanie czasu
	10.	Ikona oczekiwania na wybór pozycji masażu
	11.	Ikona zasilania
	12.	Przełącz obszar masażu
	13.	Ustawienie masażu powietrznego
	14.	Ustawienie pulsowania
	15.	Ustawienie wibracji
	16.	Ustawienie ogrzewania
	17.	Intensywność masażu powietrznego
	18.	Ikona masażu powietrznego
	19.	Intensywność pulsowania
	20.	Ikona pulsowania
	21.	Intensywność wibracji
	22.	Ikona wibracji
	23.	Intensywność ogrzewania
	24.	Ikona ogrzewania
	25.	Przytrzymaj, aby rozpocząć/zatrzymać poduszkę Naciśnij, aby przełączać się między programami automatycznymi
	26.	Start/stop masażu powietrznego
	27.	Start/stop pulsacji
	28.	Start/stop wibracji
	29.	Start/stop ogrzewania

Automatyczny program masażu szyi



Przytrzymaj przycisk zasilania  **AUTO** , aby rozpocząć.

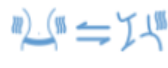Użyj przycisku zmiany pozycji masażu  , aby wybrać szyję .


Naciśnij przycisk zasilania  **AUTO** , aby wybrać typ masażu powietrznego.

Użyj przycisków **+/-** , aby dostosować intensywność masażu powietrznego .

Automatyczny program masażu talii



Przytrzymaj przycisk zasilania  **AUTO** , aby rozpocząć.

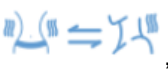
Użyj przycisku zmiany pozycji masażu  , aby wybrać talię .

Naciśnij przycisk zasilania  **AUTO** , aby wybrać typ masażu powietrznego.

Użyj przycisków **+/-** , aby dostosować intensywność masażu powietrznego .

Masaż pulsacyjny (elektrody)

Podłącz kabel elektrody do poduszki, a następnie podłącz elektrody do kabla.

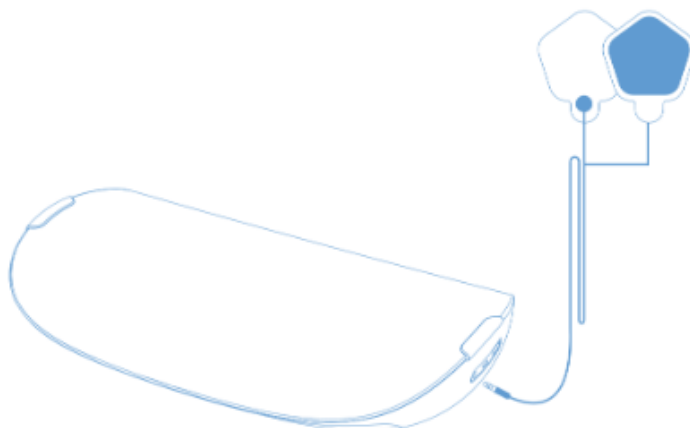



Użyj przycisku **TENS**, aby uruchomić funkcję.

Naciśnij przycisk **TENS**, aby wybrać rodzaj masażu.


Użyj przycisków **(+ -)**, aby dostosować intensywność.

Przytrzymaj przycisk **TENS**, aby wyłączyć program.

Elektrody można umieścić w następujących miejscach:



Barki

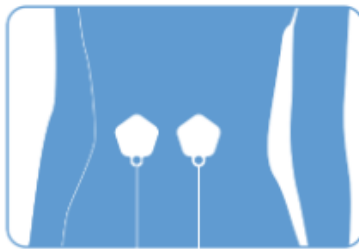

Brzuch



Uda / łydki



Talia



Ramiona



Program wibracji

Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję.

Naciśnij przycisk , aby wybrać rodzaj masażu.

Naciśnij przyciski  , aby dostosować intensywność wibracji  (5 poziomów).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłączyć program.




Grzanie

Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję.

Za pomocą przycisków   ustaw temperaturę .

Przytrzymaj przycisk , aby wyłączyć ogrzewanie.

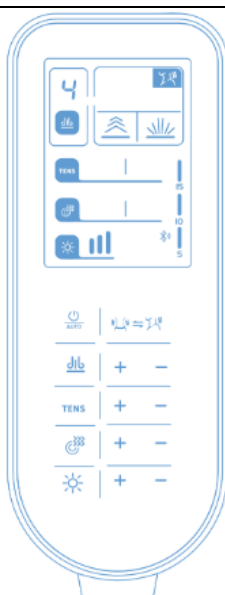

Masaż powietrzny (tryb ręczny)

W programie automatycznym naciśnij przycisk , aby przejść do trybu ręcznego.

Naciśnij przycisk , aby wybrać rodzaj masażu.

Użyj przycisków   do regulacji intensywności  (4 poziomy).

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Odłączyć po użyciu. Nie odłączać urządzenia podczas pracy.
- Nie owijać kabli i węży wokół poduszki.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie przechowywać w wilgotnym miejscu.
- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu z dala od światła słonecznego.
- Nie umieszczać innych przedmiotów na produkcie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących. Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki, a następnie osuszaj suchą ściereczką. Chroń przed wodą.
- Nie pocieraj poduszki energicznie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

