



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 29684 Panel LED na podczerwień inSPORTline Lustar

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
PARAMETRY	3
WYMIARY	4
PANEL STEROWANIA.....	4
MONTAŻ.....	5
DŁUGOŚĆ FALI I PROGRAMY	8
OCHRONA ŚRODOWISKA	9
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	9

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Produkt nie jest przeznaczony jako urządzenie medyczne.
- Używaj tylko zgodnie z instrukcją.
- Nie nadaje się dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i niemowląt.
- Nie używaj panelu, jeśli masz niepełnosprawność umysłową lub fizyczną, chorobę skóry (egzema, albinizm, łuszczyca itp.). Zawsze skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
- Nie używaj panelu, jeśli jesteś wrażliwy na światło lub przyjmujesz leki, które zwiększają wrażliwość na światło.
- Po użyciu nie nakładaj kosmetyków, które mogą zwiększyć wrażliwość na światło.
- Noś okulary ochronne i zamknij oczy podczas użytkowania. Nie używaj panelu, jeśli masz dziedziczne zaburzenie wzroku.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas użytkowania, natychmiast przerwij korzystanie z panelu i skontaktuj się z lekarzem.
- Urządzenie nie jest wodoodporne, nie zanurzaj panelu w wodzie.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj zużytego lub uszkodzonego produktu.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie naprawiaj, nie modyfikuj ani nie rozmontowuj produktu samodzielnie.

PARAMETRY

Napięcie wejściowe	AC100-240V, 50/60Hz
Moc znamionowa	450W
Liczba diod LED	300 pcs
Długość fali	630nm+660nm+810nm+830nm+850nm
Rozmiar panelu LED	925*300*96 mm
Waga	9 kg
Temperatura pracy	0°C – 45°C
Temperatura przechowywania i transportu	-5°C – 55°C
Wilgotność pracy	30% - 95%
Wilgotność przechowywania i transportu	20% - 85%

WYMIARY

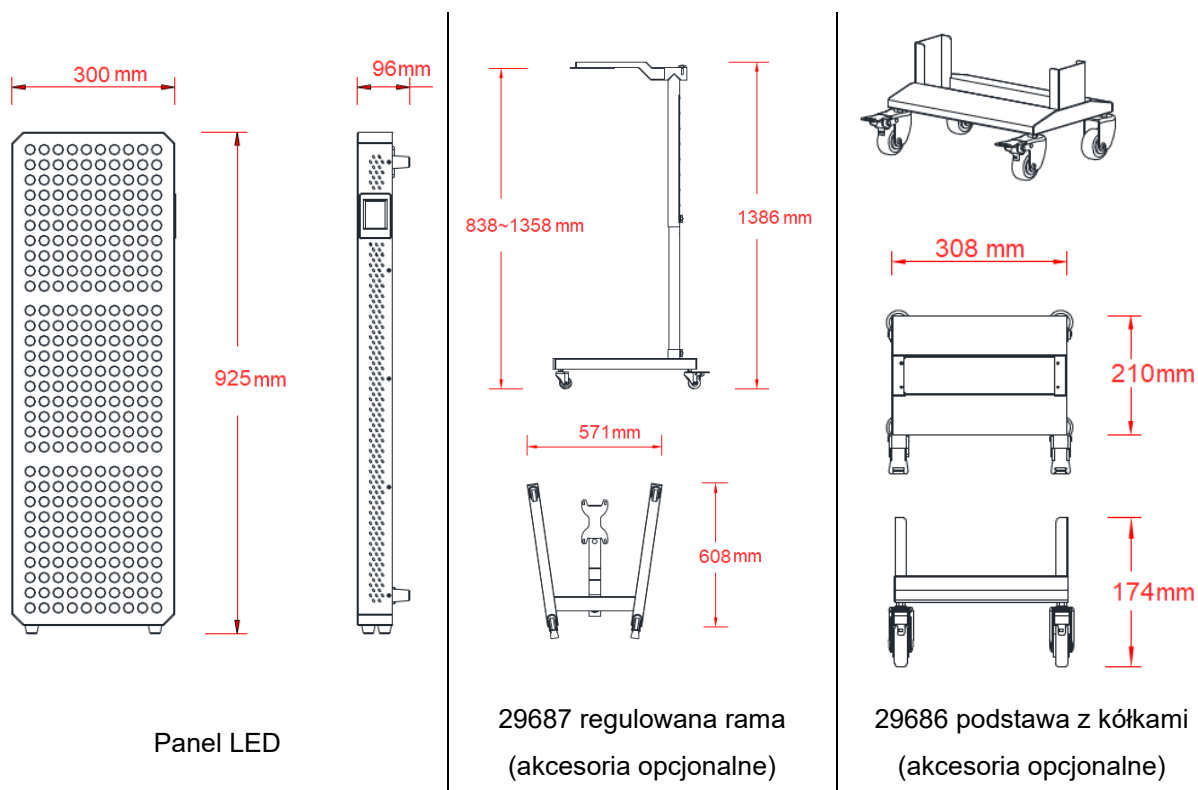

PANEL STEROWANIA

Diagram of the control panel with numbered callouts: 1. Muscle recover, 2. Joint pain relief, 3. Boost testosterone, 4. Sleep improvement, 5. Weight loss and keep fit, 6. Skin care, 7. Timer display (02:53), 8. EN button, 9. Timer + button, 10. Timer - button, 11. Intensity slider (50%), 12. Power button.	- Wybór trybu - Timer + - Timer - - Kontynuuj - Tryb pulsacyjny (wolny) - Tryb pulsacyjny (średni) - Tryb pulsacyjny (szybki) - Wybór języka - Aktualnie wybrany język - Ustawienie intensywności (wartość liczbowa) - Ustawienie intensywności (suwak) - Włącznik zasilania
---	---

Interfejs ustawiania wartości liczbowych






1. Naciśnij wartość numeryczną
2. Użyj klawiatury numerycznej, aby wybrać wartość z zakresu 10 - 100%. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
3. Wyświetla timer




Intensywność i czas użytkowania można regulować za pomocą kontrolera.

MONTAŻ

STAŁOWA LINKA

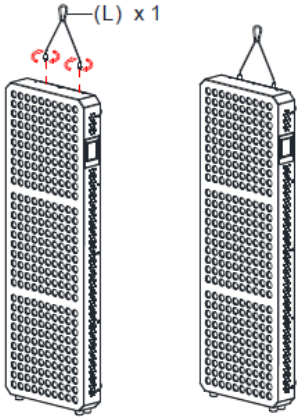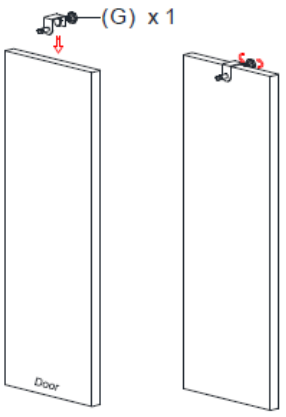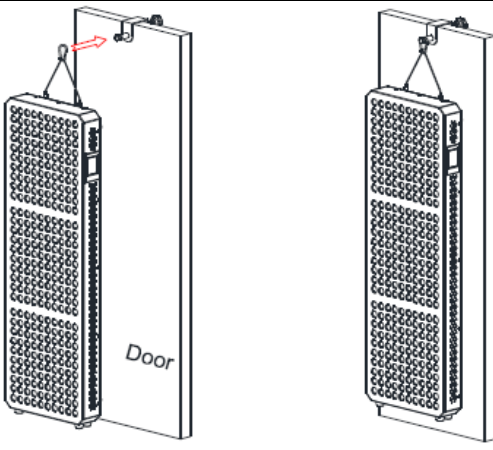
Przymocuj do panelu linkę stalową z karabińczykiem.	Przymocuj uchwyt do drzwi.
	
Zawieś panel na uchwycie.	
	

Jeśli użyjesz liny stalowej z krążkiem, będziesz mógł regulować wysokość.

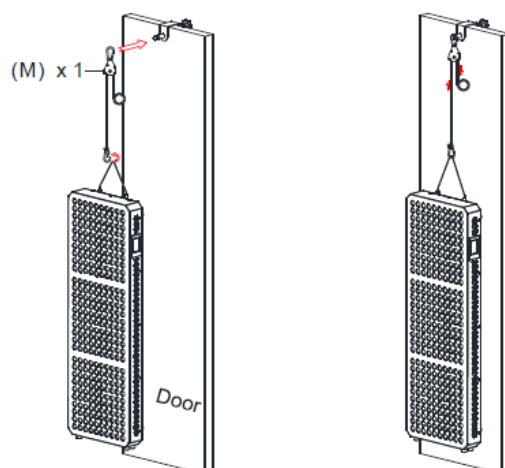


IN 29686 Stojak z kółkami do panelu LED inSPORTline Lustar (akcesoria opcjonalne)


Zamontuj koła na ramie.

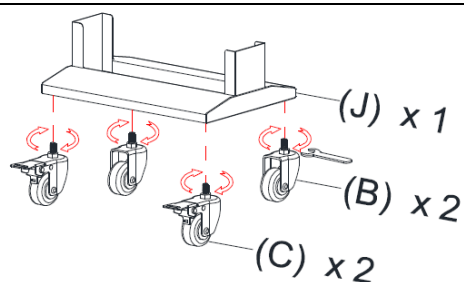




Wsuń panel do ramy.

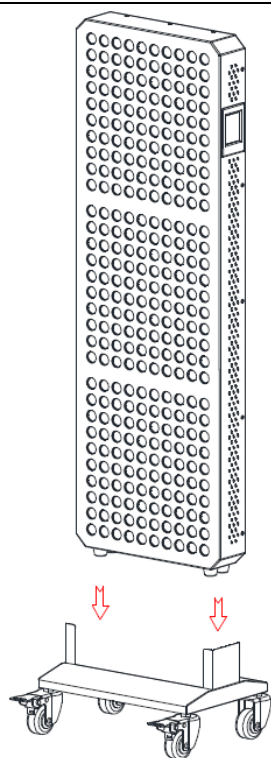


Montaż jest ukończony.

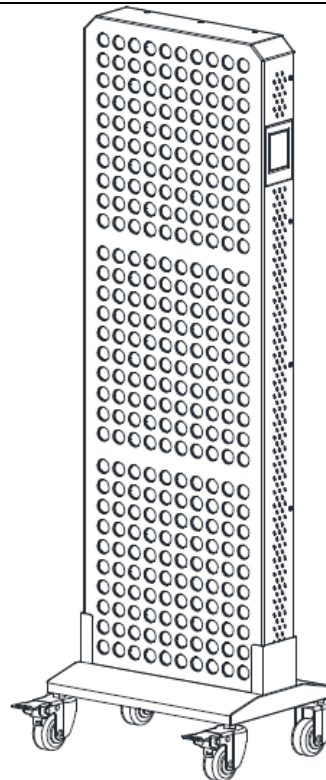


IN 29687 Regulowana rama z kółkami do panelu LED inSPORTline Lustar (akcesoria opcjonalne)

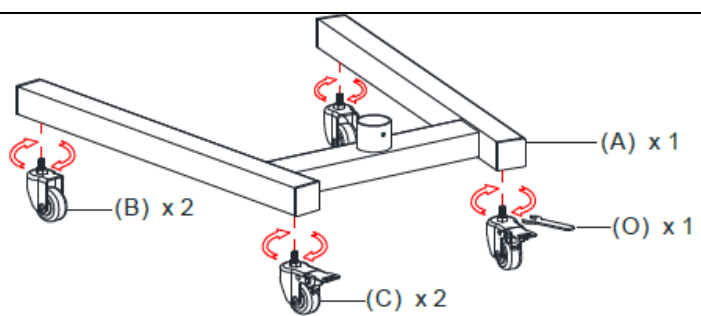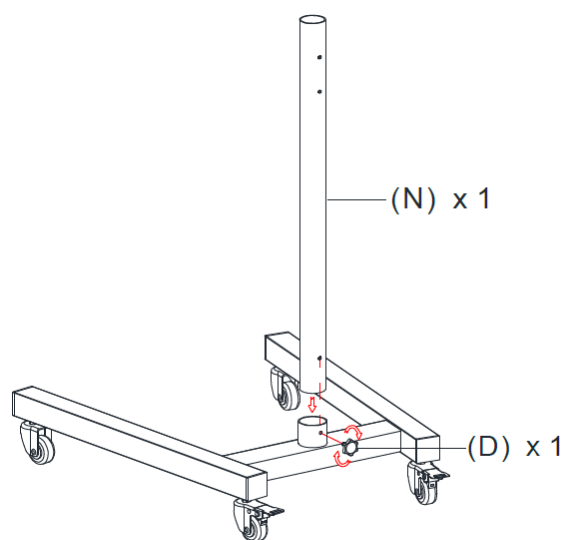
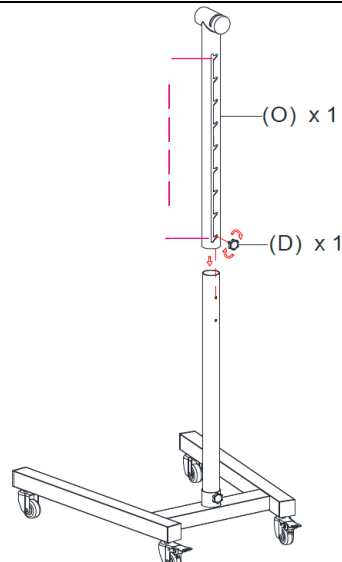
Przymocuj koła do ramy konstrukcji.	
	
Wsuń ramę do podstawy ramy i zabezpiecz ją za pomocą pokrętła.	Wsuń regulowaną ramę do ramy i ustaw wysokość. Zabezpiecz za pomocą pokrętła ręcznego.
	
Przymocuj ramę nośną do panelu za pomocą 4 pokręteł.	Wsuń ramę z panelem do ramy nośnej i zabezpiecz pokrętłem ręcznym.

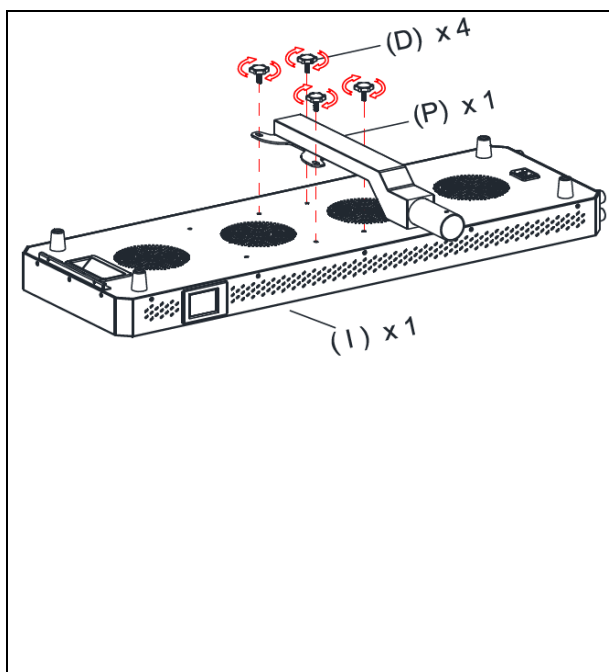

Wyreguluj wysokość i kąt panelu. Po każdej regulacji pamiętaj o dokręceniu pokręteł ręcznych.

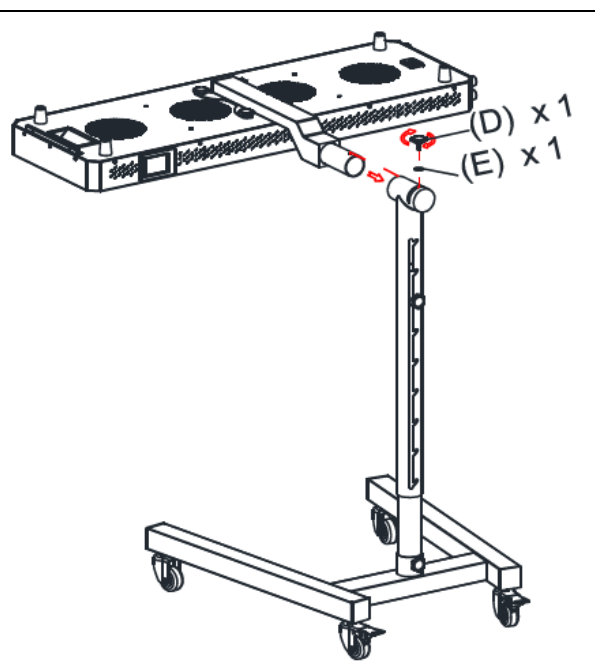


Podłącz przewód zasilający, a montaż będzie gotowy.

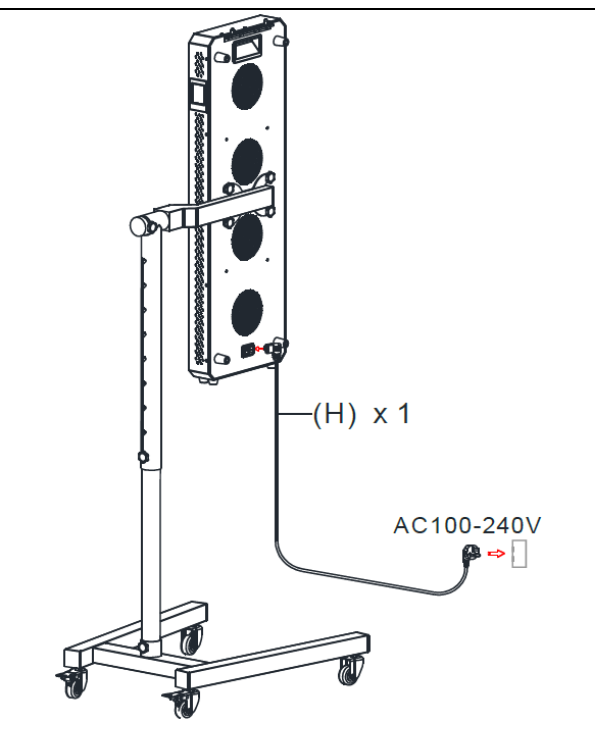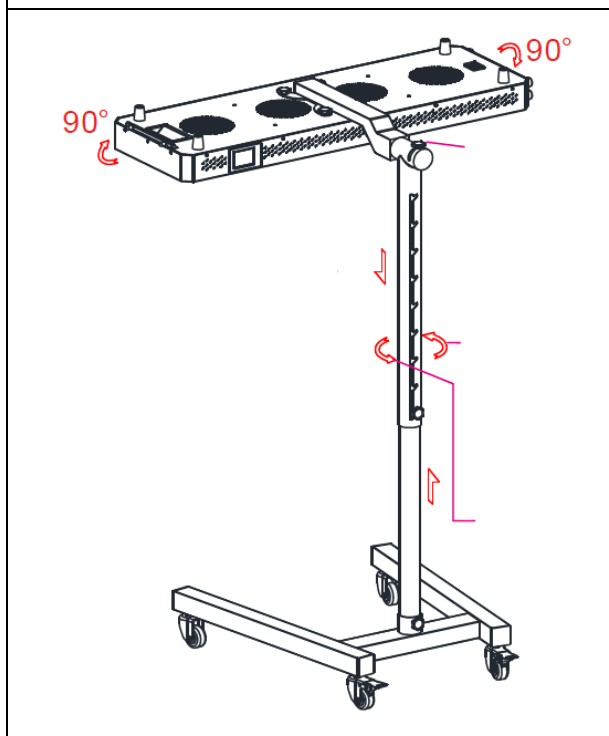

DŁUGOŚĆ FALI I PROGRAMY

Dystans	150 mm	300 mm	450 mm	600 mm	
Program	Długość fali				Uwaga:
Regeneracja mięśni	125	112.6	97.8	83.5	Dla intensywności 100%
Poprawa snu	46.2	38.1	32.5	28.5	
Ból stawów	91.4	75.5	65.1	22.6	

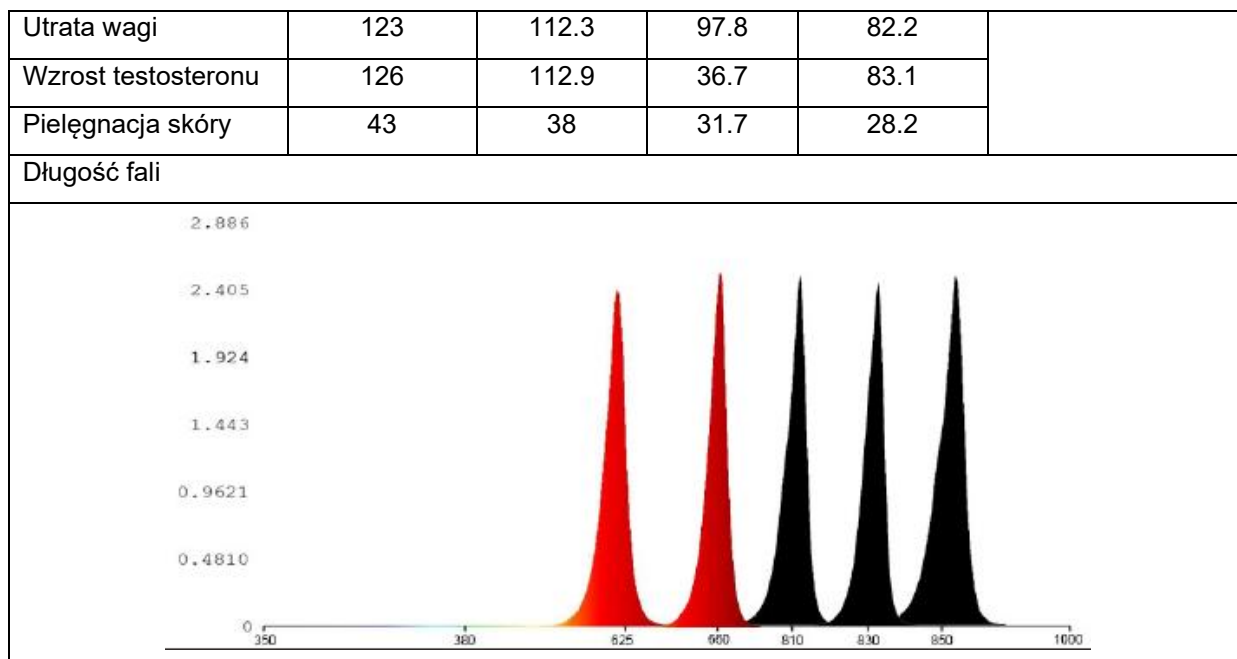

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnie, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu

technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

