




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 29688 Maska LED na podczerwień inSPORTline Radora

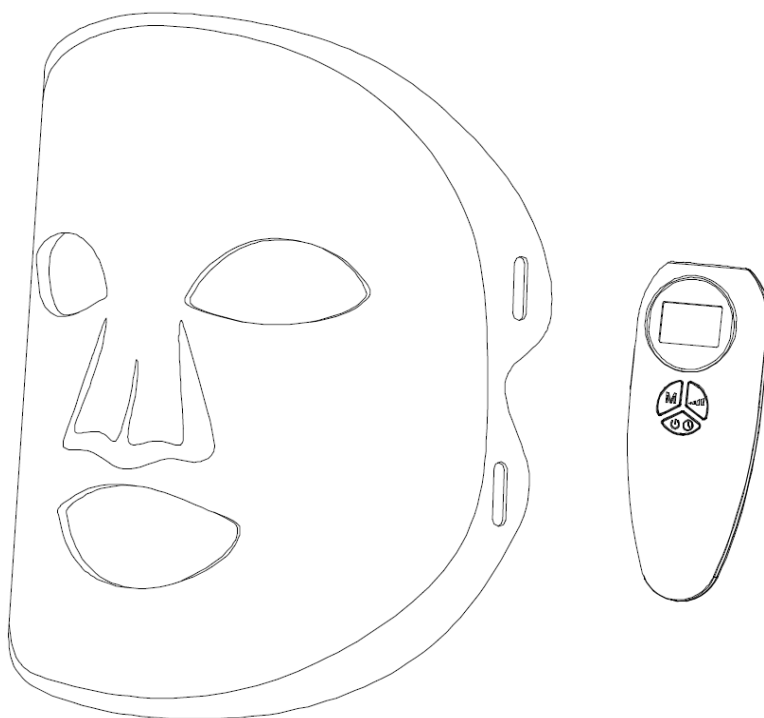

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
PARAMETRY	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4
KONTROLER	4
NAKŁADANIE MASKI	6
KONSERWACJA	7
OCHRONA ŚRODOWISKA	7
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	8

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do przyszłego użytku.
- Używaj wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie nadaje się dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, dzieci i niemowląt.
- Nie nadaje się dla osób cierpiących na nadwrażliwość na światło lub poddawanych zabiegom dermatologicznym. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj, jeśli przyjmujesz leki zwiększające wrażliwość na światło.
- Podczas użytkowania należy nosić okulary ochronne, zalecamy zamknięcie oczu.
- W przypadku odczucia dyskomfortu należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Produkt nie jest wodoodporny, nie zanurzać w wodzie.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać produktu, który jest uszkodzony lub zużyty.
- Nie naprawiać, nie modyfikować ani nie demontować produktu samodzielnie.

PARAMETRY

Kontroler		Maska	
Ładowarka	5V/1A or 5V/2A	Moc	5W
Czas ładowania	4 hours	Długość fali	Czerwony: 630 nm
Liczba użyć	5x (time 30 min, L4 level)		Niebieski: 470 nm
Akumulator	3.7V 2500 mAh		Żółty: 590 nm
Moc wyjściowa	5V/2A		IR: 850 nm
Wymiary	123*50*31 mm	Wymiary	256*209*6 mm
Waga	95 g	Waga	200g
Temperatura pracy	0°C – 45°C	Temperatura pracy	0°C – 45°C
Temperatura przechowywania	-5°C – 55°C	Temperatura przechowywania	-5°C – 55°C
Wilgotność pracy	30% - 95%	Wilgotność pracy	30% - 95%
Wilgotność przechowywania	20% - 85%	Wilgotność przechowywania	20% - 85%

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

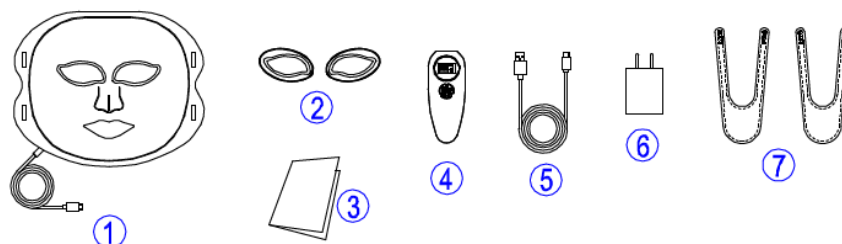

1. Maska LED	5. Kabel ładowający
2. Okulary ochronne	6. Adapter ładowający (opcjonalnie)
3. Instrukcja	7. Paski na rzepy
4. Kontroler	

KONTROLER

	1. Port wyjściowy / ładowanie
	2. Timer
	3. Timer odliczający
	4. Symbol czasu
	5. Pojemność baterii
	6. Intensywność
	7. Tryb
	8. Dynamiczny wyświetlacz
	9. Wyświetlacz LCD
	10. Przyciski sterujące
	11. Wybór trybu
	12. Ustaw intensywność
	13. Przycisk zasilania / timer

Przyciski



Włącznik zasilania / timer

Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć sterownik. Naciśnij, aby ustawić timer:

30 min / 25 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min.



Tryb

Naciśnij, aby przełączyć się na jeden z sześciu trybów.



Intensywność

Naciśnij, aby ustawić jeden z czterech poziomów intensywności..

Ikony

Bateria

	25% pojemności baterii
	50% pojemności baterii
	75% pojemności baterii
	100% pojemności baterii

Intensywność

	L1 – najniższa intensywność
	L2
	L3
	L4 – najwyższa intensywność

Tryb

Wyświetlanie wybranego trybu.

Timer

Aby wyświetlić ustawiony timer:

30*	30 min
25*	25 min

STARTUP

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  na kontrolerze, aby uruchomić kontroler.

Ustawienia domyślne to: 30 min, intensywność L4, tryb 1. Aby wyświetlić ustawiony timer.

Aby ustawić czas, naciśnij przycisk włączania/wyłączania , aby ustawić czas użytkowania. Czas zostanie ustawiony po 3 sekundach bezczynności.

To set the mode, press the button to set the mode . You can choose one of six modes.

Aby ustawić tryb, naciśnij przycisk . Możesz wybrać jeden z sześciu trybów.

Sterownik posiada zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem. Należy stale kontrolować napięcie akumulatora. Jeśli spadnie poniżej 3 V, symbol akumulatora będzie migać przez 3 sekundy, a następnie zgaśnie.

Sterownik posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Podczas ładowania wyświetlany jest symbol CH. Akumulator będzie ładowany do momentu osiągnięcia napięcia 4,2 V. Następnie ładowanie zostanie zatrzymane. Po naładowaniu akumulatora wyświetlany jest znak FU.

Uwaga:

- Nie ładuj kontrolera podczas użytkowania.
- Przed ładowaniem wyłącz kontroler.
- Po długim okresie przechowywania kontroler może być całkowicie rozładowany. Jeśli nie uruchamia się, należy go naładować.


TRYBY

Tryb 1	R	Czerwony	Zwiększony przepływ krwi i produkcja kolagenu. Pomaga w naprawie tkanek (wymianie starych komórek skóry na nowe) i zmniejszeniu porów.
Tryb 2	B	Niebieski	Działa łagodząco, przeciwzapalnie, niszczy bakterie skóry
Tryb 3	Y	Żółty	Energetyzuje skórę, pomaga zmniejszyć zmarszczki, wyrównać kolor pigmentu i wygładzić skórę
Tryb 4	R+IR	Czerwony + światło podczerwone	Wspomaga regenerację komórek, przyspiesza metabolizm, rozbija podskórny cellulit, zwęża pory, ujędźnia skórę i zwiększa jej elastyczność.
Tryb 5	R+Y+IR	Czerwony + żółty + światło podczerwone	Rozbija cellulit, rozjaśnia plamy i piegi, poprawia krążenie krwi i limfy.
Tryb 6	R+B+IR	Czerwony + niebieski + światło podczerwone	Łagodzi stany zapalne skóry i zmniejsza widoczność blizn, wspomaga regenerację komórek, poprawia krążenie limfy i delikatnie oczyszcza skórę.

NAKŁADANIE MASKI

Test wrażliwości skóry

1. Umieść maskę na wewnętrznej stronie ramienia.
2. Podłącz maskę do kontrolera i uruchom program na 10 minut.
3. Jeśli poczujesz ciepło lub dyskomfort, natychmiast przerwij działanie urządzenia.
4. **Odczekaj 6 godzin po zakończeniu testu. Jeśli pojawi się zaczerwienienie lub swędzenie, nie używaj produktu. Test wrażliwości skóry.**

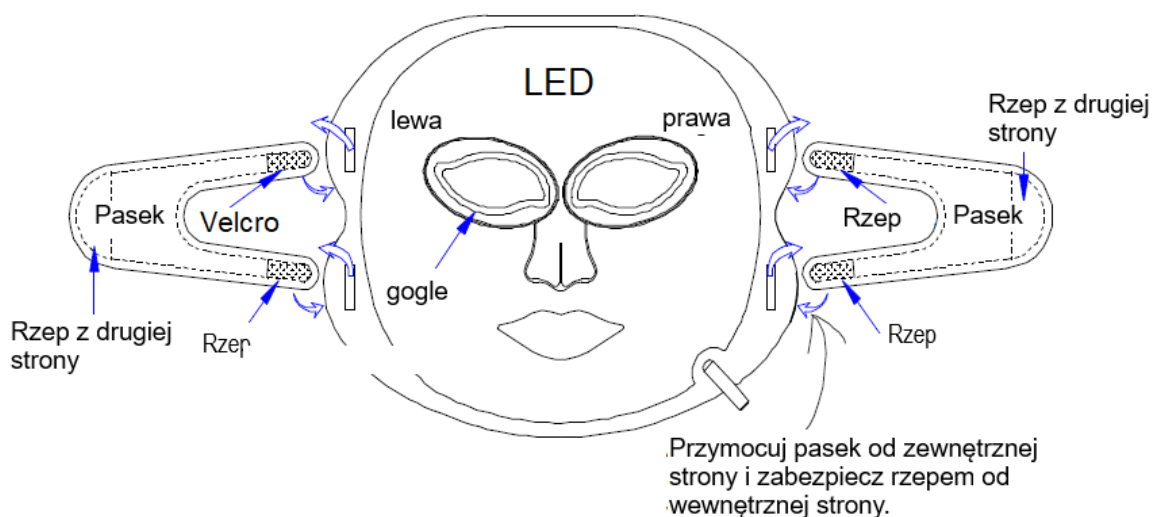

Krok 1

Przygotowanie przed użyciem



Oczyść skórę z makijażu i innych produktów kosmetycznych.
Splucz oczyszczoną skórę wodą i osusz ją.

Krok 2

Przygotowanie maski i zakładanie maski



Włóż okulary ochronne do otworów na oczy w masce.
Założ maskę na twarz i zaciśnij paski z rzepami.
Podłącz maskę do jednego z wyjść kontrolera. Ustaw timer, tryb i intensywność.
Po użyciu może wystąpić zaczerwienienie utrzymujące się przez 5–10 minut.

Krok 3

Oczyść skórę wodą.



Oczyść skórę wodą i nałóż produkty kosmetyczne, aby ją chronić.

KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz produkt.
- Maskę można czyścić wilgotną ściereczką.
- Widoczne zabrudzenia można usunąć łagodnym detergentem. Do dezynfekcji można użyć 70% roztworu alkoholu izopropylowego. Nałóż roztwór na maskę i pozostaw na 1 minutę. Następnie wyczyść i powtórz procedurę 3 razy. Nigdy nie zanurzaj maski w płynie, zawsze czyść ją wyłącznie wilgotną ściereczką.
- Okulary należy czyścić w taki sam sposób jak maskę.
- Po wyczyszczeniu maskę należy wysuszyć i przechowywać w opakowaniu. Po wyczyszczeniu maska nie powinna wykazywać śladów zabrudzeń ani wilgoci.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

