



INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

IN 30017 Spodenki do masażu kompresyjnego inSPORTline Complift





SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4
WYMIARY PRODUKTU	4
UŻYTKOWANIE	4
PODŁĄCZENIE SPRĘŻARKI	5
STEROWANIE	6
RODZAJE MASAŻY	7
CZYSZCZENIE	7
PRZECHOWYWANIE	7
FAQ (NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA)	8
OCHRONA ŚRODOWISKA	8
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	9


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do przyszłego użytku.
- Długotrwałe ciągłe użytkowanie może powodować bóle mięśni. Dostosuj czas i intensywność użytkowania do reakcji swojego organizmu.
- Chroń przed uderzeniami, upadkami, rozdarciami i podobnymi uszkodzeniami fizycznymi. Trzymaj z dala od ognia, źródeł ciepła i płomieni.
- Chroń przed wodą i wilgocią. Przechowuj w suchym, zacienionym i czystym miejscu. Nie przechowuj w pobliżu źródeł ciepła lub substancji chemicznych.
- Nie stój ani nie wykonuj innych czynności wymagających wysiłku fizycznego podczas użytkowania.
- Ładuj wyłącznie za pomocą odpowiedniego kabla i adaptera.
- Nie ładuj bez nadzoru. Ładuj z dala od substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- Nie zakrywaj masażera podczas użytkowania.
- Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży ani osób przyjmujących leki, które mogą wpływać na ciśnienie, wrażliwość lub zdolność oceny sytuacji.
- Produkt nie jest przeznaczony dla osób cierpiących na: nadciśnienie, osteopenię, osteoporozę, cukrzycę, żylaki, nadwrażliwość skóry, wrażliwość na ucisk, niedawne urazy lub operacje, skoliozę lub deformacje kręgosłupa, osoby z chorobami serca lub wysokim ciśnieniem krwi.
- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, zwłaszcza jeśli cierpisz na następujące schorzenia lub należysz do jednej z wymienionych grup: wysypka skórna, otwarte rany, pęcherze, miejscowe zapalenie tkanek, siniaki; zakrzepica żył głębokich, zapalenie kości i szpiku; złamania lub zapalenie mięśni z kostnieniem; wysokie ciśnienie krwi; ostra lub ciężka choroba serca, wątroby lub nerek; schorzenia neurologiczne prowadzące do utraty lub zmiany czucia; zaburzenia krzepnięcia krwi; niedawna operacja lub uraz w miejscu stosowania; zaburzenia tkanki łącznej; przewlekła niewydolność żylna; ciężka skolioza lub deformacja kręgosłupa; pacjent ma rozrusznik serca, ICD lub przeżył zawał serca; pacjent przyjmuje leki rozrzedzające krew lub zmieniające wrażliwość; pacjent ma alergię na materiał produktu (nylon); pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią; pacjent cierpi na drętwienie; nowotwory lub guzy; epilepsja; kardiopatia.
- Nie używaj urządzenia na twarzy, szyi ani genitaliach. W przypadku odczucia bólu lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie masażera.
- Nie używaj podczas ładowania. Ładuj regularnie raz na dwa miesiące, gdy urządzenie nie jest używane.
- Nie pierz w pralce automatycznej.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Ładuj kompresor pod nadzorem i z dala od łatwopalnych lub wybuchowych substancji.
- Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą dołączonej ładowarki.
- Nie wyrzucać baterii do ognia ani nie pozostawiać jej w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie wyrzucać baterii do wody i chronić przed wilgocią.
- Nie naprawiać ani nie modyfikować urządzenia samodzielnie.
- W przypadku pojawienia się nieprzyjemnego zapachu lub wycieku płynu z baterii należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności i temperaturze.
- Przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie zastępuje opieki zdrowotnej ani medycznej.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

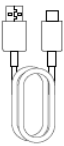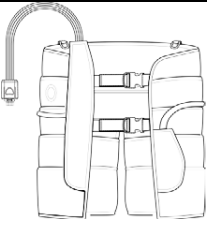				
Kabel do ładowania	Sprężarka	Spodenki kompresyjne	Torba transportowa	Instrukcja obsługi


WYMIARY PRODUKTU

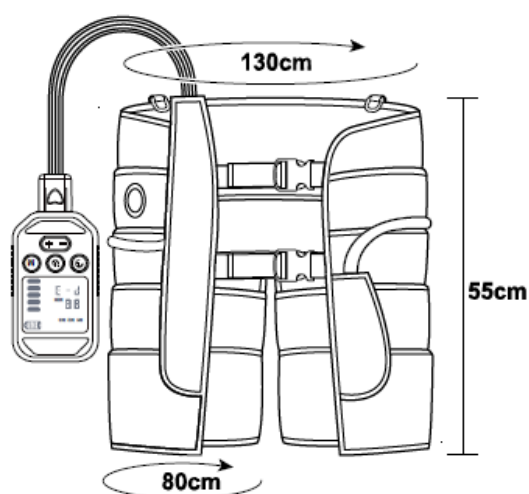

UŻYTKOWANIE


Podczas użytkowania zalecamy noszenie szortów lub cienkich spodni. Usiądź lub połóż się wygodnie. Nogi powinny być ustawione w linii z talią.

Otwórz klamry i załóż szorty. Szorty nie powinny być pomarszczone. Zabezpiecz paski za pomocą klamer.

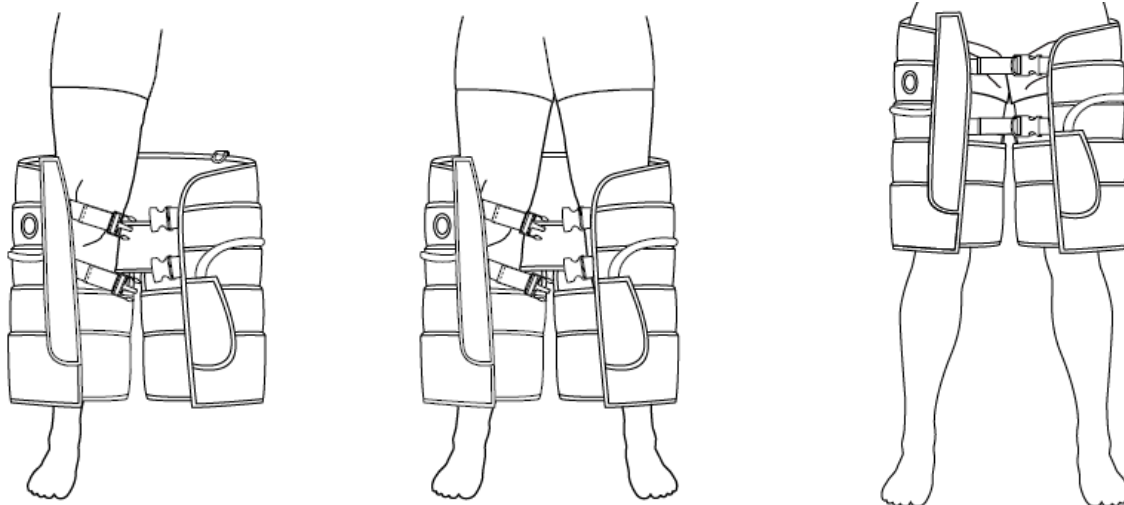


PODŁĄCZENIE SPRĘŻARKI

Podłącz rurki do pompowania do wylotu powietrza z agregatu sprężającego. Upewnij się, że złącze jest dobrze zablokkowane. Usłyszysz kliknięcie.

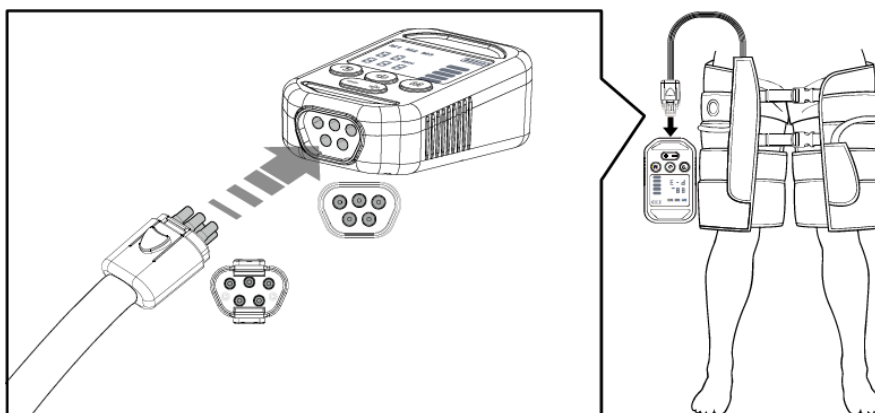


Urządzenie kompresyjne można przymocować do masażera za pomocą magnesu.


Ostrzeżenie: nie wkładaj rąk, palców ani innych przedmiotów między magnesy, ponieważ istnieje ryzyko przytrzaśnięcia.

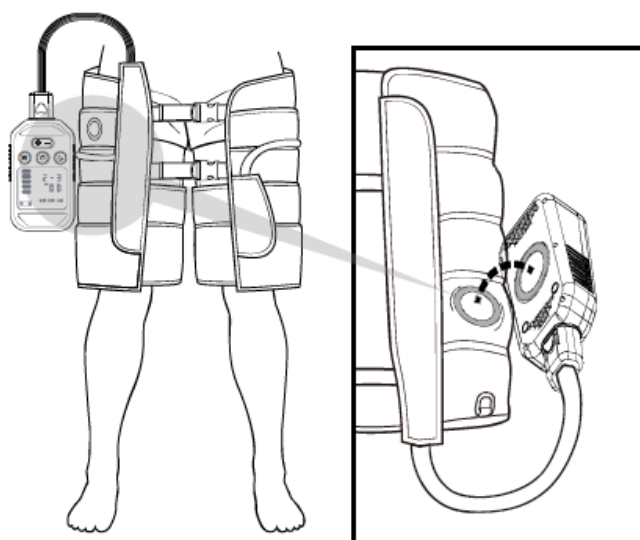


Przed rozpoczęciem upewnij się, że masażer jest zamknięty i zabezpieczony. Nie używaj, gdy klamra jest otwarta. Aby rozpocząć, naciśnij przycisk zasilania przez 1 sekundę.

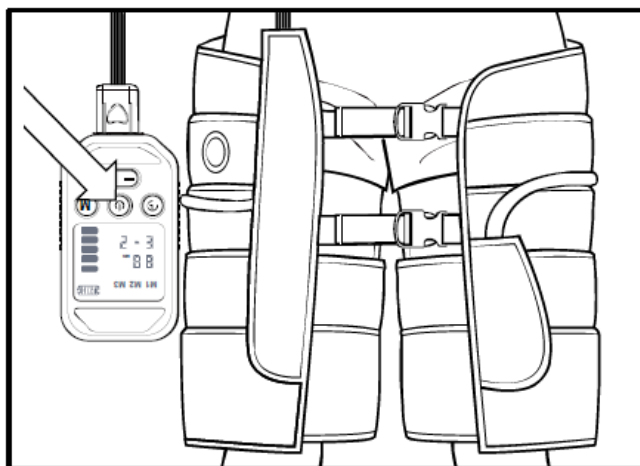

Aby odłączyć sprężarkę, naciśnij przyciski po obu stronach złącza.

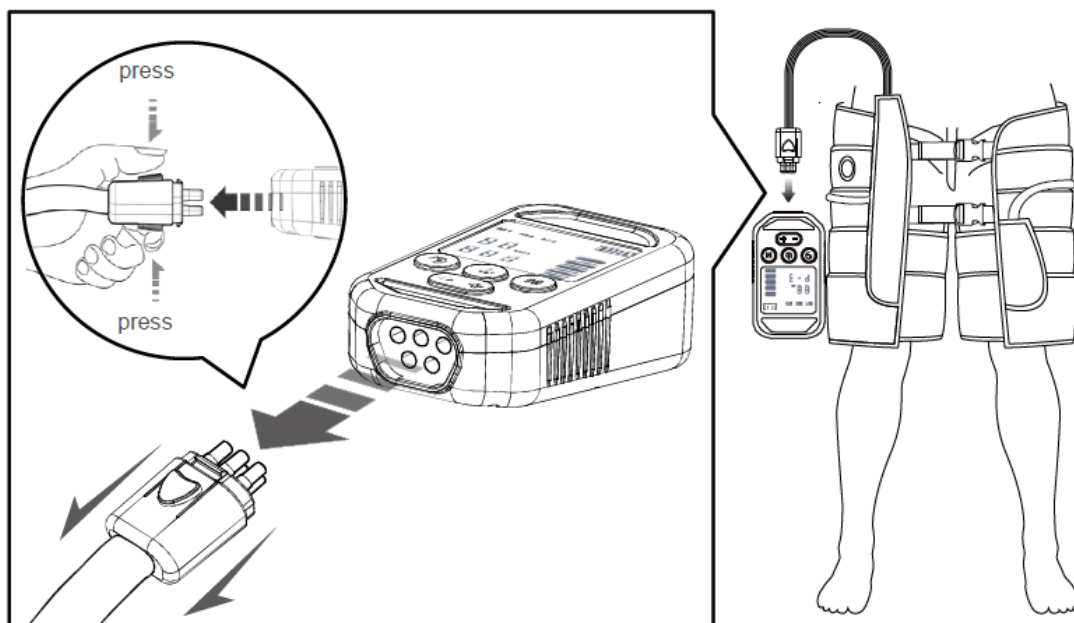

STEROWANIE

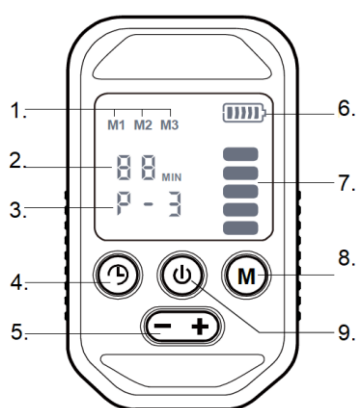

1. Aktualny tryb

2. Timer

3. Intensywność

4. Przycisk timera

5. Przycisk intensywności

6. Bateria

7. Aktualna pozycja kompresji

8. Przycisk trybu

9. Przycisk zasilania

Wskaźnik naładowania baterii pokazuje 5 segmentów stanu naładowania baterii. Jeśli wskaźnik miga, oznacza to, że bateria jest słaba. Podczas ładowania nie można używać urządzenia kompresującego.


PARAMETTRY

Napięcie ładowania: 7,4 V	Akcesoria: kabel ładujący USB-C
Pojemność akumulatora: 2500 mAh	

Funkcje przycisków

Włącznik		Przytrzymaj, aby uruchomić/zatrzymać kompresor.
Timer		Naciśnij, aby ustawić timer na 10, 20 lub 30 minut.
Tryb		Naciśnij, aby zmienić tryb na M1, M2, M3. Przytrzymaj, aby przełączyć się do trybu ręcznego, a następnie naciśnij przycisk, aby dostosować pozycję kompresji.
Intensywność		Naciśnij, aby dostosować intensywność P1 – P6. Naciśnij , aby zmniejszyć intensywność, naciśnij , aby ją zwiększyć.

RODZAJE MASAŻY

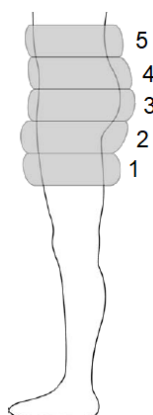

1. Masaż sekwencyjny: masaż odbywa się stopniowo od komory 1 do 5.
2. Masaż cykliczny: cykliczny masaż wybranych komór.
3. Masaż określonego punktu: ustawienie masażu z wybraną komorą. Przytrzymaj przycisk M, a następnie naciśnij, aby wybrać komorę.

TRYB RĘCZNY

Przytrzymaj przycisk M, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

W trybie ręcznym możesz wybrać masaż z określoną komorą 1–5 lub aktywować wszystkie komory, naciskając przycisk M.

Naciśnij , aby zmniejszyć intensywność, naciśnij , aby zwiększyć intensywność. P1 – P6.

Za pomocą przycisku timera można ustawić czas trwania cyklu: 10, 20, 30 minut.

W przypadku awarii lub awaryjnego wyłączenia można odłączyć nogawki spodni od urządzenia kompresyjnego.

CZYSZCZENIE


- Rozłóż szorty na płaskiej powierzchni. Do czyszczenia używaj środków dezynfekujących na bazie alkoholu (nie używaj środków na bazie oleju). Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Wyczyść zewnętrzne części miękką ściereczką.
- Przed ponownym użyciem spodnie należy dokładnie wysuszyć.

Uwaga: Nie zanurzaj masażera w wodzie ani nie myj go pod bieżącą wodą. Chroń przed działaniem agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników.

PRZECHOWYWANIE

Rozłóż spodenki na płaskiej, czystej powierzchni, panelem sterowania skierowanym do góry. Upewnij się, że spodenki są całkowicie opróżnione. Złóż prawą nogawkę na lewą. Złóż dół spodenek do góry. Nie ściskaj spodenek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów powietrznych i ich połączeń.

Przed przechowywaniem upewnij się, że spodenki są czyste i suche. Przechowuj w suchym i zacienionym miejscu. Nie pozostawiaj w miejscach, w których temperatura przekracza 45°C.

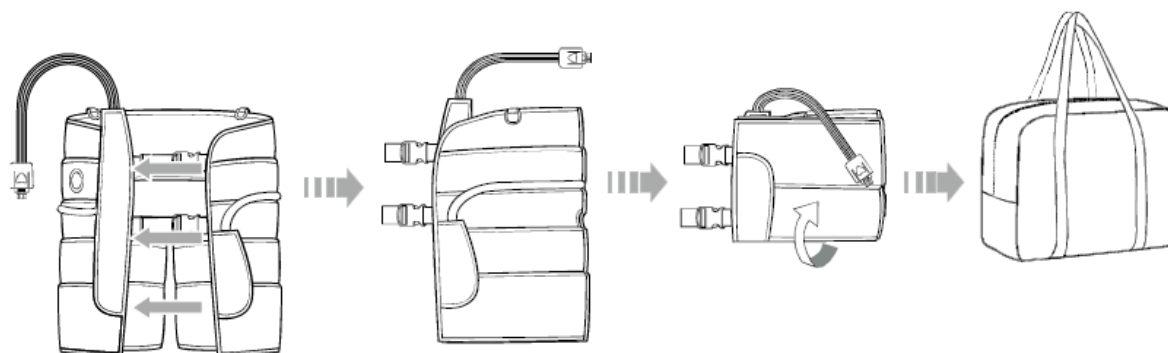

FAQ (NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA)

Nie można uruchomić.

Sprawdź poziom naładowania baterii. Upewnij się, że przycisk zasilania został naciśnięty prawidłowo.

Podczas ładowania wyświetlacz nie pokazuje stanu naładowania.

Upewnij się, że złącze jest prawidłowo podłączone.

Nagłe wyłączenie podczas użytkowania.

Sprawdź poziom naładowania baterii. Wyłączenie w celu ochrony przed przegrzaniem.

KODY BŁĘDÓW



E-1 – Bardzo niski poziom naładowania baterii

Naładuj akumulator jak najszybciej.



E-2 – wyciek powietrza

Sprawdź stan przewodów powietrznych, ich połączeń i wszystkich złączy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

