



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 30131 Masażer stóp inSPORTline Lunari

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-inSPORTline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do przyszłego użytku.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób: cierpiących na nowotwory, osteoporozę, stany zapalne, zakrzepicę żylną, posiadających metalowe implanty oraz kobiet w ciąży. Przed użyciem zawsze skonsultuj się z lekarzem.
- Nie masuj kości.
- Miejsce masażu powinno być suche i czyste. Podczas używania zalecamy noszenie skarpet.
- Duża prędkość i nacisk mogą powodować ból i dyskomfort.
- Częste stosowanie w jednym miejscu i przy dużych prędkościach może powodować otarcia, ból i podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Trzymaj palce, kończyny, włosy i inne części ciała z dala od ruchomych części urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi.
- Nie modyfikuj ani nie reguluj urządzenia, nie naprawiaj go samodzielnie.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nie nadaje się dla dzieci i osób z ograniczoną sprawnością ruchową, umysłową lub fizyczną.
- Podczas użytkowania powierzchnia może się nagrzewać, nie jest odpowiednia dla osób wrażliwych na ciepło lub niezdolnych do odczuwania ciepła.
- Upewnij się, że ruch głowic masujących nie jest ograniczony.
- Urządzenie nie jest wodoodporne, należy chronić je przed wodą.
- Długotrwała ciągła praca może spowodować nagrzanie silnika. Zawsze pozostawiaj silnik do ostygnięcia między kolejnymi użyciami.
- Chronić przed uszkodzeniami fizycznymi, upadkami i uderzeniami.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrzeżenie: Podczas użytkowania należy siedzieć. Nie wolno stać na urządzeniu.
- Ostrzeżenie: Nie zastępuje opieki medycznej ani zdrowotnej.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.
- Trzymaj z dala od ognia i źródeł ciepła.
- Przechowuj w czystym, suchym i zacienionym miejscu.
- Używaj w temperaturze pokojowej.

PARAMETRY

Wymiary: 34,80 x 32,51 x 17,27 cm	Moc: 24 W
Waga: 3,10 kg	Timer: 15 min
Napięcie wyjściowe: 12 V DC 2,0 A	Napięcie wejściowe: AC 100-240 V ~50/60 Hz

FUNKCJE

- Shiatsu, rolki masujące, masaż uciskowy, funkcja podgrzewania
- 3 poziomy prędkości masażu, 3 poziomy intensywności ucisku
- 2 poziomy podgrzewania
- Timer: 15 min.


UŻYTKOWANIE

Położ masażer na płaskiej powierzchni.

Podłącz zasilacz do masażera.

Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Włącz panel sterowania i ustaw żądany rodzaj masażu.

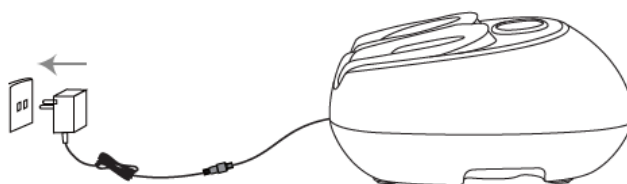

OSTRZEŻENIE:


Przed podłączeniem upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony.

Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami.

Nie ciągnij za zasilacz.

Nie używaj w wilgotnym środowisku.

KONSOLA

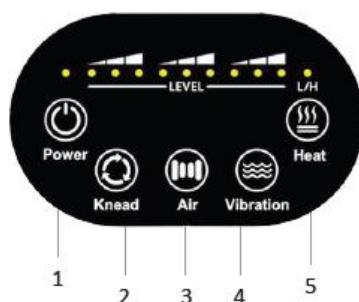

1. Przycisk zasilania: Naciśnij, aby uruchomić/zatrzymać masażer. Domyślny masaż rozpoczyna się automatycznie.

2. Rolki masujące/ugniatanie: domyślna prędkość: niska. Naciśnij przycisk, aby dostosować prędkość funkcji.

3. Kompresja: domyślna intensywność: niska. Naciśnij przycisk, aby dostosować intensywność.

4. Wibracja: domyślna intensywność: niska. Naciśnij przycisk, aby dostosować intensywność.

5. Ogrzewanie: domyślna wartość: niska. Naciśnij przycisk, aby dostosować intensywność ogrzewania lub wyłączyć funkcję. Poziom niski (niebieska dioda): 45–50°C, Poziom wysoki (czerwona dioda): 50–55°C.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Odłącz od zasilania przed czyszczeniem.
- Do czyszczenia panelu sterowania i powierzchni urządzenia użyj suchej ściereczki.
- Nie używaj wody ani agresywnych środków czyszczących do czyszczenia.
- Zdejmowane pokrowce można prać w pralce lub ręcznie. Przed użyciem należy pozostawić pokrowce do wyschnięcia.
- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu..

FAQ (NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA)

1. Nagłe wyłączenie.

Po 15 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie. Naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

2. Masaż się nie rozpoczyna.

Po 15 minutach pracy odczekaj 15 minut, aż urządzenie ostygnie.

Sprawdź podłączenie zasilacza.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy

sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

