




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 30634 Pas biodrowy ze światłem podczerwonym inSPORTline Ilyros

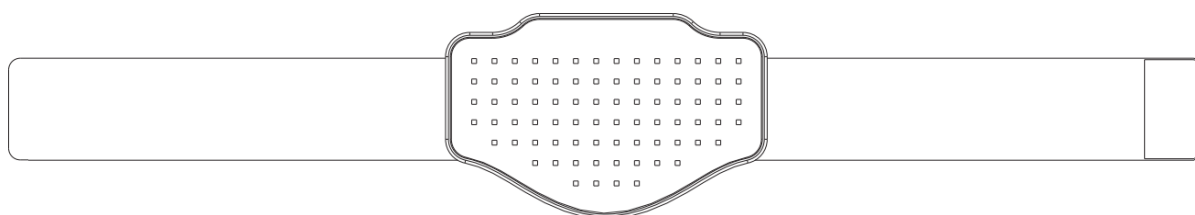

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i zaleceń. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować poważne obrażenia ciała. Nie należy dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji produktu.
- Nie należy używać podczas ładowania.
- W zależności od ustawienia intensywności skóra może zaczerwienić się na 1-2 godziny.
- Przechowuj w suchym, zacienionym miejscu w temperaturze pokojowej.
- Przed pierwszym użyciem naładuj produkt za pomocą kabla micro-USB.
- Nie używaj podczas snu lub gdy jesteś zmęczony.
- Nie używaj pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które zaburzają zdolność oceny sytuacji.
- Nie używaj, jeśli masz problemy ze skórą.
- Chroń produkt przed uszkodzeniami fizycznymi i upadkami.
- Chroń części elektryczne przed wodą. Nie obsługuj ani nie podłączaj produktu mokrymi/wilgotnymi rękami.
- Regularnie sprawdzaj pas i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń i zużycia. Nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu.
- Trzymaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- Ten produkt nie jest zabawką. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie nadaje się dla dzieci.
- Nie umieszczaj na otwartych ranach lub obszarach objętych urazami.
- Nie ładuj bez nadzoru. Używaj tylko dostarczonego kabla ładującego.
- Nie używaj nieprzerwanie przez ponad 30 minut.
- Jeśli cierpisz na następujące schorzenia, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem: nowotwory, stany zapalne, wrażliwość na ciepło, wrażliwość na światło, otwarte rany, krwawienia, otarcia skóry, obrzęki, zaczerwienienia skóry itp.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś w ciąży.
- Nie używaj, jeśli bateria lub kabel ładujący są uszkodzone.
- Używaj i ładuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od gazów wybuchowych.
- Nie przykrywaj produktu podczas użytkowania.
- Nie patrz bezpośrednio na światła.
- Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób z implantami elektronicznymi.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Produkt nie jest przeznaczony do zastąpienia opieki medycznej lub terapii.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pas na podczerwień, pilot zdalnego sterowania, kabel ładujący, instrukcja obsługi

UŻYTKOWANIE

Przed pierwszym użyciem sprawdź wrażliwość skóry na światło. Włącz pas i umieść diody LED na ramieniu lub udzie na 3 minuty. Jeśli skóra zaczerwieni się i zaczerwienienie utrzymuje się przez ponad 2 godziny, skonsultuj się z lekarzem i nie używaj produktu ponownie bez konsultacji z lekarzem.

Przez pierwsze trzy dni używaj pasa przez 5 minut, a następnie co trzy dni możesz wydłużyć czas użytkowania o 5 minut.


Przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby włączyć/wyłączyć pas.

Użyj przycisku timera, aby ustawić czas użytkowania na 10/20/30 minut.

Użyj przycisku intensywności, aby ustawić jeden z trzech poziomów intensywności:


1. Światło czerwone i 80% światła podczerwonego
2. Światło czerwone i 90% światła podczerwonego
3. Światło czerwone i 100% światła podczerwonego

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

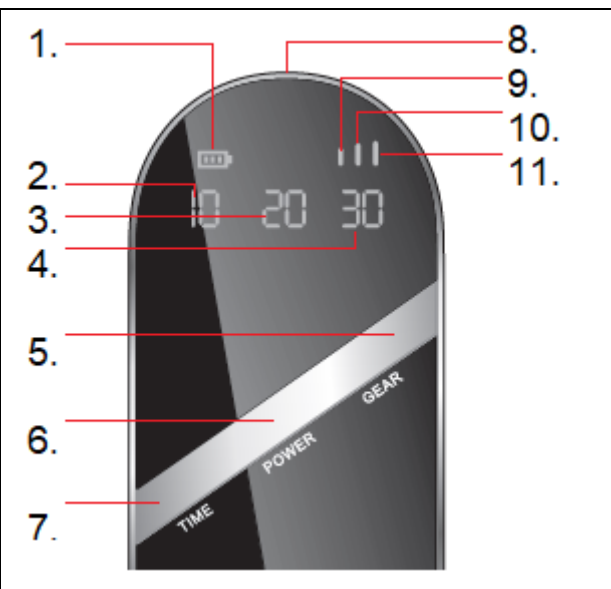	1. Wskaźnik naładowania baterii
	2. Timer 10 min
	3. Timer 20 min
	4. Timer 30 min
	5. Przycisk intensywności
	6. Przycisk zasilania
	7. Przycisk timera
	8. Port/wyjście ładowania
	9. Poziom intensywności 1
	10. Poziom intensywności 2
	11. Poziom intensywności 3

Przyciski

Power	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć
Time	Ustawienie timera
Gear	Ustawienie intensywności

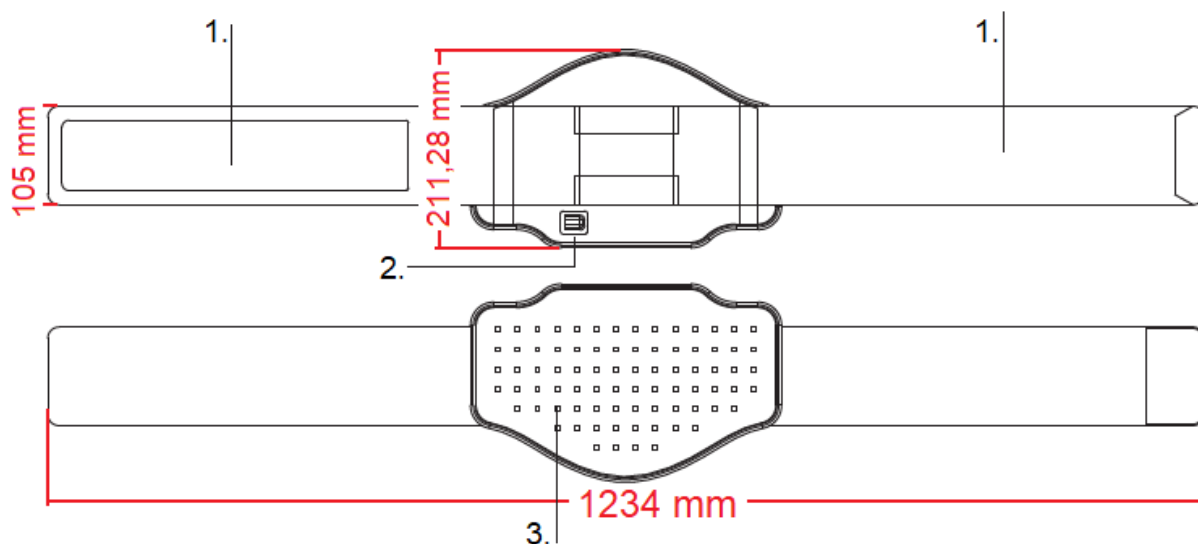

1.	Rzep
2.	Złącze
3.	Diody LED

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Przed czyszczeniem upewnij się, że panel LED jest zimny. Następnie możesz wyczyścić panel ściereczką zwilżoną środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Pozostaw panel do wyschnięcia przed ponownym użyciem.

Nie prać w pralce. Unikać nadmiernego składania paska.

Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu. Nie kłaść ciężkich przedmiotów na pasku.

PARAMETRY

Długość fali:	Światło czerwone: 630 – 660 nm Światło podczerwone: 850 – 940 nm
Materiał:	Tkanina Lycra
Waga:	167,4 g
Liczba diod LED	80 diod LED
Pojemność baterii	1500 mAh
Wymiary całkowite:	1235 x 332 mm
Długość paska	1235 mm
Powierzchnia diod LED	332 x 211 mm
Prąd ładowania	1 A
Moc	Ok. 4,5 W
Timer	10 min / 20 min / 30 min

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

