



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 31394 Masażer szyi EMS inSPORTline Elixon

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
- Elektrody mogą powodować podrażnienia skóry lub zwiększać jej wrażliwość z powodu stymulacji elektrycznej lub użycia żelu przewodzącego. Jeśli tak się stanie, natychmiast przestań używać urządzenia i zgłoś się do lekarza.
- Osoby z chorobami serca lub padaczką lub podejrzeniem tych chorób nie mogą używać tego produktu.
- Nie należy umieszczać elektrod na otwartych ranach, wysypkach, opuchniętych obszarach, zaczerwienionej skórze, obszarach dotkniętych infekcjami, stanami zapalnymi i innymi urazami skóry.
- Nie należy umieszczać elektrod na obszarach z metalowymi implantami.
- Nie należy używać podczas snu.
- W przypadku powikłań podczas menstruacji lub po porodzie należy skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania.
- Nie należy używać po niedawnej operacji.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Nie używaj ani nie umieszczaj urządzenia w miejscach, w których znajdują się aparaty MRI, CT, urządzenia emitujące fale elektromagnetyczne lub dźwiękowe, wykrywacze metalu lub podobne urządzenia.
- Nie modyfikuj, nie przerabiaj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Nie używaj produktu, jeśli korzystasz z rozrusznika serca lub innego elektronicznego urządzenia medycznego.
- Nie używaj produktu w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki, prysznice, baseny itp.
- Nie używaj elektrod podczas kąpieli.
- Nie używaj elektrod w następujących przypadkach: ciąża lub podejrzenie ciąży.
- Nie umieszczaj elektrod na biżuterii, kolczykach lub innych metalowych przedmiotach umieszczonych na ciele.
- Nie używaj w pomieszczeniach, w których znajdują się łatwopalne lub wybuchowe gazy.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli cierpisz na choroby serca lub masz zwiększoną wrażliwość na arytmie serca.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli przebywasz w ośrodku rehabilitacyjnym.

- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, nawet jeśli cierpisz na chorobę lub uraz nie wymieniony w instrukcji.
- W przypadku wystąpienia nudności, bólu głowy lub utraty przytomności należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby zdrowe. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych o zdrowej skórze.
- Zaczerwienienie skóry po użyciu jest zjawiskiem normalnym, jeśli ustępuje w ciągu 30 minut od użycia. Jeśli zaczerwienienie nie ustąpi w ciągu 30 minut, nie należy stosować elektrod na tym obszarze, dopóki zaczerwienienie nie ustąpi.
- Jeśli po użyciu wystąpi długotrwałe podrażnienie skóry, należy zgłosić się do lekarza.
- Należy regularnie sprawdzać obszar stosowania.
- Urządzenie nie zastępuje profesjonalnej opieki medycznej.
- Nadaje się do użytku domowego.
- Timer: 15 min.




CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


	1. Przycisk +
	2. Intensywność EMS
	3. Przycisk zasilania / przełącznik trybu
	4. Przycisk -
	5. Podgrzewane elektrody EMS
	6. Głowica masująca
	7. Magnesy
	8. Port ładowania USB-C
	9. Kabel ładujący USB-C

ŁADOWANIE

- Podłącz kabel ładujący do urządzenia.
- Podłącz kabel ładujący do zasilacza (zalecamy zasilacz o mocy 5 V / 1 A lub większej).
- Dioda miga na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na zielony po naładowaniu urządzenia.

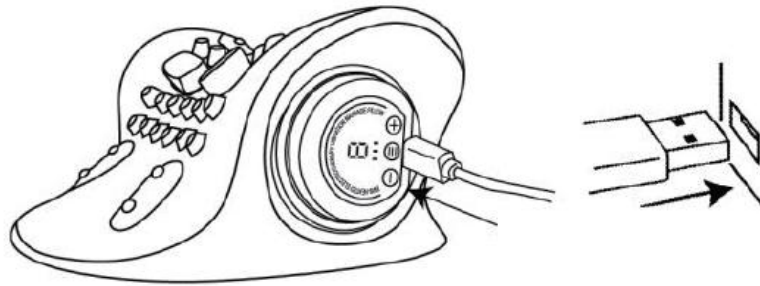


Po uruchomieniu urządzenia można nim sterować za pomocą pilota.

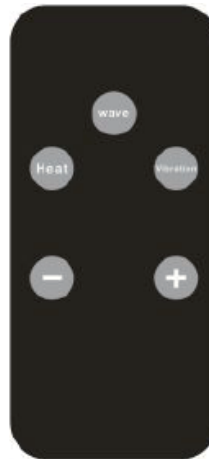

	1. Wyświetlacz numeryczny
	2. Przycisk +
	3. Poziom grzania
	4. EMD/Grzanie/Wibracje
	5. Włącznik zasilania
	6. Przycisk -

- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.
- Zaświeci się wskaźnik intensywności masażu EMS. Do wyboru jest 6 poziomów intensywności (0 wyłączonych). Aby uzyskać lepszą skuteczność masażu EMS, zwilż szyję lub elektrody letnią wodą.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby ustawić grzanie. Do wyboru są 3 poziomy intensywności. Uwaga: zawsze monitoruj reakcję organizmu na temperaturę, istnieje ryzyko oparzeń.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby ustawić wibracje. Do wyboru są 3 poziomy intensywności.
- Urządzenie wyłącza się automatycznie po 15 minutach pracy. Nie należy używać funkcji grzania w trybie ciągłym przez dłuższy czas.
- Wszystkie funkcje można używać razem lub oddzielnie.
- Urządzenie można używać niezależnie od położenia.

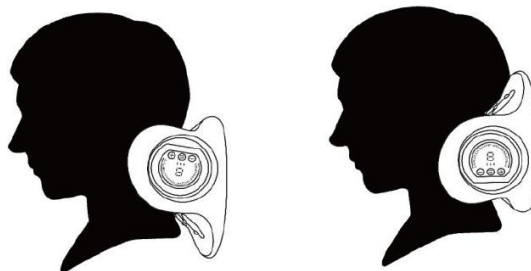

KONSERWACJA

Konserwacja elektrod EMS: Wyczyść miękką ściereczką zwilżoną roztworem letniej wody i neutralnego detergentu. Następnie wytrzyj do sucha suchą ściereczką.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie dopuszczaj do przedostania się wody do wnętrza urządzenia.

Do czyszczenia nie używaj agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków czyszczących na bazie alkoholu lub benzyny.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami

zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

