

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL


IN 31563 Pistolet do masażu na ciepło/zimno inSPORTline ChillFrost


inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do wglądu.
- Tylko dla dorosłych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Stosować wyłącznie na suchą skórę. Delikatnie przesuwając po skórze, maks. 60 sekund w jednym miejscu. Osoby o większej wrażliwości mogą użyć ręcznika lub ubrania, aby złagodzić masaż.
- Nie zakrywać wentylatorów.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Chronić przed uderzeniami i upadkami.
- Ładować wyłącznie za pomocą zasilacza 5V2A.
- Przed użyciem sprawdzić stan produktu.
- Nie naprawiać ani nie modyfikować produktu.
- Nie pozostawiać bez nadzoru. Zawsze wyłączać i przechowywać po użyciu. Nie ładować bez nadzoru.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- Nie używać nieprzerwanie dłużej niż 1 godzinę. Po tym czasie należy odczekać 30 minut, aż urządzenie ostygnie.
- Przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Odłączyć od ładowarki po naładowaniu akumulatora. Nie używać podczas ładowania.
- Nie stosować bez konsultacji z lekarzem w przypadku: ciąży, cukrzycy, rozrusznika serca, opieki pooperacyjnej, epilepsji lub migren, choroby lub przemieszczenia kręgow/kręgosłupa, niedawnej endoprotezoplastyki stawów, wszczepienia wkładki wewnątrzmacicznej, metalowych śrub lub płytek. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Czyścić wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć suchą ściereczką.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

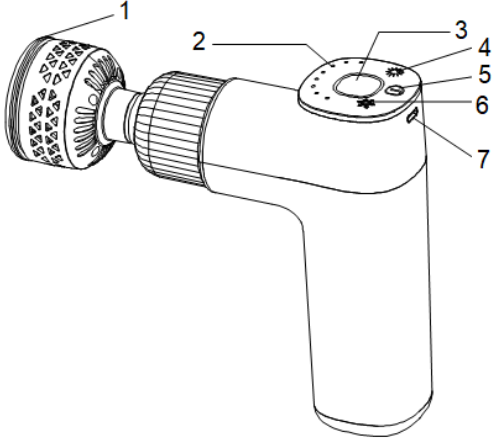	1.	Głowica grzewczo-chłodząca
	2.	Wyświetlacz intensywności i prędkości
	3.	Wyświetlacz grzania/chłodzenia
	4.	Przełącznik grzania
	5.	Włącznik/wyłącznik / regulacja prędkości
	6.	Przełącznik chłodzenia
	7.	Gniazdo ładowania

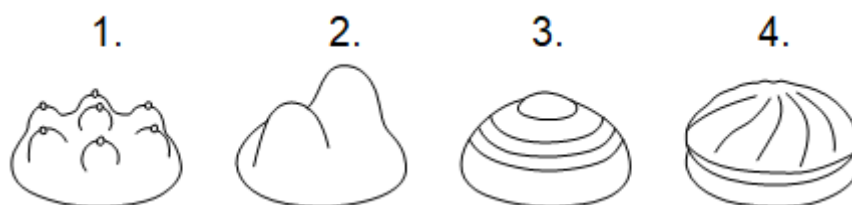

1. Głowica masująca punktowo: odpowiednia do masażu klatki piersiowej, dłoni, stóp, kończyn dolnych i bioder

2. Dwupunktowa głowica masująca: odpowiednia do masażu szyi, ramion, kończyn górnych i ścięgna Achillesa

3. Głowica masująca z ostrym zakończeniem: odpowiednia do głębokiego masażu kończyn

4. Głowica masująca powietrzem: odpowiednia do relaksującego masażu całego ciała lub wrażliwych części

STEROWANIE

Naciśnij i przytrzymaj krótko przycisk zasilania (❄️), aby wyświetlić aktualny poziom naładowania baterii. Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby rozpocząć.

Po uruchomieniu, prędkość jest ustawiona na 4 poziomy. Aby dostosować prędkość, naciśnij przycisk (⏮).

Pistolet masujący jest wyposażony w automatyczną regulację intensywności masażu w zależności od siły nacisku. Naciśnięcie głowicy zwiększa intensywność.

FUNKCJA OGRZEWANIA/CHŁODZENIA


Jeśli pistolet masujący jest włączony, naciśnij przyciski, aby uruchomić/wyłączyć chłodzenie (❄️) lub grzanie (☀️).

Jeśli głowica masująca jest wyłączona, przytrzymaj przyciski przez 1,5 sekundy, aby uruchomić/wyłączyć chłodzenie (❄️) lub grzanie (☀️).

Naciśnij przyciski (☀️) lub (❄️), aby dostosować intensywność chłodzenia/grzania w cyklu: 1 stopień (niebieski), 2 poziomy (zielony), 3 poziomy (czerwony).

UŻYTKOWANIE

Załóż nasadkę na głowicę masującą.

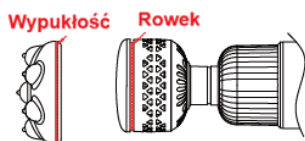

Jeśli używasz nakładki masującej, nie używaj funkcji grzania ani chłodzenia.

Ostrzeżenie: głowicy grzejno-chłodzącej nie można zdemontować.

ŁADOWANIE

Podłącz ładowarkę. Wskaźnik temperatury zaświeci się na niebiesko.

Wskaźnik prędkości miga, pokazując aktualny poziom naładowania akumulatora.

Gdy wskaźnik prędkości przestanie migać, wszystkie 8 wskaźników zaświecą się, a wskaźnik temperatury będzie świecił ciągłym zielonym światłem, akumulator jest naładowany.

Uwaga: Naładuj akumulator, gdy tylko pojawią się dwa ostatnie wskaźniki.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Czyścić wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć suchą ściereczką.
- Przechowywać w suchym, czystym i zacienionym miejscu.
- Ładować akumulator regularnie co 2 miesiące, nawet gdy produkt nie jest używany.
- Chronić przed upadkiem i uderzeniami.
- Nie stawiać innych przedmiotów na produkcie.

PARAMETRY

Waga:	620 g	Zużycie na jedno ładowanie:	Wibracje: 2–3 godziny
Materiał:	ABS		Nagrzewanie: 2–3 godziny
Moc znamionowa:	20 W (maks. 27 W)		Chłodzenie: 2–3 godziny
Napięcie wejściowe:	DC 5 V/2 A	Timer:	Wibracje: 15 min
Wymiary:	183 x 53 x 160 mm		Nagrzewanie: 15 min
Specyfikacja akumulatora:	7,4 V 1800 mAh		Chłodzenie: 15 min
Czas ładowania akumulatora:	Okolo 3 godzin	Chłodzenie:	1 poziom: 21°C
Temperatura pracy:	0~40°C		2 poziom: 19,7°C
Poziomy prędkości:	8 poziomów		3 poziom: 18,2°C
Intensywność chłodzenia	3 stopnie	Ogrzewanie:	1 poziom: 35°C
Intensywność chłodzenia	3 stopnie		2 poziom: 41°C
			3 poziom: 44,5°C

FAQ

Błąd	Prawdopodobna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Nie można uruchomić	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj baterię
	Nieprawidłowe naciśnięcie przycisku zasilania	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy
	Wysoka temperatura otoczenia	Umieść urządzenie w miejscu o niższej temperaturze otoczenia i pozostaw do ostygnięcia na 2 godziny
	Akumulator aktywował zabezpieczenie przed rozładowaniem	Skontaktuj się z serwisem
Nie można naładować	Nieprawidłowo podłączona ładowarka	Ponownie podłącz ładowarkę
	Uszkodzony kabel ładowania	Wymień kabel ładujący
	Kabel i adapter nie spełniają specyfikacji	Używaj wyłącznie ładowarki i kabla zgodnych ze specyfikacją
	Temperatura otoczenia przekracza 40°C, zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem	Umieść urządzenie w miejscu o niższej temperaturze otoczenia i pozostaw do ostygnięcia na 2 godziny
Można uruchomić, ale nie można uruchomić funkcji	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj baterię
Głowica masująca jest poluzowana	Głowica masująca jest nieprawidłowo podłączona	Założ ponownie głowicę masującą
Pistolet wyłącza się po osiągnięciu wysokiego ciśnienia	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przełączanie w tryb czuwania	Uruchom ponownie

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

