



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 7322 inSPORTline Masażer do ciała C02




SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
FUNKCJA I CHARAKTERYSTYKA.....	3
UŻYCIE.....	4
CZĘŚCI.....	4
CZĘSTE PROBLEMY	4
SPECYFIKACJA.....	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	6


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie podłączaj produktu do źródła zasilania, którego napięcie nie pasuje do specyfikacji produktu.
- Trzymaj z dala od wody - urządzenie może zostać uszkodzone przez wodę.
- Nie używaj w wilgotnym otoczeniu, na przykład w łazience lub w pobliżu źródła wody.
- Trzymaj z dala od źródła ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli głowica produktu jest uszkodzona.
- Natychmiast wymieniaj uszkodzone części.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie odłączaj urządzenia ani nie dotykaj przewodu zasilającego, jeśli masz mokre ręce.
- Po każdym użyciu wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub gniazdko są uszkodzone, poproś o pomoc profesjonalistów, nie próbuj naprawiać samodzielnie.
- Po długim użytkowaniu urządzenie może być nagrzane. Nie zaleca się stosowania go do długich masażu, jeśli jesteś wrażliwy na ciepło.
- Urządzenie ma wbudowany czujnik ciepła i może zostać automatycznie wyłączone, jeśli jest zbyt gorące. Możesz kontynuować masaż po ostygnięciu.
- Nie używaj włączonego urządzenia dłużej niż 20 minut.
- Dzieci poniżej 14 lat i osoby cierpiące na choroby psychiczne nie powinny używać urządzenia bez nadzoru.
- Zaleca się, aby kobiety w ciąży nie używały tego produktu

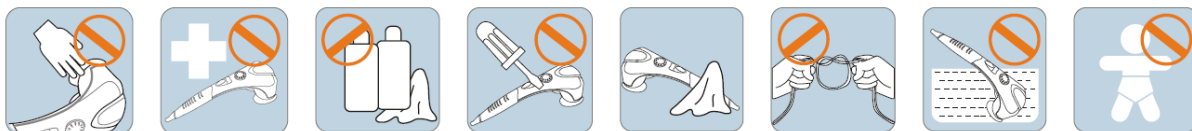

FUNKCJA I CHARAKTERYSTYKA


- Ciesz się masażem wibracyjnym i ciepłem okładem w tym samym czasie.
- W celu łatwego i skutecznego masażu urządzenie jest wyposażone w rozszerzony ergonomiczny uchwyt.
- Proste sterowanie dla łatwej i szybkiej kontroli.
- Możliwość korzystania z dwóch różnych głowic masujących.
- Nowoczesny design dla łatwego i bezpiecznego użytkowania.

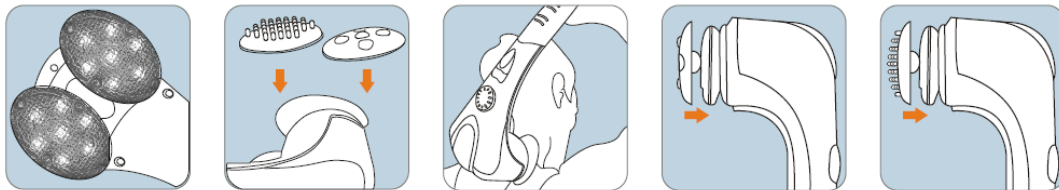


UŻYCIE

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Aby włączyć urządzenie, ustaw przełącznik w pozycji I (masaż) lub II (masaż i kompresja).
- Dostosuj intensywność za pomocą regulatora.
- Prawidłowe korzystanie z urządzenia spowoduje przyjemny i relaksujący masaż oraz brak ryzyka uszkodzenia mięśni.
- Przesuń głowicę masującą na ciało. Nie pozostawiaj głowy w tym samym miejscu dłużej niż 3 minuty. Skoncentruj się na problematycznych częściach ciała i daj masażowi mnóstwo czasu.
- Użyj odpowiedniej głowicy masującej: dostępne są 2 rodzaje - masaż palców lub masaż uciskowy i tonizujący.
- Dostosuj vibracje do aktualnych potrzeb.

Operation mode

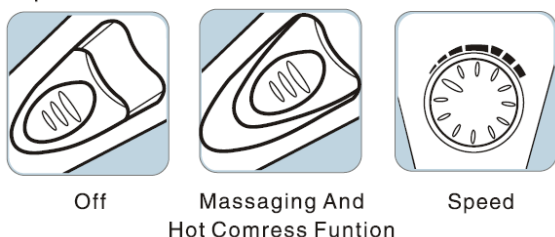

CZĘŚCI

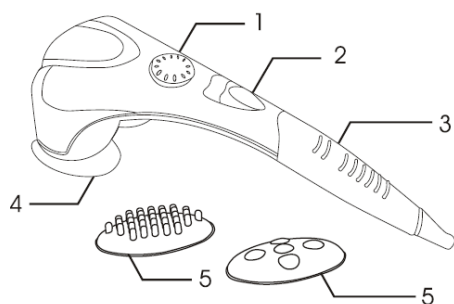

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1.Adjustable speed knob | 2.Power/use mode switch |
| 3.Lengthening handle | 4.Leisure hot pack device |
| 5.Changeable massage mat | |

..

CZĘSTE PROBLEMY

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie działa	Niewłaściwe podłączenie przewodu zasilającego	Sprawdź połączenie przewodu zasilającego
	Główny wyłącznik znajduje się w niewłaściwej pozycji	Sprawdź główny wyłącznik
Silnik się wyłącza	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Wyłącz urządzenie na 5 + minut

SPECYFIKACJA

Model: C02

Nazwa: Masażer wielofunkcyjny

Konfiguracja: 02

Napięcie wejściowe: 220 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz

110 - 120 V, 60 Hz

Wyjście: 28 W

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756