



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 7325 Masażer nóg inSPORTline C22



SPIS TREŚCI

OSTRZEŻENIE, BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA.....	3
NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI	5
FUNKCJE MASAŻU I JEGO SKUTECZNOŚĆ	5
APLIKACJE.....	6
DANE TECHNICZNE PRODUKTU.....	8
GWARANCJA I REKLAMACJA.....	9

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed pierwszym użyciem przeczytać instrukcję, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo korzystać z urządzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa oraz ważne ostrzeżenia. Instrukcja obsługi jest przydatna do wykorzystania w przyszłości

Uwaga: Nasza firma zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego powiadomienia do zmiany wyglądu i charakteru produktu. Należy pamiętać, że kolory każdego produktu mogą się nieco różnić.

OSTRZEŻENIA, BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

1. Ważne wskazówki bezpieczeństwa

- Używaj tylko przewodu zasilającego zaprojektowanego, dla tego produktu.
- Zapobiegaj urazom i uszkodzeniom urządzenia, po użyciu i przed czyszczeniem wyciągaj wtyczkę kabla zasilającego masażera
- Zastosowywać się wyłącznie w sposób opisany w instrukcji.
- Nie używaj żadnych załączników, które nie są zalecane przez producenta.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego - nie używaj go na zewnątrz.
- Użyj masażysta w sposób, który nie jest objęty w niniejszej instrukcji jako zabroniony.
- Zaleca się używanie przyrządu do masażu każdorazowo przez 20 minut.
- Nie używaj produktu, jeśli piłeś alkohol.
- Aby uniknąć obrażeń, nie należy masować funkcji na najwyższej wydajności.

2. Ustawienia masażera

- Nie używać w wysokich temperaturach oraz w warunkach dużej wilgotności, np. łazienka.
- Nie należy korzystać z urządzenia natychmiast po zmianie temperatury.
- Nie należy używać urządzenia w zakurzonych lub jakichkolwiek trudnych warunkach.

3. Osoby, które nie powinny korzystać z urządzenia do masażu

- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby cierpiące na osteoporozę.
- Urządzenie do masażu nie powinno być stosowane przez osoby cierpiące na choroby serca lub osoby z elektronicznym implantem np. rozrusznikiem.
- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby z wysoką temperaturą ciała.
- Urządzenie nie powinno być stosowany przez kobiety w ciąży.
- Osoby z urazami i chorobami skóry nie mogą używać urządzenia do masażu.
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat lub ludzi, którzy nie są w stanie kontrolować urządzenia samodzielnie.
- Urządzenie do masażu powinno być wykorzystane przez ludzi, którzy mają zalecany trybu uśpienia i nie czują się dobrze.
- Nie używać tego urządzenia, chyba że twoje ciało jest całkowicie suche.

4. Bezpieczeństwo

- Upewnić się, że występuje odpowiednie napięcie zasilające.
- Nie odłączać/dołączać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że nie ma wody wokół lub na urządzeniu, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produkt.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić kabli i nie modyfikować aparatu obwodu elektrycznego.
- Do czyszczenia części elektrycznych, takich jak przetącznik i wtyczka, należy używać wilgotnej ściereczki.
- Ze względów bezpieczeństwa, należy nie korzystać urządzenia, jeżeli nie jest wystąpi problem z zasilaniem elektrycznym.

- Jeśli jednostka napędowa nie działa prawidłowo, przestać używać urządzenia i skontaktuj się z centrum serwisowym.

- Jeśli czujesz się źle, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

5. Konserwacja

- konserwacja powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

Użytkownicy nie powinni próbować demontować lub wykonać konserwacji urządzenia przez siebie.

- Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie po użyciu.

- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód lub gniazdko.

- Jeśli nie korzystałeś/aś z urządzenia przez dłuższy okres czasu, należy owinać przewody i umieścić produkt w suchym i czystym środowisku.

- Unikać wysokich temperatur, należy umieścić go z dala od źródła pożaru i unikać długoterminowych narażeń na działanie promieniowania słonecznego na urządzeniu.

- Czyść urządzenie wyłącznie suchą szmatką. Nie należy używać rozpuszczalników, benzyny lub alkoholu.

- Części mechaniczne masażera są specjalnie zaprojektowane i wykonane, by nie wymagały okresowej konserwacji.

- Należy uważać, aby nie uszkodzić urządzenia ostrymi przedmiotami.


- Urządzenie nie było uruchamiane przez dłuższy czas. Używaj go, w krótszych odstępach czasu.

6. Zwyczajne błędy i ich rozwiązania

- Jeżeli urządzenie do masażu nie działa, upewnij się, że jest prawidłowo podłączony do kabla zasilania i naciśnij przycisk On by dostarczyć urządzeniu energii elektrycznej.

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone - przełącznik musi znajdować się w położeniu (I)

NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

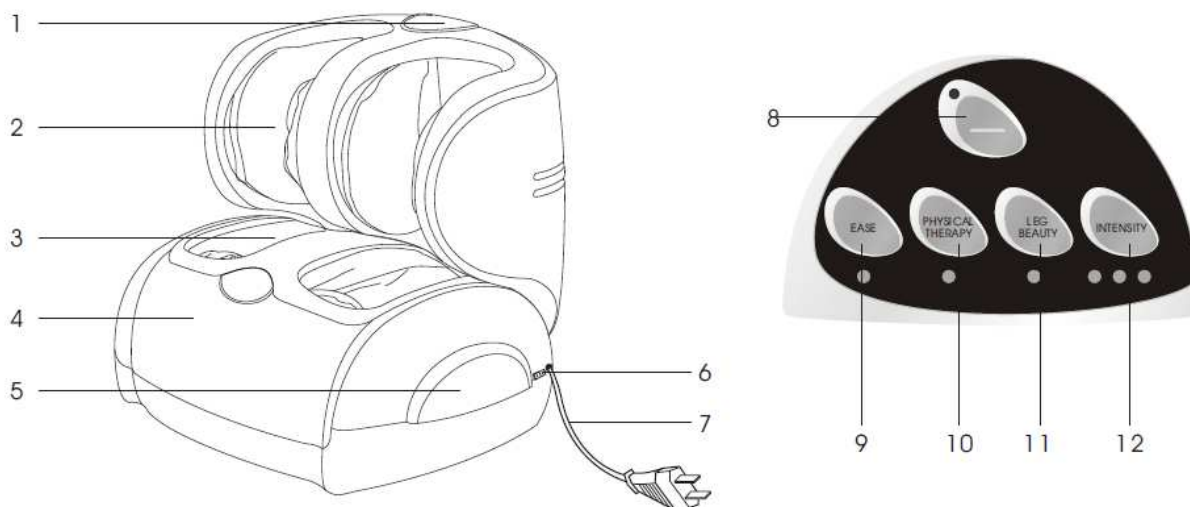

1. Panel kontroli 2. Dwa talerze masażera łydek (przechowywany w warstwie tkaniny) 3. Płyty masażu stóp (przechowywane w warstwie tkaniny) 4. Pokrywa przednia 5. Uchwyt 6. Przełącznik sieci	7. Kabel zasilający 8. Przełącznik 9. Masaż relaksacyjny 10. Masaż leczniczy 11. Masaż stóp do kształtowania 12. Klucz do kontrolowania intensywności (mocna, umiarkowanie mocna, lekka)
--	---

FUNKCJE MASAŻU I JEGO SKUTECZNOŚĆ

Funkcje:

- Można wybrać jeden z trzech automatycznych funkcji masażu - masaż dla kształtowania nóg, masaż relaksacyjny i masaż leczniczy.
- Można swobodnie regulować intensywność masażu: Mocna, średni, lekki.
- Mechanizm masażera ustania kąt przechylenia (do 45 °) i można łatwo dostosować go do aktualnej pozycji użytkownika.
- Mechanizm masujący do masowania mięśni łydki mogą być również regulowany w stosunku do wysokości, jak i długości łydki użytkownika. Mechanizm umożliwia regulację w trzech etapach: etapy są oddalone o 23 mm, a maksymalna wartość marży jest zatem 7 cm.
- Masaż łagodzi ból mięśni łydek po długim spacerze lub po dłuższym staniu.
- Masaż stóp, łydek i pięt wspomaga przemianę materii i poprawia elastyczność.
- Czas masażu jest fabrycznie ustawione na 20 minut.
- Wyjmowany Pad pozwala na łatwe i bezpieczne czyszczenie masażera.
- Urządzenie wyposażone jest w sumie 34 wbudowanej tkaniny bąbelkowej: 12, pad przeznaczony jest do masażu mięśni łydki i 22 poduszki powietrzne, które są umieszczone w mechanizmie do masażu stóp.

Účinky:

- Pomaga zwalczać zmęczenie i łagodzi napięcia oraz ból stóp.

- pobudza krążenie krwi w nogach, łagodzi bóle mięśni i poprawia ukrwienie i elastyczność stopy.
- wykorzystuje wiedzę z zakresu akupunktury i efekt stymulujący na wrażliwych punktów odruchowych na stopach. Wspomaga metabolizm i wzmacnia mięśnie.


POUŽITÍ

- Po podłączeniu do przełącznika zasilania energią elektryczną. Kontrolki panelu sterowania ON / OFF i zaczynają się ustawienia domyślne.

	Przycisk	Funkcje
		Używane dla urządzenia start / stop to funkcja masażu. Po włączeniu masażyra następuje aktywny tryb programowania: 1. Długość masażu. = 20 min, 2. Funkcja automatycznego masażu = masa do kształtowania nóg 3. Intensywność masażu = siła.
System		Usuwa nadmiar złogów tłuszczu i kształtuje nogi stymulując mięśnie.
		Wspomaga metabolizm, pomaga w detoksykacji, poprawia krążenie krwi w organizmie człowieka.
		Pobudza krążenie krwi w nogach i pomaga regenerować mięśnie łydek po dłuższym staniu lub chodzeniu.
		Umożliwia ustawienie 3 różnych poziomów intensywności masażu: Mocna, umiarkowany i łagodny. Użytkownik może wybrać intensywność masażu, która najlepiej odpowiada jego potrzebom.

Aby wyłączyć urządzenie do masażu, należy wyłączyć zasilanie za pomocą głównego włącznika.


POSZCZEGÓLNY PODZIAŁ PUNKTÓW AKUPUNKTURY

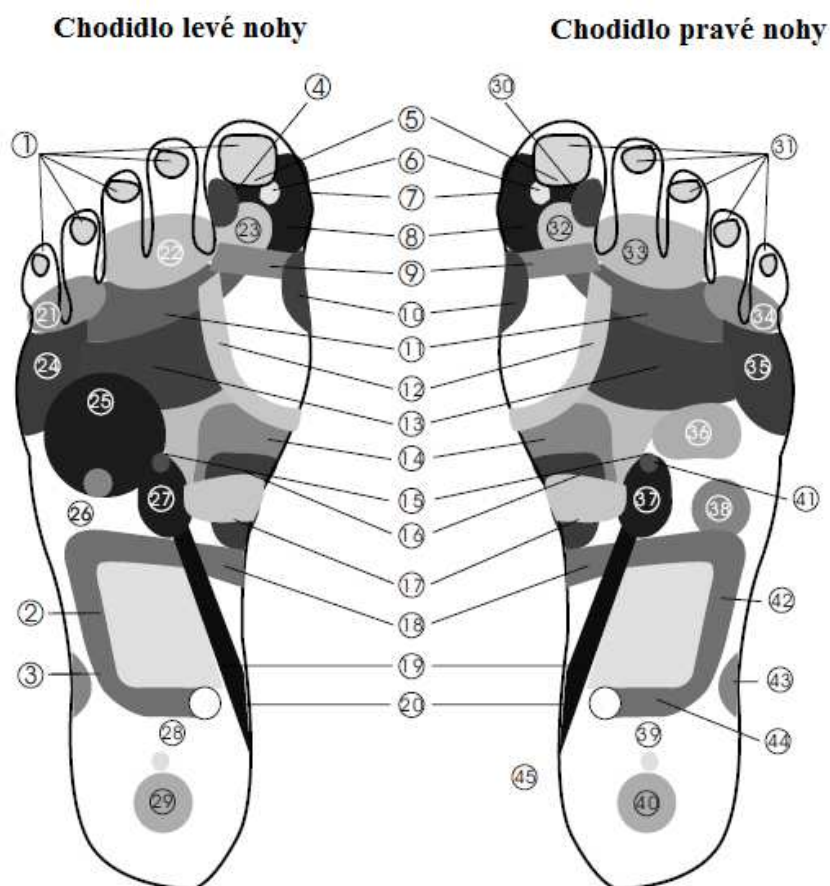


1. Wnęka pierwsza twarzy 2. Druga wstępnica 3. Kolano 4. Czwarty nerw trójdzielny 5. Szyszynki 6. Przysadki 7. Nos 8. Mózgu 9. Krk 10. Przytarczyca organów 11. Mięśnie czworoboczne 12. Tarczycy 13. Płuca i oskrzela 14. Żołądek 15. Nadnercze	16. Trzustka 17. Dwunastnicy 18. Okrężnicy poprzecznej 19. Moczowodu 20. Pęcherza 21. Uszu 22. Oczu 23. Mózdzek 24. Krk 25. Wątroby 26. Pęcherzyka żółciowego 27. Nerki 28. Leczenie bezsenności 29. Gruczoły płciowe 30. Szyszynki	31. Jamy twarzy 32. Mózdzek 33. Oczu 34. Ucho 35. Szyja 36. Serce 37. Nerki 38. Śledziony 39. Leczenie bezsenności 40. Gruczoły płciowe 41. Nadnercze 42. Nadnercze 43. Kolano 44. Odbytnicy i esicy 45. Odbyt
---	--	---

USTAWIENIA MECHANIZMU MASUJĄCEGO

Mechanizm do masowania mięśni łydki może być regulowany w zależności od wysokości i długości łydki do trzech różnych pozycji użytkownika: Różnica między położeniami wynosi około 23 mm, a maksymalna wartość przesunięcia wynosi zatem 7 cm.

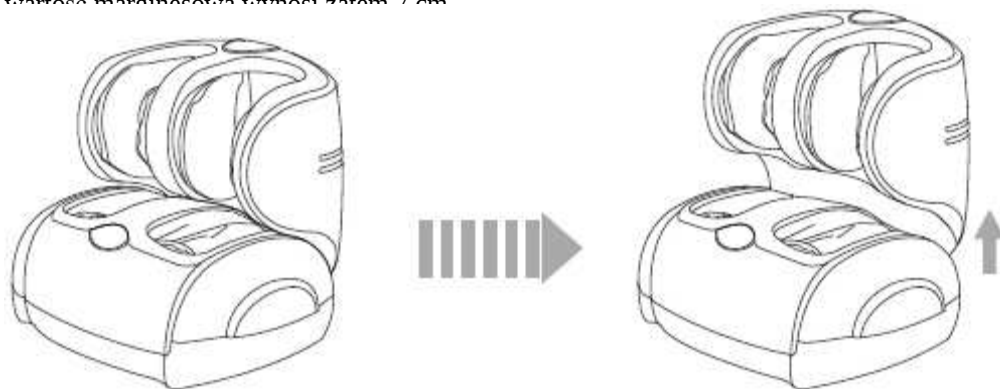

Mechanizm masażera osiąga kąt pochylania (do 45 °) i można go łatwo dostosować do aktualnej pozycji użytkownika.

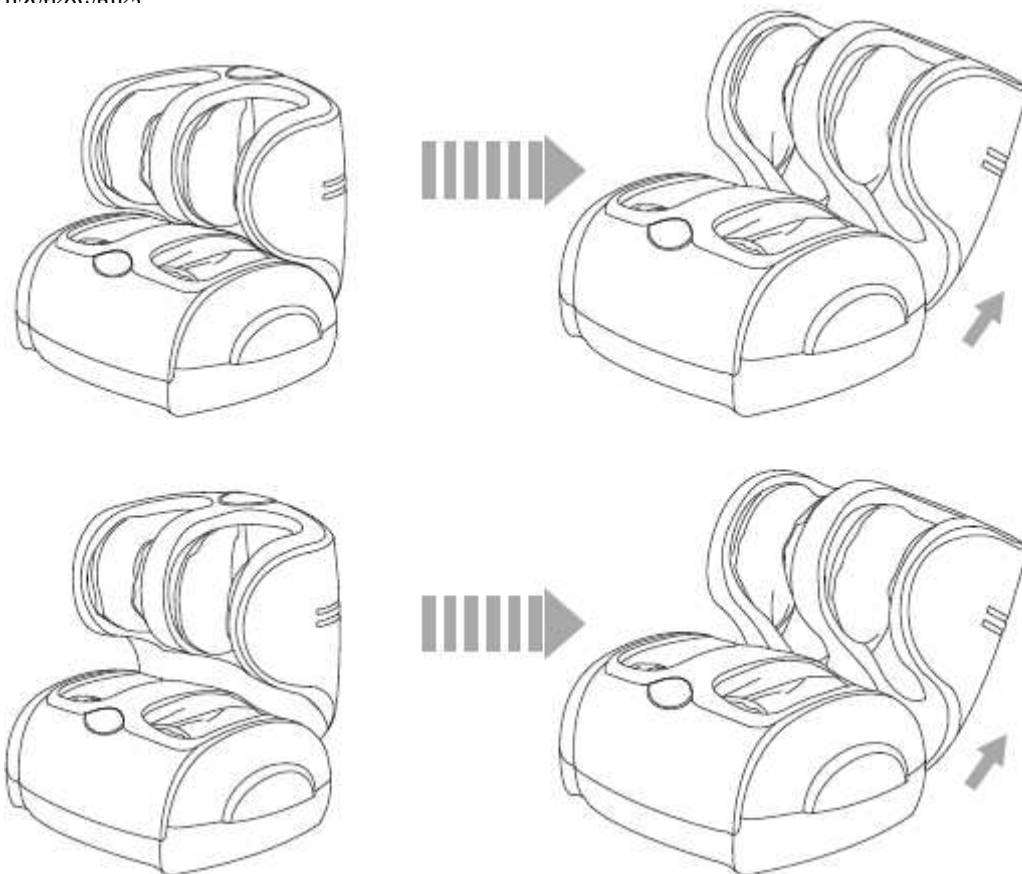

- Zewnętrzna warstwa tkaniny może być wyjmowana i przemywana.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Model: C22

Opis: Urządzenie do masażu i kształtowanie nóg (Kosmetyczka ciśnieniowo powietrzna do nóg) Napięcie wejściowe:

- o 110-120 V, 60 Hz
- o 220-240 V, 50Hz/60Hz

Moc: 45W

Maksymalna zalecana długość masażu: 20 minut, Klasa bezpieczeństwa: II