



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 29104 System masażu kompresyjnego inSPORTline Compafare

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Zalecamy użycie niższej intensywności podczas pierwszego użycia.
- Jeśli odczuwasz ból, dyskomfort lub nudności, natychmiast przerwij używanie urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj razem z innym sprzętem grzewczym (koce, podkładki itp.)
- Trzymaj z dala od wody.
- Przed użyciem oczyść i osusz skórę. Nie używaj na wilgotnej lub mokrej skórze.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem odpowiedzialnego dorosłego lub opiekuna.
- Zalecamy, aby nogi były nieruchome podczas używania.
- Nie spożywaj alkoholu, narkotyków ani leków wpływających na osąd podczas używania.
- Chroń przed uszkodzeniami fizycznymi.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wykazuje nieprawidłowości podczas działania, natychmiast przerwij jego używanie i nie używaj go, dopóki uszkodzenie nie zostanie naprawione.
- Nie używaj, jeśli masz chorobę skóry; stan zapalny, otwarte rany lub niezagojone obrażenia w okolicy użycia; osoby po lub przed operacją żyłaków; choroby serca; zablokowane naczynia krwionośne itp.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Nie stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności (sauny, baseny itp.)
- Nie zasypiaj podczas stosowania.

PARAMETRY

Temperatura pracy: 5°C ~ 40°C	Hałas: < 55 dB
Napięcie wejściowe: 110V-240V, 50/60HZ	Maksymalne ciśnienie: 250 mmHg
Ciśnienie: 86 kPa – 106 kPa	Timer: 10-60±3 min
Zasilanie: 110-240V±22V, 50Hz/60Hz+ 1Hz	

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE

Przed czyszczeniem i konserwacją wyłącz urządzenie. Wyczyść powierzchnię 75% roztworem alkoholu. Zwilżaj tylko ściereczkę, nie dopuść do przedostania się płynów do urządzenia. Po czyszczeniu pozwól mu swobodnie wyschnąć i przechowuj w czystym, zacienionym i suchym miejscu..

UŻYTKOWANIE



1. Zmniejszanie ciśnienia

Naciśnij, aby zmniejszyć wartość o jeden poziom

2. Zwiększanie ciśnienia

Naciśnij, aby zwiększyć wartość o jeden poziom

3. Wybór komory powietrznej

Użyj przycisków 1 – 6, aby wybrać komorę powietrzną. Dioda wskaźnika pokazuje aktywne komory, migające światło aktualnie napompowanej komory.

4. Wybór programu

Naciśnij, aby wybrać program do użycia

5. Timer

Ustaw czas działania

6. Wyłącznik zasilania

Przycisk jest niebieski podczas pracy, pomarańczowy po zatrzymaniu

7. Zasilanie

100V-240V, 50/60Hz

8. Podłączanie przewodów powietrznych.

Podłącz i uruchom, panel sterowania zareaguje na dotknięcie przycisków.

Kierunek podłączenia węża powietrznego: wąż i przyłącze węża są oznaczone trójkątem. Upewnij się, że są skierowane w tym samym kierunku.

Podłącz węże powietrzne do poduszek powietrznych.

Założ system masażu i zabezpiecz rzepem.

Po uruchomieniu ustaw czas trwania masażu od 10 do 60 min. Ciśnienie można ustawić w zakresie od 30 do 250 mmHg. Czas nadmuchiwanie każdej poduszki powietrznej zależy od liczby aktywnych poduszek powietrznych i ustawionego ciśnienia.

Po użyciu wyłącz urządzenie i wyjmij system masażu, otwierając zamek błyskawiczny.

Aby uwolnić nadmiar powietrza, odłącz węże i wypchnij powietrze z poduszek.

PROGRAMY


A: Program stopniowo pompuje i opróżnia poduszki powietrzne od stóp do ud. Każda sekcja jest pompowana przez ok. 12 sekund.

B: Program pompuje poduszki powietrzne od stóp do ud. Każda sekcja pozostaje napompowana po napompowaniu. Czas pompowania jednej sekcji wynosi ok. 12 sekund, a pompowanie wszystkich 6 poduszek zajmuje ok. 72 sekund.

C: Program łączy pompowanie dwóch poduszek powietrznych. Każde dwie sekcje są pompowane i opróżnione od stóp do ud. Całkowity czas cyklu wynosi około 75 sekund.

D: Program pompuje wszystkie poduszki powietrzne przez 72 sekundy, a następnie opróżnia je przez 25 sekund. Cykl powtarza się przez ustawiony czas.

E: Program powtarza programy A (przez 70 sekund) i B (przez 70 sekund). Po jednym cyklu (140 sekund) poduszki powietrzne będą opróżniane przez 25 sekund, a cykl będzie powtarzany.

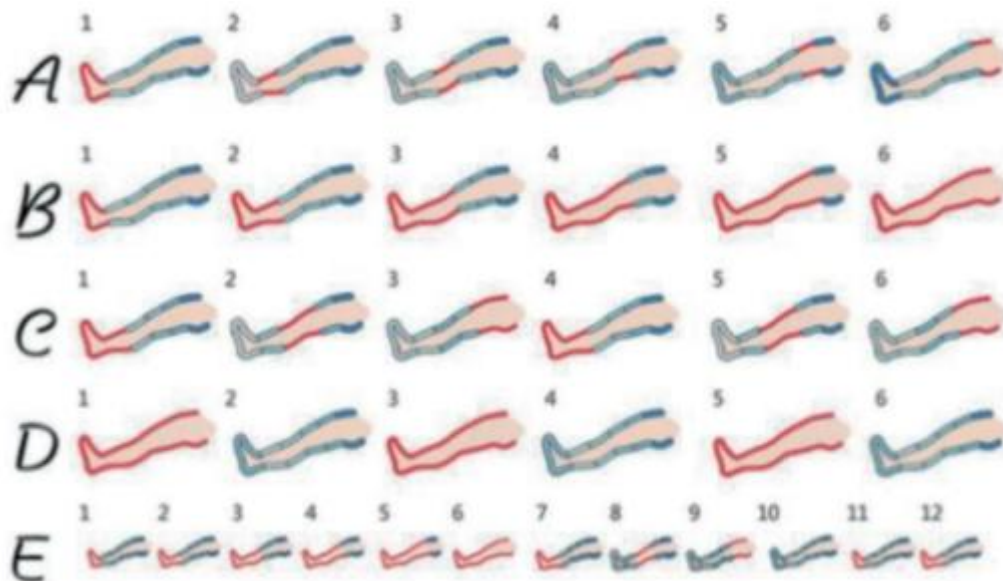

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

